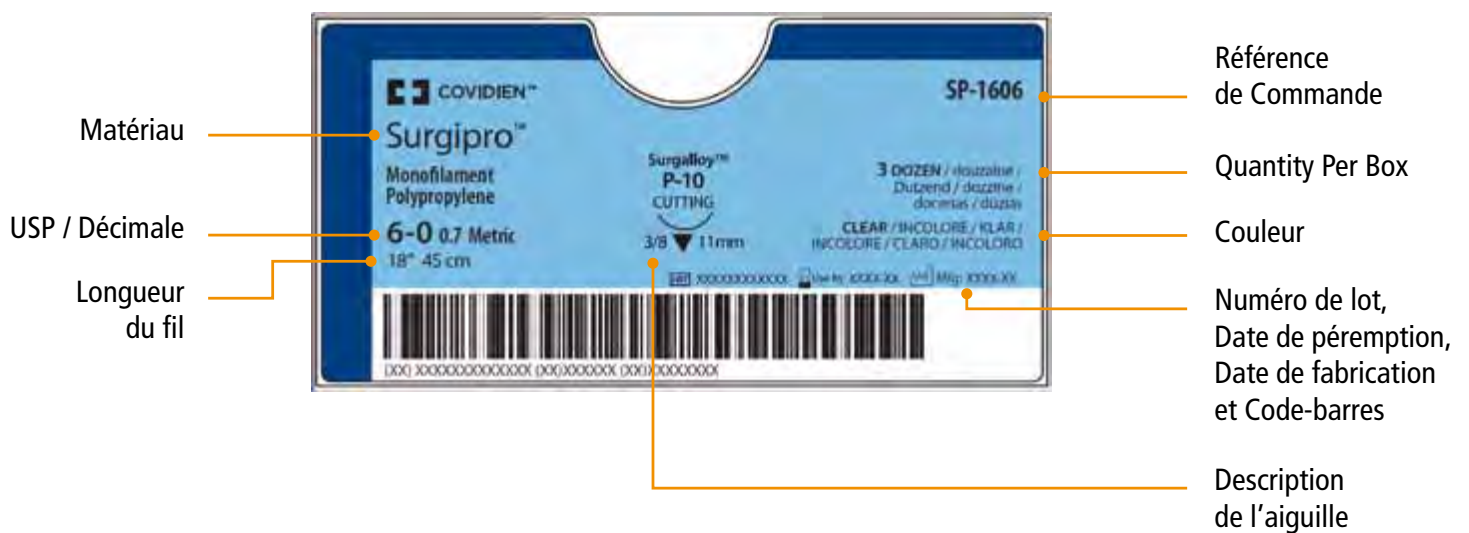
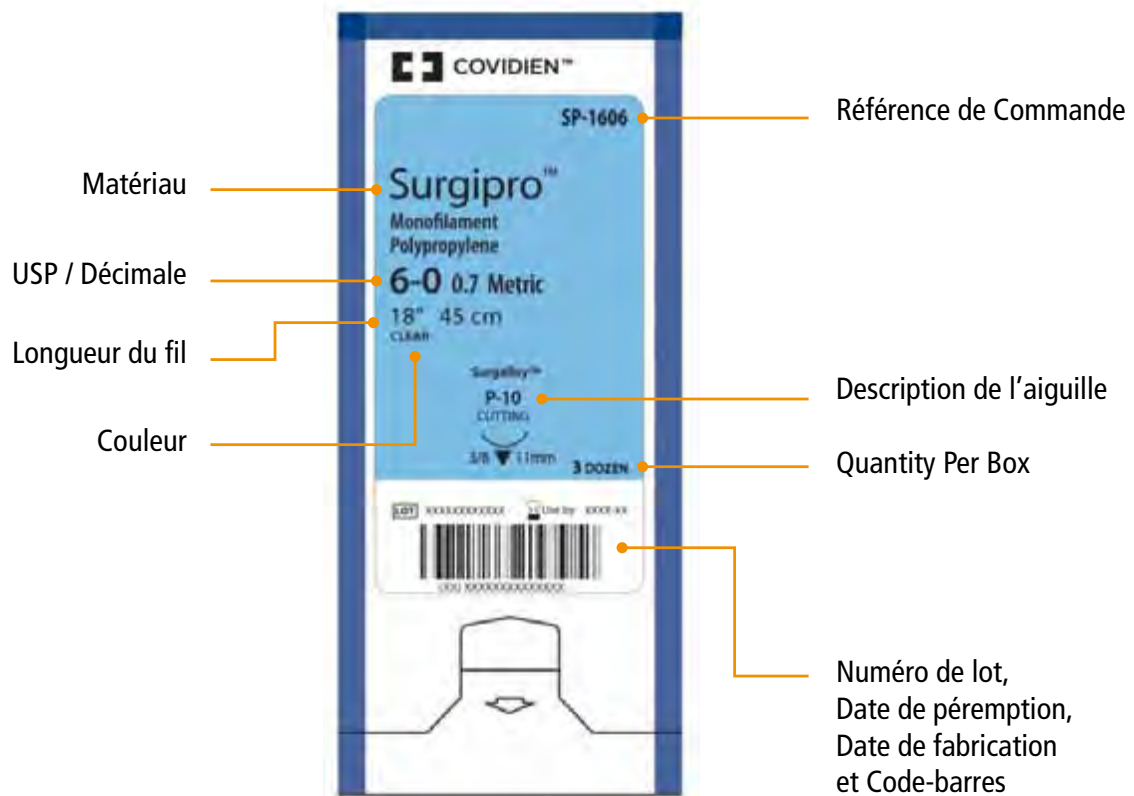

















Catalogue **Fermeture des Plaies**

Charte graphique et couleur du conditionnement



	Polysorb™ Suture
	Caprosyn™ Suture
	Biosyn™ Suture
	Maxon™ Suture
	Surgipro™ Suture & Surgipro™ II Suture
	Ti-Cron™ Suture & Surgidac™ Suture
	Vascufil™ Suture
	Flexon™ Temporary Cardiac Pacing Lead
	Steel Suture
	Monosof™/Dermadon™ Suture
	Novafil™ Suture
	Surgilon™ Suture
	Sofsilk™ Suture

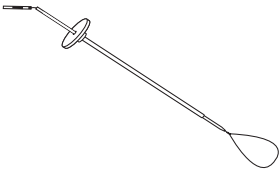
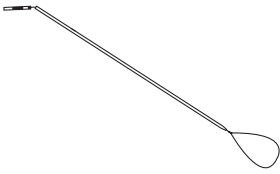
Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

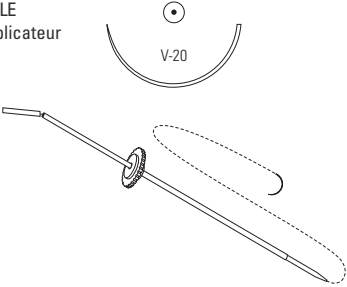
Description:	Les sutures synthétiques résorbables Polysorb™ sont des tresses enduites composées de copolymères glycolide/lactide Lactomer™ (polyester synthétique composé de glycolide et de lactide dérivés des acides glycolique et lactique). La fabrication des fils Polysorb™ se fait par l'enduction d'un mélange de Caprolactone, Glycolide et Stéarate de Calcium (calcium stearoyl lactylate).
Caractéristiques:	Le process avancé de fabrication de la molécule de Lactomer™ 9-1, le process exclusif d'enduction apportent à la suture: <ul style="list-style-type: none">- Une résistance exceptionnelle et optimale pendant et au-delà de la phase critique de cicatrisation- Une excellente sécurité du nœud- Une grande souplesse et donc une excellente maniabilité- Une prévisibilité des résultats en terme de résorption "
Indications:	Les sutures Polysorb™ sont indiquées pour le rapprochement, la suture et ligature des tissus moux, y compris en chirurgie ophthalmique. Elles sont contre indiquées pour les tissus cardio-vasculaires et en neurochirurgie.
Actions:	Une suture synthétique résorbable Polysorb™ produit une réaction inflammatoire aiguë minimale dans les tissus, suivie d'une encapsulation graduelle de la suture par les tissus fibreux connectifs. On constate une perte progressive de résistance et par la suite la résorption par hydrolyse, au cours de laquelle le copolymère glycolide/lactide Lactomer™ se décompose en acides glycolique et lactique pour être ensuite résorbé et métabolisé par le corps.
Résistance à la traction:	Des études d'implantation chez les animaux ont démontré que les sutures Polysorb™ ont une résistance initiale au nœud d'environ 140% en per opératoire, par rapport aux normes USP et EP, et conservent environ 80% de leur résistance deux semaines après l'implantation et environ 30% trois semaines après l'implantation.
Résorption:	La résorption commence par une perte de résistance puis par une perte de masse. La résorption quasi totale des sutures Polysorb™ intervient entre 56 et 70 jours.
Stérilisation:	Oxyde d'éthylène.
Présentation:	Les sutures synthétiques résorbables Polysorb™ sont disponibles en format USP et EP: de la décimale 8-0 (métrique 0,4) à 2 (métrique 5). Les sutures sont fournies stériles. Elles sont disponibles en incolore et violet. Les sutures Polysorb™ sont disponibles en aiguillées, brins pré-découpés non-aiguillés, bobines et boucles en emballage d'une, deux ou trois douzaines."

Ligatures							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
Brins	4-0	1.5	12x45	Incolore	24		L-1
	4-0	1.5	12x45	Violet	24		L-11
	4-0	1.5	3x45	Violet	36		L-71
	4-0	1.5	6x45	Violet	24		L-20
	3-0	2	12x45	Incolore	24		L-2
	3-0	2	12x45	Violet	24		L-12
	3-0	2	3x45	Violet	36		L-72
	3-0	2	6x45	Violet	24		L-22
	3-0	2	12x60	Violet	24		L-32
	3-0	2	3x75	Violet	24		L-402
	3-0	2	6x75	Violet	24		L-38
	2-0	3	12x45	Incolore	24		L-3
	2-0	3	12x45	Violet	24		L-13
	2-0	3	3x45	Violet	36		L-73
	2-0	3	6x45	Violet	24		L-23
	2-0	3	12x60	Violet	24		L-33
	2-0	3	12x75	Incolore	24		L-43
	2-0	3	3x75	Incolore	24		L-95
	2-0	3	3x75	Violet	24		L-403
	2-0	3	6x75	Violet	24		L-39
	0	3.5	12x45	Incolore	24		L-24
	0	3.5	12x45	Violet	24		L-27
	0	3.5	3x45	Violet	36		L-74
	0	3.5	6x45	Incolore	24		L-4
	0	3.5	6x45	Violet	24		L-14
	0	3.5	12x60	Violet	24		L-34
	0	3.5	3x75	Violet	24		L-404
	0	3.5	6x75	Violet	24		L-40
	1	4	12x45	Incolore	24		L-25
	1	4	12x45	Violet	24		L-35
	1	4	3x45	Violet	36		L-75
	1	4	6x45	Incolore	24		L-5
	1	4	6x45	Violet	24		L-15
	1	4	12x60	Violet	24		L-36
	1	4	3x75	Violet	24		L-405
	1	4	6x75	Violet	24		L-41
	2	5	12x45	Incolore	24		L-26
	2	5	12x45	Violet	24		L-28
	2	5	3x45	Violet	36		L-76

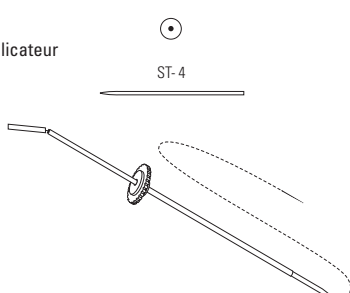
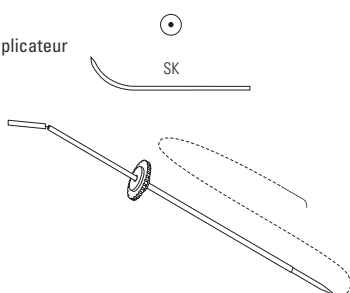
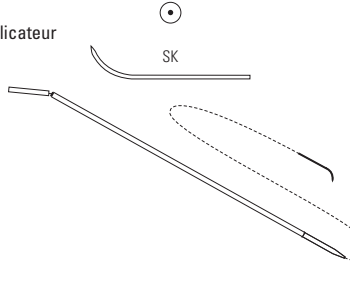
Ligatures							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
Brins	2	5	3x75	Violet	24		L-406
	2	5	6x75	Violet	24		L-42
Brin	4-0	1.5	150	Violet	36		L-111
	3-0	2	150	Incolore	36		L-102
	3-0	2	150	Violet	36		L-112
	2-0	3	150	Incolore	36		L-103
	2-0	3	150	Violet	36		L-113
	0	3.5	150	Incolore	36		L-104
	0	3.5	150	Violet	36		L-114
	1	4	150	Incolore	36		L-105
	1	4	150	Violet	36		L-115
	2	5	150	Violet	36		L-116
Bobine	4-0	1.5	150	Incolore	24		LL-101
	4-0	1.5	150	Violet	24		LL-111
	4-0	1.5	250	Violet	24		LL-221
	3-0	2	150	Incolore	24		LL-102
	3-0	2	150	Violet	24		LL-112
	3-0	2	250	Incolore	24		LL-322
	3-0	2	250	Violet	24		LL-222
	3-0	2	360	Violet	24		LL-423
	2-0	3	150	Incolore	24		LL-103
	2-0	3	150	Violet	24		LL-113
	2-0	3	250	Incolore	24		LL-323
	2-0	3	250	Violet	24		LL-223
	2-0	3	360	Violet	24		LL-233
	0	3.5	150	Incolore	24		LL-104
	0	3.5	150	Violet	24		LL-114
	0	3.5	250	Incolore	24		LL-324
	0	3.5	250	Violet	24		LL-224
	1	4	150	Violet	24		LL-115
	1	4	250	Violet	24		LL-225
	2	5	150	Violet	24		LL-116
2	5	250	Violet	24		LL-226	

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1





Surgitie™							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
BOUCLE avec applicateur 	2-0	3	52	Violet	6	Endoscopie	EL-20-L
	0	3.5	52	Violet	6	Endoscopie	EL-21-L
BOUCLE sans applicateur 	2-0	3	52	Violet	6	Endoscopie	EL-22-LN
	0	3.5	52	Violet	6	Endoscopie	EL-23-LN

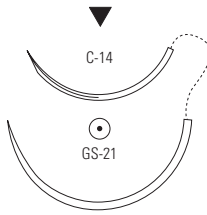


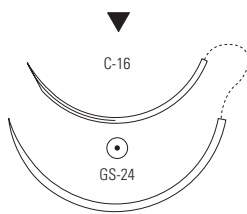
Surgiwip™							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE avec applicateur 26 mm 	2-0	3	120	Violet	6	Endoscopie	ELW-43
	0	3.5	120	Violet	6	Endoscopie	ELW-42

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

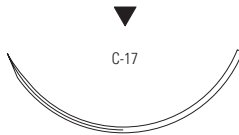



Surgiwip™								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
DROITE avec applicateur 19 mm 	2-0	3	120	Violet	6	Endoscopie		ELW-31
	0	3.5	120	Violet	6	Endoscopie		ELW-30
SKI avec applicateur 23 mm 	2-0	3	120	Violet	6	Endoscopie		ELW-53
	0	3.5	120	Violet	6	Endoscopie		ELW-52
SKI sans applicateur 23 mm 	2-0	3	120	Violet	6	Endoscopie		ELW-51
	0	3.5	120	Violet	6	Endoscopie		ELW-50

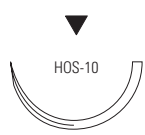
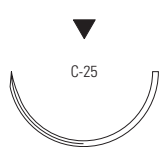

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 12 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	36		SL-171	
	5-0	1	45	Incolore	36		SL-172	
3/8 CERCLE 16 mm 	5-0	1	75	Incolore	36		SL-606	
	5-0	1	75	Violet	36		SL-630	
	4-0	1.5	75	Incolore	36		SL-605	
	4-0	1.5	75	Violet	36		SL-607	
	3-0	2	75	Incolore	36		SL-604	
	3-0	2	75	Violet	36		SL-608	
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Incolore	36		SL-639	
	5-0	1	75	Incolore	36		SL-690	
	5-0	1	75	Violet	36		SL-634	
	4-0	1.5	45	Incolore	12		SL-638	
	4-0	1.5	75	Incolore	36		SL-691	
	4-0	1.5	75	Incolore	12		SL-691-G	
	4-0	1.5	75	Violet	36		SL-635	
	4-0	1.5	75	Violet	12		SL-635-G	
	3-0	2	45	Incolore	36		SL-637	
	3-0	2	75	Incolore	36		SL-822	
	3-0	2	75	Incolore	12		SL-822-G	
	3-0	2	75	Violet	36		SL-636	
	3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	75	Incolore	36		SL-692
4-0		1.5	75	Incolore	12		SL-692-G	
4-0		1.5	75	Violet	36		SL-695	
3-0		2	75	Incolore	36		SL-693	
3-0		2	75	Violet	36		SL-694	
2-0		3	75	Incolore	36		SL-823	
2-0		3	75	Violet	36		CL-823	

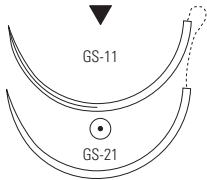



Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 24 mm 1/2 CERCLE 37 mm	2-0	3	150	Violet	36			CL-900
3/8 CERCLE 26 mm	2-0	3	75	Incolore	36			SL-586
3/8 CERCLE 30 mm	2-0	3	75	Incolore	36			SL-696
3/8 CERCLE 30 mm 1/2 CERCLE 40 mm	2-0	3	150	Incolore	36			CL-977


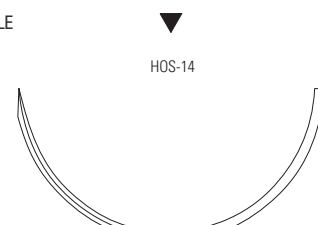
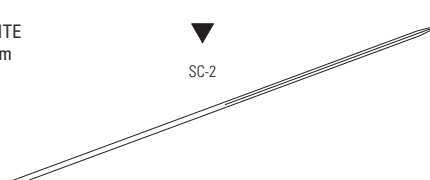
Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe triangulaire inversée							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 39 mm 	2-0	3	75	Incolore	36		SL-674
	2	5	90	Incolore	36		SL-675
1/2 CERCLE 20 mm 	4-0	1.5	75	Incolore	36		SL-629
	4-0	1.5	75	Violet	36		SL-820
1/2 CERCLE 24 mm 	3-0	2	45	Incolore	36		CL-85
	3-0	2	5x45	Violet	12	D-Tach™	SL-83-MG
	3-0	2	75	Incolore	36		SL-613
	3-0	2	75	Violet	36		SL-632
	3-0	2	75	Violet	12		SL-632-G
	2-0	3	75	Incolore	36		SL-612
	2-0	3	75	Violet	36		SL-631
1/2 CERCLE 26 mm 	3-0	2	5x45	Incolore	12	D-Tach™	CL-53-MG
	3-0	2	75	Incolore	36		CL-868
	3-0	2	75	Violet	36		CL-768
	2-0	3	5x45	Incolore	12	D-Tach™	CL-52-MG
	2-0	3	75	Incolore	36		CL-869
	2-0	3	75	Violet	36		CL-769
	0	3.5	75	Incolore	36		CL-870
1	4	75	Incolore	36		CL-867	

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm H 	2-0	3	5x45	Incolore	12	D-Tach™		CL-54-MG
	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™		CL-56-MG
	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™		CL-57-MG
	0	3.5	75	Violet	36			CL-546
	1	4	5x45	Violet	12	D-Tach™		CL-58-MG
	1	4	75	Incolore	36			CL-581
	1	4	75	Violet	36			CL-547
	2	5	75	Violet	36			CL-552
1/2 CERCLE 30 mm 	2-0	3	75	Violet	36			SL-622
	0	3.5	90	Incolore	36			SL-721
	1	4	90	Violet	36			SL-722
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	75	Incolore	36			CL-542
	3-0	2	75	Violet	36			CL-815
	2-0	3	75	Incolore	36			CL-543
	2-0	3	75	Violet	36			CL-816
	2-0	3	90	Violet	36			CL-916
	0	3.5	75	Incolore	36			CL-544
	0	3.5	75	Violet	36			CL-817
	0	3.5	90	Incolore	36			CL-534
	0	3.5	90	Violet	36			CL-917
	1	4	75	Incolore	36			CL-545
	1	4	75	Violet	36			CL-818
	1	4	90	Incolore	36			CL-535
	1	4	90	Violet	36			CL-918
	2	5	75	Violet	36			CL-819
	2	5	90	Incolore	36			CL-533
	2	5	90	Violet	36			CL-919





Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	150	Violet	36		CL-992	
1/2 CERCLE 37 mm H 	2-0	3	75	Incolore	36		CL-536	
	2-0	3	75	Violet	36		CL-526	
	0	3.5	5x45	Incolore	12	D-Tach™	CL-75-MG	
	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-70-MG	
	0	3.5	75	Incolore	36		CL-537	
	0	3.5	75	Violet	36		CL-527	
	1	4	75	Incolore	36		CL-538	
	1	4	75	Violet	36		CL-528	
1/2 CERCLE 40 mm 	2-0	3	75	Incolore	36		CL-595	
	2-0	3	75	Violet	36		CL-833	
	0	3.5	75	Incolore	36		CL-596	
	0	3.5	75	Violet	36		CL-804	
	0	3.5	90	Violet	36		CL-933	
	1	4	75	Incolore	36		CL-597	
	1	4	75	Violet	36		CL-805	
	1	4	90	Violet	36		CL-936	
	2	5	90	Violet	36		CL-937	
1/2 CERCLE 40 mm H 	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-82-MG	
	0	3.5	5x45	Incolore	12	D-Tach™	CL-76-MG	
	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-80-MG	
	1	4	5x45	Incolore	12	D-Tach™	CL-77-MG	
	1	4	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-81-MG	

Pointe triangulaire inversée							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 48 mm  GS-13	2-0	3	75	Violet	36		CL-571
	0	3.5	75	Violet	36		CL-568
	0	3.5	90	Violet	36		CL-927
	1	4	75	Incolore	36		CL-555
	1	4	75	Violet	36		CL-569
	1	4	90	Violet	36		CL-928
	2	5	75	Incolore	36		CL-960
	2	5	75	Violet	36		CL-570
	2	5	90	Incolore	36		CL-939
	2	5	90	Violet	36		CL-929
1/2 CERCLE 55 mm H  HOS-14	2	5	75	Violet	36		CL-979
DROITE 60 mm  SC-2	4-0	1.5	75	Incolore	36		SL-644
	4-0	1.5	75	Violet	36		SL-654
	3-0	2	75	Incolore	36		SL-643
	3-0	2	75	Violet	36		SL-653
	2-0	3	75	Incolore	36		SL-642
	2-0	3	75	Violet	36		SL-652
	2-0	3	75	Violet	12		SL-652-G





Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe triangulaire inversée de précision


Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-1625
	6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-1625-G
	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-1689
	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-1689-G
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5688
	6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5688-G
	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5687
	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5687-G
	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5690
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5691-G
3/8 CERCLE 16 mm 	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5626
	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5626-G
	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5686
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5686-G
	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5620
	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5621
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5636
	5-0	1	75	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5639
	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5627
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5627-G
	4-0	1.5	45	Violet	36	Surgalloy™	SL-5629
	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5637
	3-0	2	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5628
	3-0	2	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5628-G
	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5638

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe triangulaire inversée de précision


Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5641
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5641-G
	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5678
	3-0	2	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5640
	3-0	2	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5640-G
	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5679
	3-0	2	75	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5679-G
	2-0	3	75	Incolore	36		SL-5680
1/2 CERCLE 9 mm 	5-0	1	45	Incolore	12		SL-1644-G
1/2 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-1613
	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-1614
	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-1615
1/2 CERCLE 16 mm 	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5632
	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5632-G
	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SL-5633
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SL-5633-G

Pointe triangulaire inversée




Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 7 mm  Courbure 158° Long. Corde 5.76 mm Rayon 3.18 mm	6-0	0.7	45	Violet	12	Surgalloy™	L-1551-K

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1




Pointe triangulaire inversée

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
<p>3/8 CERCLE 13 mm</p>  <p>Courbure 130° Long. Corde 10.37 mm Rayon 5.72 mm</p>	5-0	1	30	Incolore	12	Surgalloy™	L-4323-K



Pointe triangulaire de précision





Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
<p>3/8 CERCLE 11 mm</p> 	6-0	0.7	45	Incolore	36		SL-1660
	5-0	1	45	Incolore	36		SL-1659
	4-0	1.5	45	Incolore	36		SL-1658
<p>3/8 CERCLE 16 mm</p> 	5-0	1	45	Incolore	36		SL-1656
	4-0	1.5	45	Incolore	36		SL-1657
<p>3/8 CERCLE 19 mm</p> 	5-0	1	45	Incolore	36		SL-1651
	4-0	1.5	45	Incolore	36		SL-1653
	3-0	2	45	Incolore	36		SL-1654

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe spatulée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/4 CERCLE 8 mm Courbure 90° Long. Corde 7.18 mm Rayon 5.08 mm		6-0	0.7	30	Incolore	12	Surgalloy™	L-1745-K
		6-0	0.7	20	Violet	12	Surgalloy™	L-1740-K
		6-0	0.7	30	Violet	12	Surgalloy™	L-1742-K
		6-0	0.7	45	Incolore	24	Surgalloy™	L-2752-K
		5-0	1	20	Violet	12	Surgalloy™	L-1739-K
		5-0	1	30	Incolore	12	Surgalloy™	L-553-K
		5-0	1	30	Violet	12	Surgalloy™	L-1785-K
		5-0	1	45	Incolore	24	Surgalloy™	L-2753-K
		5-0	1	45	Violet	12	Surgalloy™	L-2553-K
1/4 CERCLE 7 mm Courbure 90° Long. Corde 5.74 mm Rayon 4.06 mm		6-0	0.7	30	Violet	12	Surgalloy™	L-1756-K
		6-0	0.7	45	Violet	12	Surgalloy™	L-1755-K
1/4 CERCLE 10 mm Courbure 90° Long. Corde 8.44 mm Rayon 5.97 mm		6-0	0.7	20	Violet	12	Surgalloy™	L-1590-K
		6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™	L-1670-K
		6-0	0.7	45	Violet	12	Surgalloy™	L-1791-K
		5-0	1	20	Violet	12	Surgalloy™	L-1591-K
		5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	L-1669-K
		5-0	1	45	Violet	12	Surgalloy™	L-1792-K



Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe spatulée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 8 mm Courbure 180° Long. Corde 4.80 mm Rayon 2.41 mm	 SS-2 	6-0	0.7	30	Incolore	12	Surgalloy™	L-0213-K
		5-0	1	30	Incolore	12	Surgalloy™	L-0223-K



Pointe spatulée de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/4 CERCLE 6 mm Courbure 100° Long. Corde 5.90 mm Rayon 3.94 mm Microns 200	 SE-100-8 	6-0	0.7	45	Violet	12	Surgalloy™	L-1750-K
		8-0	0.4	30	Violet	12	Surgalloy™	L-2750-K
3/8 CERCLE 6 mm Courbure 135° Long. Corde 4.80 mm Rayon 2.60 mm Microns 200	 SE-140-8 	7-0	0.5	30	Violet	12	Surgalloy™	L-2751-K

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe spatulée de précision

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 6 mm Courbure 135° Long. Corde 4.80 mm Rayon 2.60 mm Microns 200	 SE-140-8	8-0	0.4	20	Violet	12	Surgalloy™ L-2747-K
		8-0	0.4	30	Violet	12	Surgalloy™ L-2748-K
		8-0	0.4	45	Violet	12	Surgalloy™ L-5118-K
		7-0	0.5	30	Violet	12	Surgalloy™ L-1796-K
		7-0	0.5	45	Violet	12	Surgalloy™ L-1897-K
1/2 CERCLE 6 mm Courbure 160° Long. Corde 3.90 mm Rayon 1.98 mm Microns 200	 SE-160-8	8-0	0.4	20	Violet	12	Surgalloy™ L-2574-K
		8-0	0.4	30	Violet	12	Surgalloy™ L-2749-K
		7-0	0.5	45	Violet	12	Surgalloy™ L-1787-K
		6-0	0.7	45	Violet	12	Surgalloy™ L-1741-K



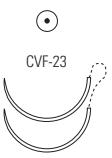
Pointe ronde

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 13 mm  CV-11	6-0	0.7	75	Violet	36		GL-889
	5-0	1	75	Violet	36		GL-890
3/8 CERCLE 17 mm  CV-15	4-0	1.5	75	Violet	36		GL-881
	3-0	2	75	Violet	36		GL-882


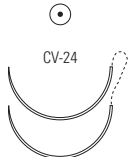

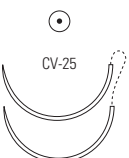
Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 22 mm 	4-0	1.5	75	Violet	36			CL-304
	3-0	2	75	Violet	36			GL-303
	2-0	3	75	Violet	36			GL-302
3/8 CERCLE 26 mm 	2-0	3	75	Violet	36			CL-457
3/8 CERCLE 32 mm 	3-0	2	75	Violet	36			GL-522
	2-0	3	75	Violet	36			GL-523
	0	3.5	75	Violet	36			GL-524
1/2 CERCLE 12 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	36	Surgalloy™		UL-101
	6-0	0.7	45	Violet	36	Surgalloy™		UL-102
	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™		SL-432
	4-0	1.5	45	Incolore	36			SL-431
1/2 CERCLE 13 mm 	5-0	1	5x45	Violet	12	D-Tach™		GL-45-MG
	5-0	1	75	Incolore	36			GL-885
	4-0	1.5	5x45	Violet	12	D-Tach™		GL-44-MG
	4-0	1.5	75	Incolore	36			GL-884
	4-0	1.5	75	Violet	36			CL-782
	3-0	2	75	Violet	36			CL-783


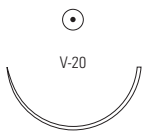
Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 17 mm 	6-0	0.7	75	Violet	36			UL-201
	5-0	1	75	Incolore	36			UL-213
	5-0	1	75	Violet	36			UL-202
	4-0	1.5	5x45	Incolore	12	D-Tach™		UL-46-MG
	4-0	1.5	5x45	Violet	12	D-Tach™		GL-46-MG
	4-0	1.5	75	Incolore	36			UL-212
	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™		UL-303
	3-0	2	5x45	Incolore	12	D-Tach™		UL-47-MG
	3-0	2	5x45	Violet	12	D-Tach™		GL-47-MG
	3-0	2	75	Incolore	36			UL-215
	3-0	2	75	Violet	36			UL-204
	3-0	2	120	Violet	24	Endoscopie		EL-430
	2-0	3	75	Incolore	36			UL-216
	2-0	3	75	Violet	36			UL-205
1/2 CERCLE 17 mm 	5-0	1	90	Violet	36			CL-220
1/2 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™		UL-214
	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™		UL-203
1/2 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	90	Violet	36	Surgalloy™		CL-219

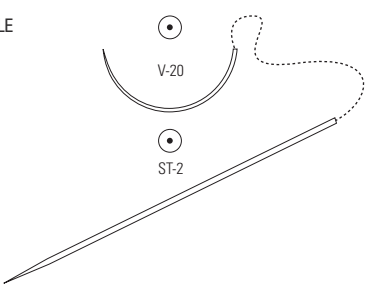
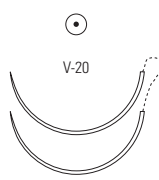
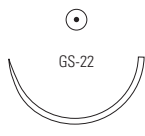
Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 20 mm 	5-0	1	75	Incolore	36			CL-469
	4-0	1.5	75	Incolore	36			CL-470
	4-0	1.5	75	Violet	36			CL-460
	3-0	2	5x45	Violet	12	D-Tach™		CL-463-M
	3-0	2	75	Incolore	36			CL-471
	3-0	2	75	Violet	36			CL-461
	2-0	3	75	Violet	36			CL-462
1/2 CERCLE 20 mm 	3-0	2	90	Violet	36			CL-464
1/2 CERCLE 22 mm 	4-0	1.5	5x45	Violet	12	D-Tach™		GL-34-MG
	4-0	1.5	75	Incolore	36			GL-191
	4-0	1.5	75	Violet	36			GL-181
	3-0	2	18	Violet	36	Endoscopie		EL-410
	3-0	2	5x45	Violet	12	D-Tach™		GL-33-MG
	3-0	2	75	Incolore	36			GL-192
	3-0	2	75	Violet	36			GL-182
	3-0	2	5x75	Violet	12	D-Tach™		GL-182-M
	3-0	2	120	Violet	24	Endoscopie		EL-440
	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™		GL-32-MG
	2-0	3	75	Violet	36			GL-183
1/2 CERCLE 22 mm 	3-0	2	90	Violet	36			GL-282


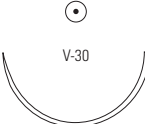


Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 22 mm 	3-0	2	75	Incolore	36		CL-896
	3-0	2	75	Violet	36		CL-892
	2-0	3	75	Violet	36		CL-893
	0	3.5	75	Violet	36		CL-894
1/2 CERCLE 26 mm 	5-0	1	75	Violet	36		GL-120
	4-0	1.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	GL-64-MG
	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	GLS-321
	4-0	1.5	75	Incolore	36		GL-321
	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™	GLS-121
	4-0	1.5	75	Violet	36		GL-121
	4-0	1.5	5x75	Violet	12	D-Tach™	GL-68-M
	3-0	2	5x45	Incolore	12	D-Tach™	GL-69-MG
	3-0	2	5x45	Violet	12	D-Tach™	GL-63-MG
	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™	GLS-322
	3-0	2	75	Incolore	36		GL-322
	3-0	2	75	Violet	36	Surgalloy™	GLS-122
	3-0	2	75	Violet	36		GL-122
	3-0	2	5x75	Violet	12	D-Tach™	GL-67-M
	3-0	2	90	Violet	36		GL-226
	2-0	3	5x45	Incolore	12	D-Tach™	GL-61-MG
	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™	GL-62-MG
	2-0	3	75	Incolore	36	Surgalloy™	GLS-323
	2-0	3	75	Incolore	36		GL-323
	2-0	3	75	Violet	36	Surgalloy™	GLS-123
	2-0	3	75	Violet	36		GL-123
	2-0	3	5x75	Violet	12	D-Tach™	GL-66-M
	2-0	3	90	Violet	36		GL-125
	0	3.5	75	Incolore	36		GL-324
	0	3.5	75	Violet	36		GL-124
	1	4	75	Violet	36		GL-130



Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm DROITE 44 mm 	3-0	2	90	Incolore	36		GL-423
	3-0	2	90	Violet	36		GL-332
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	90	Violet	36		GL-333
	3-0	2	75	Incolore	36		CL-829
1/2 CERCLE 27 mm 	3-0	2	75	Violet	36		CL-882
	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-16-MG
	2-0	3	75	Incolore	36	Surgalloy™	CLS-830
	2-0	3	75	Incolore	36		CL-830
	2-0	3	75	Violet	36	Surgalloy™	CLS-883
	2-0	3	75	Violet	36		CL-883
	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-17-MG
	0	3.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	CLS-831
	0	3.5	75	Incolore	36		CL-831
	0	3.5	75	Violet	36	Surgalloy™	CLS-884
	0	3.5	75	Violet	36		CL-884
	0	3.5	5x75	Violet	12	D-Tach™	CL-886-M
	0	3.5	90	Violet	36		CL-330
	1	4	75	Incolore	36		CL-832
	1	4	75	Violet	36		CL-885
	1	4	5x75	Violet	12	D-Tach™	CL-885-M
1	4	90	Violet	36		CL-331	
2	5	75	Violet	36		CL-232	

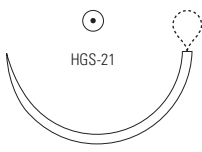

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 27 mm H 	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™		CL-86-MG
	0	3.5	5x45	Incolore	12	D-Tach™		CL-87-MG
	0	3.5	5x75	Violet	12	D-Tach™		CL-801-MG
	1	4	75	Violet	36			CL-871
1/2 CERCLE 30 mm 	3-0	2	75	Violet	36			GL-222
	2-0	3	75	Incolore	36			GL-228
	2-0	3	75	Violet	36			GL-223
	2-0	3	5x75	Violet	12	D-Tach™		GL-223-M
	0	3.5	75	Violet	36			GL-224
	1	4	75	Violet	36			GL-225
	1	4	90	Violet	36			VL-229
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	75	Violet	36			GL-126
	2-0	3	75	Violet	36			GL-127
	0	3.5	75	Violet	36			GL-128
	1	4	75	Violet	36			GL-129
1/2 CERCLE 37 mm 	4-0	1.5	75	Violet	36			CL-809
	3-0	2	5x45	Incolore	12	D-Tach™		CL-12-MG
	3-0	2	5x45	Violet	12	D-Tach™		CL-8-MG
	3-0	2	75	Incolore	36			CL-842
	3-0	2	75	Violet	36			CL-810
	3-0	2	90	Incolore	36			CL-952
	3-0	2	90	Violet	36			CL-922
	2-0	3	5x45	Incolore	12	D-Tach™		CL-13-MG
	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™		CL-9-MG
	2-0	3	75	Incolore	36	Surgalloy™		CLS-843
	2-0	3	75	Incolore	36			CL-843
	2-0	3	75	Violet	36			CL-811
	2-0	3	5x75	Violet	12	D-Tach™		CL-4-M
	2-0	3	90	Incolore	36			CL-953
	2-0	3	90	Violet	36			CL-923
	0	3.5	5x45	Incolore	12	D-Tach™		CL-14-MG
	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™		CL-10-MG

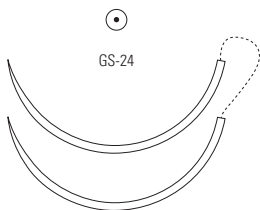

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 37 mm 	0	3.5	75	Incolore	36		CL-844	
	0	3.5	75	Violet	36	Surgalloy™	CLS-812	
	0	3.5	75	Violet	36		CL-812	
	0	3.5	5x75	Violet	12	D-Tach™	CL-5-M	
	0	3.5	90	Incolore	36	Surgalloy™	CLS-954	
	0	3.5	90	Incolore	36		CL-954	
	0	3.5	90	Violet	36		CL-924	
	1	4	5x45	Incolore	12	D-Tach™	CL-15-MG	
	1	4	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-11-MG	
	1	4	75	Incolore	36		CL-845	
	1	4	75	Violet	36		CL-813	
	1	4	5x75	Violet	12	D-Tach™	CL-6-M	
	1	4	90	Incolore	36	Surgalloy™	CLS-955	
	1	4	90	Incolore	36		CL-955	
	1	4	90	Violet	36		CL-925	
	2	5	75	Violet	36		CL-814	
	2	5	90	Violet	36		CL-926	
	1/2 CERCLE 37 mm H 	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-202-M
2-0		3	75	Violet	36		CL-930	
2-0		3	90	Violet	36		CL-970	
0		3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-200-M	
0		3.5	75	Incolore	36		CL-938	
0		3.5	75	Violet	36		CL-931	
0		3.5	5x75	Violet	12	D-Tach™	CL-71-M	
0		3.5	90	Violet	36		CL-971	
1		4	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-201-M	
1		4	75	Incolore	36		CL-828	
1		4	75	Violet	36		CL-932	
1		4	90	Violet	36		CL-239	
2		5	75	Incolore	36		CL-827	
2		5	75	Violet	36		CL-934	




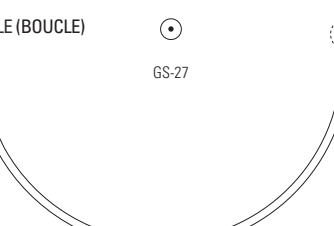
Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm 	0	3.5	150	Violet	24	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CL-871-L
1/2 CERCLE 40 mm 	3-0	2	75	Violet	36		CL-800
	3-0	2	90	Incolore	36		CL-962
	3-0	2	90	Violet	36		CL-912
	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-22-MG
	2-0	3	75	Incolore	36		CL-853
	2-0	3	75	Violet	36		CL-801
	2-0	3	90	Incolore	36		CL-963
	2-0	3	90	Violet	36		CL-913
	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-20-MG
	0	3.5	75	Incolore	36		CL-854
	0	3.5	75	Violet	36		CL-802
	0	3.5	90	Incolore	36		CL-964
	0	3.5	90	Violet	36		CL-914
	1	4	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-21-MG
	1	4	75	Incolore	36		CL-855
	1	4	75	Violet	36		CL-803
	1	4	90	Incolore	36		CL-965
	1	4	90	Violet	36		CL-915
	2	5	5x45	Violet	6	D-Tach™	CL-623-M
	2	5	5x60	Violet	12	D-Tach™	CL-622-M
2	5	75	Violet	36		CL-779	
2	5	90	Violet	36		CL-911	

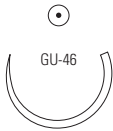
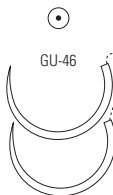

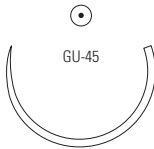
Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 40 mm 	3-0	2	150	Violet	36		CL-990
	3-0	2	75	Violet	36		CL-862
1/2 CERCLE 48 mm 	3-0	2	90	Incolore	36		CL-972
	2-0	3	5x45	Incolore	12	D-Tach™	CL-36-MG
	2-0	3	75	Violet	36		CL-863
	2-0	3	90	Incolore	36		CL-973
	2-0	3	90	Violet	36		CL-903
	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-30-MG
	0	3.5	75	Incolore	36		CL-888
	0	3.5	75	Violet	36		CL-864
	0	3.5	90	Incolore	36		CL-974
	0	3.5	90	Violet	36		CL-904
	1	4	5x45	Violet	12	D-Tach™	CL-31-MG
	1	4	75	Violet	36		CL-865
	1	4	5x75	Violet	12	D-Tach™	CL-64-M
	1	4	90	Incolore	36		CL-975
	1	4	90	Violet	36		CL-905
	2	5	5x45	Violet	6	D-Tach™	CL-633-M
	2	5	5x60	Violet	12	D-Tach™	CL-644-M
	2	5	75	Violet	36		CL-866
2	5	5x75	Violet	6	D-Tach™	CL-665-M	
2	5	90	Violet	36		CL-906	

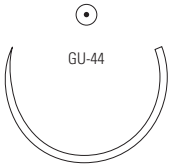
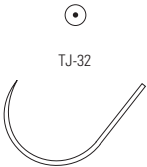
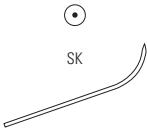
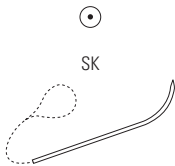
Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 65 mm 	2-0	3	75	Incolore	24		CL-63	
	1	4	2x75	Incolore	12		CL-651-M	
	1	4	5x75	Violet	12		CL-60-M	
	1	4	90	Violet	36		CL-968	
	1	4	150	Violet	24		CL-824	
	2	5	5x75	Violet	6		CL-659-M	
	2	5	100	Incolore	36		CL-969	
	2	5	150	Incolore	24		CL-880	
	2	5	150	Violet	24		CL-825	
1/2 CERCLE (BOUCLE) 65 mm 	1	4	120	Violet	24	Suture de 120 cm, bouclée à 60 cm	CL-824-L	
	2	5	240	Violet	24	Suture de 240 cm, bouclée à 120 cm	CL-835-L	
1/2 CERCLE 76 mm 	2-0	3	75	Incolore	24		CL-53	
	1	4	75	Violet	24		SL-603	
1/2 CERCLE (BOUCLE) 76 mm 	1	4	150	Violet	24	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CL-734-L	
	2	5	150	Violet	24	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CL-735-L	

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1


Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
5/8 CERCLE 27 mm 	3-0	2	75	Violet	36		UL-879	
	2-0	3	75	Violet	36		UL-878	
	0	3.5	75	Violet	36		UL-877	
	1	4	75	Violet	36		UL-876	
5/8 CERCLE 27 mm 	0	3.5	90	Violet	36		UL-240	
5/8 CERCLE 27 mm H 	0	3.5	45	Violet	36		CL-576	
	0	3.5	75	Violet	36		CL-677	
	1	4	45	Incolore	36		UL-670	
	1	4	75	Violet	36		UL-676	
5/8 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Violet	36		UL-245	
	0	3.5	75	Violet	36		UL-246	

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1



Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
5/8 CERCLE 40 mm 	0	3.5	75	Violet	36		UL-146
AIGUILLE "J" 32 mm 	1	4	75	Violet	36		CL-673
	1	4	75	Violet	12		CL-673-G
SKI 23 mm 	4-0	1.5	18	Violet	36	Endoscopie	EL-416
	3-0	2	18	Violet	36	Endoscopie	EL-415
	3-0	2	120	Violet	24	Endoscopie	EL-450
SKI avec boucle pré-nouée 23 mm 	4-0	1.5	20	Violet	36	20 cm, bouclée à 10 cm	EL-51-L

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1





Pointe ronde pour microchirurgie

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 6 mm Courbure 140° Long. Corde 4.92 mm Rayon 2.62 mm 	8-0	0.4	13	Violet	12	Surgalloy™	L-2800

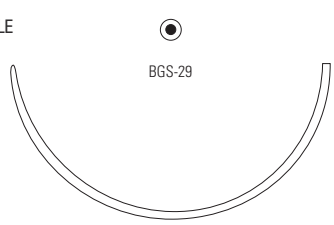
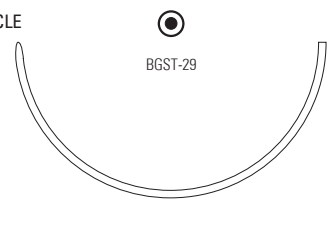
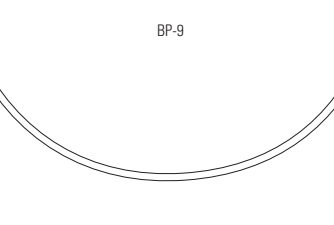
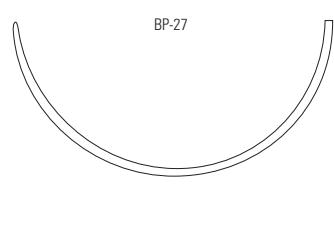
Pointe ronde mousse

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm 	3-0	2	5x45	Incolore	12	Protect Point™ D-Tach™	GLT-69-MG
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	90	Incolore	36	Protect Point™	CLT-952
	2-0	3	5x45	Incolore	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT-13-MG
	2-0	3	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT-9-MG
	2-0	3	75	Incolore	36	Protect Point™	CLT-259
	2-0	3	90	Incolore	36	Protect Point™	CLT-953
	0	3.5	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT-250-MG
	0	3.5	75	Incolore	36	Protect Point™	CLT-260
	0	3.5	75	Violet	36	Protect Point™	CLT-957
	0	3.5	90	Incolore	36	Protect Point™	CLT-954
	1	4	5x45	Incolore	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT-15-MG
	1	4	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT-11-MG
	1	4	75	Violet	36	Protect Point™	CLT-958
	1	4	5x75	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT-31-MG
1	4	90	Incolore	36	Protect Point™	CLT-955	





Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe ronde mousse								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	90	Incolore	36	Protect Point™		CL-259
	2-0	3	90	Violet	36	Protect Point™		CL-956
	0	3.5	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™		CL-250-M
	0	3.5	90	Incolore	36	Protect Point™		CL-260
	0	3.5	90	Violet	36	Protect Point™		CL-957
	1	4	90	Violet	36	Protect Point™		CL-958
1/2 CERCLE 40 mm 	0	3.5	90	Violet	36	Protect Point™		CL-950
	1	4	90	Violet	36	Protect Point™		CL-951
1/2 CERCLE 48 mm 	0	3.5	5x45	Incolore	12	Protect Point™ D-Tach™		CLT-20-MG
	0	3.5	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™		CLT-850-MG
	0	3.5	90	Incolore	36	Protect Point™		CLT-854
	1	4	5x45	Incolore	12	Protect Point™ D-Tach™		CLT-21-MG
	1	4	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™		CLT-851-MG
	1	4	90	Incolore	36	Protect Point™		CLT-855
	2	5	5x45	Violet	6	Protect Point™ D-Tach™		CLT-623-M
1/2 CERCLE 48 mm 	0	3.5	90	Violet	36	Protect Point™		CL-948
	1	4	90	Violet	36	Protect Point™		CL-949

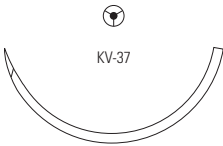
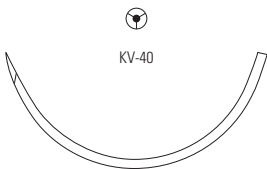
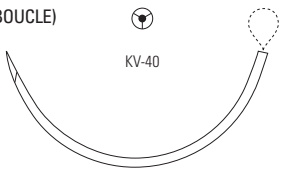
Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1


Pointe ronde mousse								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 65 mm  BGS-29	2	5	5x60	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™	CL-852-M	
	2	5	2x90	Violet	24	Protect Point™	2-CL-852	
1/2 CERCLE 65 mm  BGST-29	2	5	5x75	Violet	6	Protect Point™ D-Tach™	CLT-633M	
3/8 CERCLE 64 mm  BP-9	0	3.5	90	Incolore	36		CL-272	
	1	4	90	Incolore	36		CL-273	
1/2 CERCLE 64 mm  BP-27	1	4	90	Violet	36		CL-271	
	2	5	90	Violet	36		CL-270	

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe tapercutting							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 22 mm 	1	4	75	Incolore	36		CL-513
1/2 CERCLE 26 mm 	3-0	2	75	Violet	36	Surgalloy™	CL-510
	2-0	3	75	Violet	36	Surgalloy™	CL-511
1/2 CERCLE 27 mm 	0	3.5	90	Incolore	36		CL-730
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	90	Incolore	36		CL-947
	3-0	2	90	Violet	36		CL-942
	2-0	3	75	Violet	36		CL-837
	2-0	3	90	Incolore	36		CL-946
	2-0	3	90	Violet	36		CL-943
	0	3.5	75	Violet	36		CL-838
	0	3.5	90	Incolore	36		CL-515
	0	3.5	90	Violet	36		CL-944
	1	4	75	Violet	36		CL-839
	1	4	90	Incolore	36		CL-516
	1	4	90	Violet	36		CL-945
	2	5	90	Violet	36		CL-517

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1


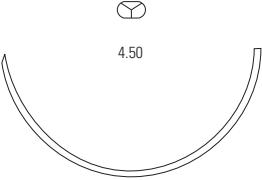
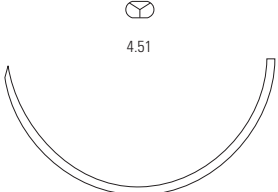
Pointe tapercutting							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 40 mm 	2-0	3	75	Violet	36		CL-603
	0	3.5	75	Violet	36		CL-602
1/2 CERCLE 48 mm 	0	3.5	90	Violet	36		CL-739
	1	4	75	Violet	36		CL-840
	1	4	90	Violet	36		CL-940
	2	5	75	Violet	36		CL-841
	2	5	90	Violet	36		CL-941
1/2 CERCLE (BOUCLE) 48 mm 	1	4	150	Violet	24	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CL-740-L
	2	5	150	Violet	24	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CL-741-L

Pointe multi usages							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 16 mm 	4-0	1.5	45	Incolore	36		CL-005

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe multi usages							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 20 mm 	2-0	3	75	Violet	36		CL-015
1/2 CERCLE 25 mm 	2-0	3	75	Violet	36		CL-021
1/2 CERCLE 30 mm 	2-0	3	75	Violet	36		CL-026
1/2 CERCLE 30 mm 	2-0	3	75	Violet	36		CL-029
	0	3.5	75	Violet	36		CL-030
1/2 CERCLE 40 mm 	2-0	3	75	Violet	36		CL-045
	0	3.5	75	Violet	36		UL-046
	1	4	75	Incolore	36		CL-150
	1	4	75	Violet	36		CL-047

Polysorb™ Tresse enduite synthétique résorbable de Lactomer™ 9-1

Pointe multi usages								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 45 mm 	1	4	75	Violet	36		CL-050	
1/2 CERCLE 50 mm 	2	5	90	Violet	36		CL-055	
1/2 CERCLE 50 mm 	2-0	3	75	Violet	36		CL-060	
	0	3.5	75	Violet	36		CL-061	
	1	4	75	Violet	36		CL-062	

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
2-CL-852	31	CL-273	31	CL-544	8
CL-005	33	CL-30-MG	25	CL-545	8
CL-015	34	CL-304	17	CL-546	8
CL-021	34	CL-31-MG	25	CL-547	8
CL-026	34	CL-330	21	CL-552	8
CL-029	34	CL-331	21	CL-555	10
CL-030	34	CL-36-MG	25	CL-56-MG	8
CL-045	34	CL-4-M	22	CL-568	10
CL-047	34	CL-457	17	CL-569	10
CL-050	35	CL-460	19	CL-57-MG	8
CL-055	35	CL-461	19	CL-570	10
CL-060	35	CL-462	19	CL-571	10
CL-061	35	CL-463-M	19	CL-576	27
CL-062	35	CL-464	19	CL-58-MG	8
CL-10-MG	22	CL-469	19	CL-581	8
CL-11-MG	23	CL-470	19	CL-595	9
CL-12-MG	22	CL-471	19	CL-596	9
CL-13-MG	22	CL-5-M	23	CL-597	9
CL-14-MG	22	CL-510	32	CL-6-M	23
CL-15-MG	23	CL-511	32	CL-60-M	26
CL-150	34	CL-513	32	CL-602	33
CL-16-MG	21	CL-515	32	CL-603	33
CL-17-MG	21	CL-516	32	CL-622-M	24
CL-20-MG	24	CL-517	32	CL-623-M	24
CL-200-M	23	CL-52-MG	7	CL-63	26
CL-201-M	23	CL-526	9	CL-633-M	25
CL-202-M	23	CL-527	9	CL-64-M	25
CL-21-MG	24	CL-528	9	CL-644-M	25
CL-219	18	CL-53	26	CL-651-M	26
CL-22-MG	24	CL-53-MG	7	CL-659-M	26
CL-220	18	CL-533	8	CL-665-M	25
CL-232	21	CL-534	8	CL-673	28
CL-239	23	CL-535	8	CL-673-G	28
CL-250-M	30	CL-536	9	CL-677	27
CL-259	30	CL-537	9	CL-70-MG	9
CL-260	30	CL-538	9	CL-71-M	23
CL-270	31	CL-54-MG	8	CL-730	32
CL-271	31	CL-542	8	CL-734-L	26
CL-272	31	CL-543	8	CL-735-L	26

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
CL-739	33	CL-829	21	CL-886-M	21
CL-740-L	33	CL-830	21	CL-888	25
CL-741-L	33	CL-831	21	CL-892	20
CL-75-MG	9	CL-832	21	CL-893	20
CL-76-MG	9	CL-833	9	CL-894	20
CL-768	7	CL-835-L	26	CL-896	20
CL-769	7	CL-837	32	CL-9-MG	22
CL-77-MG	9	CL-838	32	CL-900	6
CL-779	24	CL-839	32	CL-903	25
CL-782	17	CL-840	33	CL-904	25
CL-783	17	CL-841	33	CL-905	25
CL-8-MG	22	CL-842	22	CL-906	25
CL-80-MG	9	CL-843	22	CL-911	24
CL-800	24	CL-844	23	CL-912	24
CL-801	24	CL-845	23	CL-913	24
CL-801-MG	22	CL-85	7	CL-914	24
CL-802	24	CL-852-M	31	CL-915	24
CL-803	24	CL-853	24	CL-916	8
CL-804	9	CL-854	24	CL-917	8
CL-805	9	CL-855	24	CL-918	8
CL-809	22	CL-86-MG	22	CL-919	8
CL-81-MG	9	CL-862	25	CL-922	22
CL-810	22	CL-863	25	CL-923	22
CL-811	22	CL-864	25	CL-924	23
CL-812	23	CL-865	25	CL-925	23
CL-813	23	CL-866	25	CL-926	23
CL-814	23	CL-867	7	CL-927	10
CL-815	8	CL-868	7	CL-928	10
CL-816	8	CL-869	7	CL-929	10
CL-817	8	CL-87-MG	22	CL-930	23
CL-818	8	CL-870	7	CL-931	23
CL-819	8	CL-871	22	CL-932	23
CL-82-MG	9	CL-871-L	24	CL-933	9
CL-823	5	CL-880	26	CL-934	23
CL-824	26	CL-882	21	CL-936	9
CL-824-L	26	CL-883	21	CL-937	9
CL-825	26	CL-884	21	CL-938	23
CL-827	23	CL-885	21	CL-939	10
CL-828	23	CL-885-M	21	CL-940	33

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
CL-941	33	CLS-883	21	ELW-42	3
CL-942	32	CLS-884	21	ELW-43	3
CL-943	32	CLS-954	23	ELW-50	4
CL-944	32	CLS-955	23	ELW-51	4
CL-945	32	CLT-11-MG	29	ELW-52	4
CL-946	32	CLT-13-MG	29	ELW-53	4
CL-947	32	CLT-15-MG	29	GL-120	20
CL-948	30	CLT-20-MG	30	GL-121	20
CL-949	30	CLT-21-MG	30	GL-122	20
CL-950	30	CLT-250-MG	29	GL-123	20
CL-951	30	CLT-259	29	GL-124	20
CL-952	22	CLT-260	29	GL-125	20
CL-953	22	CLT-31-MG	29	GL-126	22
CL-954	23	CLT-623-M	30	GL-127	22
CL-955	23	CLT-633M	31	GL-128	22
CL-956	30	CLT-850-MG	30	GL-129	22
CL-957	30	CLT-851-MG	30	GL-130	20
CL-958	30	CLT-854	30	GL-181	19
CL-960	10	CLT-855	30	GL-182	19
CL-962	24	CLT-9-MG	29	GL-182-M	19
CL-963	24	CLT-952	29	GL-183	19
CL-964	24	CLT-953	29	GL-191	19
CL-965	24	CLT-954	29	GL-192	19
CL-968	26	CLT-955	29	GL-222	22
CL-969	26	CLT-957	29	GL-223	22
CL-970	23	CLT-958	29	GL-223-M	22
CL-971	23	EL-20-L	3	GL-224	22
CL-972	25	EL-21-L	3	GL-225	22
CL-973	25	EL-22-LN	3	GL-226	20
CL-974	25	EL-23-LN	3	GL-228	22
CL-975	25	EL-410	19	GL-282	19
CL-977	6	EL-415	28	GL-302	17
CL-979	10	EL-416	28	GL-303	17
CL-990	25	EL-430	18	GL-32-MG	19
CL-992	9	EL-440	19	GL-321	20
CLS-812	23	EL-450	28	GL-322	20
CLS-830	21	EL-51-L	28	GL-323	20
CLS-831	21	ELW-30	4	GL-324	20
CLS-843	22	ELW-31	4	GL-33-MG	19

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
GL-332	21	L-11	1	L-27	1
GL-333	21	L-111	2	L-2747-K	16
GL-34-MG	19	L-112	2	L-2748-K	16
GL-423	21	L-113	2	L-2749-K	16
GL-44-MG	17	L-114	2	L-2750-K	15
GL-45-MG	17	L-115	2	L-2751-K	15
GL-46-MG	18	L-116	2	L-2752-K	14
GL-47-MG	18	L-12	1	L-2753-K	14
GL-522	17	L-13	1	L-28	1
GL-523	17	L-14	1	L-2800	29
GL-524	17	L-15	1	L-3	1
GL-61-MG	20	L-1551-K	12	L-32	1
GL-62-MG	20	L-1590-K	14	L-33	1
GL-63-MG	20	L-1591-K	14	L-34	1
GL-64-MG	20	L-1669-K	14	L-35	1
GL-66-M	20	L-1670-K	14	L-36	1
GL-67-M	20	L-1739-K	14	L-38	1
GL-68-M	20	L-1740-K	14	L-39	1
GL-69-MG	20	L-1741-K	16	L-4	1
GL-881	16	L-1742-K	14	L-40	1
GL-882	16	L-1745-K	14	L-402	1
GL-884	17	L-1750-K	15	L-403	1
GL-885	17	L-1755-K	14	L-404	1
GL-889	16	L-1756-K	14	L-405	1
GL-890	16	L-1785-K	14	L-406	2
GLS-121	20	L-1787-K	16	L-41	1
GLS-122	20	L-1791-K	14	L-42	2
GLS-123	20	L-1792-K	14	L-43	1
GLS-321	20	L-1796-K	16	L-4323-K	13
GLS-322	20	L-1897-K	16	L-5	1
GLS-323	20	L-2	1	L-5118-K	16
GLT-69-MG	29	L-20	1	L-553-K	14
L-0213-K	15	L-22	1	L-71	1
L-0223-K	15	L-23	1	L-72	1
L-1	1	L-24	1	L-73	1
L-102	2	L-25	1	L-74	1
L-103	2	L-2553-K	14	L-75	1
L-104	2	L-2574-K	16	L-76	1
L-105	2	L-26	1	L-95	1

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
LL-101	2	SL-431	17	SL-605	5
LL-102	2	SL-432	17	SL-606	5
LL-103	2	SL-5620	11	SL-607	5
LL-104	2	SL-5621	11	SL-608	5
LL-111	2	SL-5626	11	SL-609	6
LL-112	2	SL-5626-G	11	SL-611	6
LL-113	2	SL-5627	11	SL-612	7
LL-114	2	SL-5627-G	11	SL-613	7
LL-115	2	SL-5628	11	SL-622	8
LL-116	2	SL-5628-G	11	SL-629	7
LL-221	2	SL-5629	11	SL-630	5
LL-222	2	SL-5632	12	SL-631	7
LL-223	2	SL-5632-G	12	SL-632	7
LL-224	2	SL-5633	12	SL-632-G	7
LL-225	2	SL-5633-G	12	SL-634	5
LL-226	2	SL-5636	11	SL-635	5
LL-233	2	SL-5637	11	SL-635-G	5
LL-322	2	SL-5638	11	SL-636	5
LL-323	2	SL-5639	11	SL-637	5
LL-324	2	SL-5640	12	SL-638	5
LL-423	2	SL-5640-G	12	SL-639	5
SL-1613	12	SL-5641	12	SL-642	10
SL-1614	12	SL-5641-G	12	SL-643	10
SL-1615	12	SL-5678	12	SL-644	10
SL-1625	11	SL-5679	12	SL-652	10
SL-1625-G	11	SL-5679-G	12	SL-652-G	10
SL-1644-G	12	SL-5680	12	SL-653	10
SL-1651	13	SL-5686	11	SL-654	10
SL-1653	13	SL-5686-G	11	SL-674	7
SL-1654	13	SL-5687	11	SL-675	7
SL-1656	13	SL-5687-G	11	SL-690	5
SL-1657	13	SL-5688	11	SL-691	5
SL-1658	13	SL-5688-G	11	SL-691-G	5
SL-1659	13	SL-5690	11	SL-692	5
SL-1660	13	SL-5691-G	11	SL-692-G	5
SL-1689	11	SL-586	6	SL-693	5
SL-1689-G	11	SL-587	6	SL-694	5
SL-171	5	SL-603	26	SL-695	5
SL-172	5	SL-604	5	SL-696	6


Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
SL-712	6				
SL-714	6				
SL-721	8				
SL-722	8				
SL-73-MG	6				
SL-820	7				
SL-822	5				
SL-822-G	5				
SL-823	5				
SL-83-MG	7				
UL-046	34				
UL-101	17				
UL-102	17				
UL-146	28				
UL-201	18				
UL-202	18				
UL-203	18				
UL-204	18				
UL-205	18				
UL-212	18				
UL-213	18				
UL-214	18				
UL-215	18				
UL-216	18				
UL-240	27				
UL-245	27				
UL-246	27				
UL-303	18				
UL-46-MG	18				
UL-47-MG	18				
UL-670	27				
UL-676	27				
UL-876	27				
UL-877	27				
UL-878	27				
UL-879	27				
VL-229	22				

Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211

Description:	Les sutures synthétiques résorbables Caprosyn™ sont des monofilaments composés de Polyester synthétique Polyglytone™ 6211 (Glycolide, Caprolactone, Carbonate de Triméthylène et Lactide).
Caractéristiques:	Le process avancé de fabrication de la molécule de Polyglytone™ 6211 apporte à la suture: <ul style="list-style-type: none">- Un rapprochement sécurisé des berges de la plaie pendant la phase critique de cicatrisation- Une prévisibilité des résultats en terme de résorption- Une excellente maniabilité- Une excellente sécurité du nœud
Indications:	Les sutures synthétiques résorbables Caprosyn™ sont généralement indiquées pour le rapprochement des tissus mous et/ou pour les ligatures. Elles sont contre indiquées en neurochirurgie, chirurgies cardio-vasculaire, ophtalmique et microchirurgie.
Actions:	Une suture synthétique résorbable Caprosyn™ produit une réaction inflammatoire aiguë minimale dans les tissus, suivie d'une encapsulation graduelle de la suture par le tissu fibreux connectif. La perte progressive de résistance et la résorption d'une suture Caprosyn™ se font par hydrolyse.
Résistance à la traction:	Des études d'implantation chez des animaux indiquent qu'une suture Caprosyn™ conserve un minimum de 50 à 60% de la résistance du nœud 5 jours après implantation, selon la Pharmacopée américaine et la Pharmacopée européenne, et un minimum de 20 à 30% de la résistance du nœud 10 jours après implantation, selon la Pharmacopée américaine et la Pharmacopée européenne. De plus, la résistance du nœud est globalement perdue, 21 jours après l'implantation.
Résorption:	La résorption commence par une perte de résistance à la traction, suivie d'une perte de masse. La résorption de la suture synthétique résorbable Caprosyn™ est globalement achevée en 56 jours.
Stérilisation:	Oxyde d'éthylène.
Présentation:	Les sutures synthétiques résorbables Caprosyn™ sont disponibles dans les formats de la Pharmacopée américaine 1 (décimale 4) à 6-0 (décimale 0,7). Elles sont disponibles non teintées (naturelles) ou teintées avec le colorant D&C Violet N°2. Les sutures sont livrées stériles, en longueurs pré coupées ou sur bobine à ligature, sans aiguille ou attachées à divers types d'aiguilles : en boîtes d'une, deux ou trois douzaines.

Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211

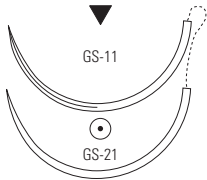

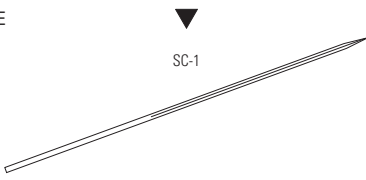
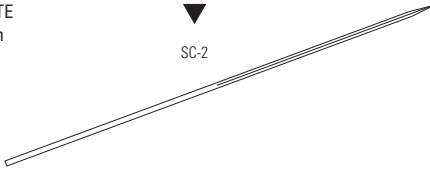
Ligatures								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
Brins	2-0	3	12x45	Incolore	24			C-13
	0	3.5	12x45	Incolore	24			C-14
	1	4	12x45	Incolore	24			C-15
Brin	3-0	2	150	Incolore	24			C-212
	2-0	3	150	Incolore	36			C-213
	0	3.5	150	Incolore	36			C-214
Bobine	3-0	2	150	Incolore	24			LC-112
	2-0	3	150	Incolore	24			LC-113
	0	3.5	150	Incolore	24			LC-114

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Incolore	36			SC-3634
	4-0	1.5	45	Incolore	12			SC-690-G
	4-0	1.5	45	Violet	36			GC-690
	4-0	1.5	75	Incolore	36			SC-691
	3-0	2	45	Incolore	12			SC-694-G
	3-0	2	75	Incolore	36			SC-692
	2-0	3	75	Incolore	36			SC-693

Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211




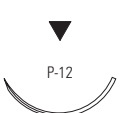
Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 24 mm 	3-0	2	75	Incolore	12		SC-693-G	
3/8 CERCLE 26 mm 	3-0	2	75	Incolore	36		SC-587	
	2-0	3	75	Incolore	36		SC-586	
3/8 CERCLE 30 mm 	0	3.5	75	Incolore	36		SC-585	
3/8 CERCLE 39 mm 	1	4	75	Incolore	36		SC-886	
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Incolore	36		CC-543	

Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211

Pointe triangulaire inversée							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	150	Incolore	36		CC-983
1/2 CERCLE 40 mm 	1	4	90	Incolore	36		CC-641
DROITE 51 mm 	3-0	2	75	Incolore	36		SC-543
	2-0	3	75	Incolore	36		SC-542
DROITE 60 mm 	4-0	1.5	75	Incolore	36		SC-644
	3-0	2	75	Incolore	36		SC-643



Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211

Pointe triangulaire inversée de précision



Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-3625-G
	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-3626-G
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5688-G
	6-0	0.7	45	Violet	12	Surgalloy™	SC-5588-G
	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5689-G
	5-0	1	45	Violet	12	Surgalloy™	SC-5587-G
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5690-G
	4-0	1.5	45	Violet	12	Surgalloy™	SC-5590-G
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5635-G
	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SC-5626
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5686-G
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5616-G
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5617-G
	4-0	1.5	45	Violet	12	Surgalloy™	SC-5627-G
	4-0	1.5	75	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5637-G
	3-0	2	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5618-G
	3-0	2	75	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5638-G
	2-0	3	75	Incolore	12	Surgalloy™	SC-3639-G

Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211



Pointe triangulaire inversée de précision



Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SC-5679
	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	SC-5779
	3-0	2	45	Incolore	36	Surgalloy™	SC-5640
	3-0	2	75	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5780-G
1/2 CERCLE 16 mm 	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5642-G
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SC-5643-G

Pointe triangulaire inversée



Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 7 mm  Courbure 158° Long. Corde 5.76 mm Rayon 3.18 mm	6-0	0.7	30	Incolore	12	Surgalloy™	C-3794GK
3/8 CERCLE 11 mm  Courbure 130° Long. Corde 9.66 mm Rayon 5.33 mm	6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™	C-1780GK



Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm  Courbure 130° Long. Corde 9.66 mm Rayon 5.33 mm	6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™		C-1790GK
3/8 CERCLE 13 mm  Courbure 130° Long. Corde 10.37 mm Rayon 5.72 mm	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™		C-1792GK
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™		C-1793GK


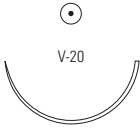
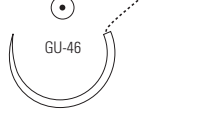

Pointe triangulaire de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm  DX-11	5-0	1	45	Incolore	12	Dermax™		XC-490
3/8 CERCLE 13 mm  DX-13	5-0	1	45	Incolore	12	Dermax™		XC-834
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Dermax™		XC-835

Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211

Pointe triangulaire de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 16 mm 	5-0	1	45	Incolore	12	Dermax™	XC-844	
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Dermax™	XC-845	
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Incolore	12	Dermax™	XC-822	
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Dermax™	XC-823	
	3-0	2	45	Incolore	12	Dermax™	XC-497	

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 17 mm 	6-0	0.7	75	Incolore	36	Surgalloy™	UC-201	
	5-0	1	75	Incolore	36	Surgalloy™	UC-202	
	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	UC-203	
	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™	UC-214	
	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™	UC-204	
	3-0	2	75	Violet	36	Surgalloy™	UC-213	
1/2 CERCLE 22 mm 	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	UC-403	
	3-0	2	5x45	Incolore	12	D-Tach™	GC-33-M	
	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™	UC-404	




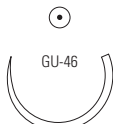
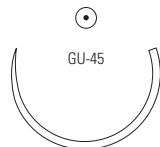
Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 22 mm 	2-0	3	75	Incolore	36		UC-863	
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	GC-121	
	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™	GC-321	
	3-0	2	5x45	Incolore	12	D-Tach™	GC-69-M	
	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™	GC-122	
	3-0	2	75	Violet	36	Surgalloy™	GC-322	
	2-0	3	75	Incolore	36	Surgalloy™	GC-123	
	2-0	3	75	Violet	36	Surgalloy™	GC-323	
	0	3.5	75	Incolore	36		GC-124	
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	75	Incolore	36		CC-558	
	2-0	3	75	Violet	36		CC-658	
5/8 CERCLE 27 mm 								
1/2 CERCLE 27 mm 	2-0	3	75	Incolore	36		CC-883	
	2-0	3	75	Violet	36		CC-830	
	0	3.5	75	Incolore	36		CC-884	
	0	3.5	75	Violet	36		CC-831	
	1	4	75	Incolore	36		CC-885	



Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 30 mm 	1	4	75	Incolore	36		GC-225
1/2 CERCLE 34 mm H 	0	3.5	5x45	Incolore	12	D-Tach™	CC-100-M
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Incolore	36		GC-127
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	75	Incolore	36		CC-810
	3-0	2	90	Incolore	36		CC-922
	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™	CC-9-MG
	2-0	3	75	Incolore	36		CC-811
	2-0	3	75	Violet	36		CC-843
	2-0	3	90	Incolore	36		CC-923
	2-0	3	90	Violet	36		CC-953
	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	CC-8-MG
	0	3.5	75	Incolore	36		CC-812
	0	3.5	75	Violet	36		CC-844
	0	3.5	90	Incolore	36		CC-924
	0	3.5	90	Violet	36		CC-824
	1	4	75	Incolore	36		CC-813
	1	4	75	Violet	36		CC-845
1	4	90	Incolore	36		CC-925	

Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm H 	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™		CC-113-MG
	0	3.5	75	Incolore	36			CC-942
	1	4	5x75	Incolore	12	D-Tach™		CC-38-M
1/2 CERCLE 40 mm 	3-0	2	90	Incolore	36			CC-912
	2-0	3	75	Incolore	36			CC-801
	2-0	3	90	Incolore	36			CC-915
	0	3.5	75	Incolore	36			CC-802
	0	3.5	90	Incolore	36			CC-913
	0	3.5	90	Violet	36			CC-964
	1	4	75	Incolore	36			CC-803
	1	4	90	Incolore	36			CC-914
	1	4	90	Violet	36			CC-963
1/2 CERCLE 48 mm 	2-0	3	75	Incolore	36			CC-872
	0	3.5	90	Incolore	36			CC-904
	0	3.5	90	Violet	36			CC-974
	1	4	90	Incolore	36			CC-905
	1	4	90	Violet	36			CC-975
5/8 CERCLE 27 mm 	3-0	2	75	Violet	36			UC-879
	2-0	3	75	Incolore	36			UC-978
5/8 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Incolore	36			UC-245
	0	3.5	75	Incolore	36			UC-246

Caprosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglytone™ 6211

Pointe tapercutting								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 17 mm 	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™		CC-1744
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	90	Incolore	12			CC-1945-G
	1	4	90	Incolore	36			CC-196




Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
C-13	1	CC-9-MG	9	SC-5587-G	4
C-14	1	CC-904	10	SC-5588-G	4
C-15	1	CC-905	10	SC-5590-G	4
C-1780GK	5	CC-912	10	SC-5616-G	4
C-1790GK	6	CC-913	10	SC-5617-G	4
C-1792GK	6	CC-914	10	SC-5618-G	4
C-1793GK	6	CC-915	10	SC-5626	4
C-212	1	CC-922	9	SC-5627-G	4
C-213	1	CC-923	9	SC-5635-G	4
C-214	1	CC-924	9	SC-5637-G	4
C-3794GK	5	CC-925	9	SC-5638-G	4
CC-100-M	9	CC-942	10	SC-5640	5
CC-113-MG	10	CC-953	9	SC-5642-G	5
CC-1744	11	CC-963	10	SC-5643-G	5
CC-1945-G	11	CC-964	10	SC-5679	5
CC-196	11	CC-974	10	SC-5686-G	4
CC-38-M	10	CC-975	10	SC-5688-G	4
CC-543	2	CC-983	3	SC-5689-G	4
CC-558	8	GC-121	8	SC-5690-G	4
CC-641	3	GC-122	8	SC-5779	5
CC-658	8	GC-123	8	SC-5780-G	5
CC-8-MG	9	GC-124	8	SC-585	2
CC-801	10	GC-127	9	SC-586	2
CC-802	10	GC-225	9	SC-587	2
CC-803	10	GC-321	8	SC-643	3
CC-810	9	GC-322	8	SC-644	3
CC-811	9	GC-323	8	SC-690-G	1
CC-812	9	GC-33-M	7	SC-691	1
CC-813	9	GC-69-M	8	SC-692	1
CC-824	9	GC-690	1	SC-693	1
CC-830	8	LC-112	1	SC-693-G	2
CC-831	8	LC-113	1	SC-694-G	1
CC-843	9	LC-114	1	SC-886	2
CC-844	9	SC-3625-G	4	UC-201	7
CC-845	9	SC-3626-G	4	UC-202	7
CC-872	10	SC-3634	1	UC-203	7
CC-883	8	SC-3639-G	4	UC-204	7
CC-884	8	SC-542	3	UC-213	7
CC-885	8	SC-543	3	UC-214	7

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
UC-245	10				
UC-246	10				
UC-403	7				
UC-404	7				
UC-863	8				
UC-879	10				
UC-978	10				
XC-490	6				
XC-497	7				
XC-822	7				
XC-823	7				
XC-834	6				
XC-835	6				
XC-844	7				
XC-845	7				


Biosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Glycomer™ 631

Description:	Les sutures synthétiques résorbables Biosyn™ sont des monofilaments composés de Polyester synthétique Glycomer™ 631 (60% de Glycolide, 14% de Dioxanone et 26% de Carbonate de Triméthylène).
Caractéristiques:	Le process avancé de fabrication de la molécule de Glycomer™ 631 apporte à la suture: <ul style="list-style-type: none">- Une résistance supérieure en per opératoire- Une résistance supérieure pendant et au-delà de la phase critique de cicatrisation- Une excellente sécurité du nœud- Une mémoire minimisée et une très grande souplesse
Indications:	Les sutures synthétiques résorbables Biosyn™ peuvent être utilisées en chirurgie générale pour le rapprochement des tissus mous et/ou pour les ligatures, y compris en chirurgie ophtalmique. Elles sont contre indiquées en chirurgie cardio-vasculaire et neurochirurgie.
Actions:	Une suture synthétique résorbable Biosyn™ produit une réaction inflammatoire aiguë minimale dans les tissus, suivie d'une encapsulation graduelle de la suture par les tissus fibreux connectifs. La perte progressive de résistance et la résorption d'une suture Biosyn™ résultent d'un phénomène d'hydrolyse, ce qui entraîne une désintégration de la suture en acide glycolique, en acide dioxanoïque, en propane diol et en dioxyde de carbone qui sont ensuite absorbés et métabolisés par l'organisme.
Résistance à la traction:	Des études d'implantation chez les animaux ont démontré que les sutures Biosyn™ conservent environ 75% de leur résistance deux semaines après l'implantation, et environ 40% trois semaines après l'implantation.
Résorption:	La résorption des sutures synthétiques résorbables Biosyn™ commence par une perte de résistance à la traction, sans perte significative de masse. La résorption totale intervient entre 90 et 110 jours.
Stérilisation:	Oxyde d'éthylène.
Présentation:	Les sutures synthétiques résorbables Biosyn™ sont disponibles en format USP et EP: de la décimale 6-0 (métrique 0,7) à 1 (métrique 4). Les sutures sont livrées stériles. Elles sont disponibles en incolore et violet. Les sutures sont disponibles en aiguillées, brins pré-découpés non-aiguillés, en emballage d'une, deux ou trois douzaines."

Ligatures								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
Brins	4-0	1.5	6x45	Violet	24		M-31	
	3-0	2	3x45	Violet	36		M-72	
	3-0	2	6x45	Violet	24		M-32	
	2-0	3	6x45	Incolore	24		M-23	
	2-0	3	6x45	Violet	24		M-33	
	0	3.5	3x45	Violet	36		M-74	
	1	4	3x45	Violet	36		M-75	

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	75	Incolore	36		SM-690	
	4-0	1.5	75	Incolore	36		SM-691	
	4-0	1.5	75	Incolore	12		SM-691-G	
	4-0	1.5	75	Violet	36		SM-791	
	3-0	2	75	Incolore	36		SM-822	
	3-0	2	75	Incolore	12		SM-822-G	
3/8 CERCLE 24 mm 	3-0	2	75	Incolore	36		SM-693	
	3-0	2	75	Incolore	12		SM-693-G	
	2-0	3	75	Incolore	36		SM-823	
	2-0	3	75	Incolore	12		SM-823-G	
1/2 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	75	Violet	36		SM-633	
	3-0	2	5x45	Violet	12	D-Tach™	SM-83-M	
	3-0	2	75	Violet	36		SM-632	


Pointe triangulaire inversée




Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	75	Violet	36		CM-879
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Incolore	36		CM-543
	2-0	3	75	Violet	36		CM-816
	0	3.5	75	Incolore	36		CM-544
	0	3.5	75	Violet	36		CM-817
1/2 CERCLE 37 mm H 	1	4	75	Violet	36		CM-528
1/2 CERCLE 48 mm 	1	4	90	Violet	36		CM-222
DROITE 60 mm 	4-0	1.5	75	Incolore	36		SM-644
	3-0	2	75	Incolore	36		SM-643



Pointe triangulaire inversée de précision


Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™	SM-3625
	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SM-3626
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™	SM-5688
	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SM-5687
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SM-5690
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SM-5624
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SM-5627
	4-0	1.5	75	Incolore	12	Surgalloy™	SM-5637
	3-0	2	45	Incolore	12	Surgalloy™	SM-5628
	3-0	2	75	Incolore	12	Surgalloy™	SM-5638
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	45	Incolore	24	Surgalloy™	SM-5679
	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	SM-5678
	3-0	2	75	Incolore	12	Surgalloy™	SM-5679-G

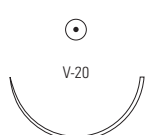
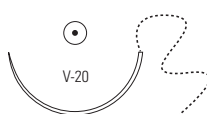
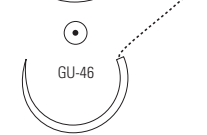
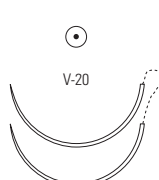
Pointe triangulaire de précision


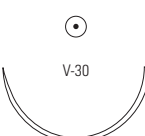
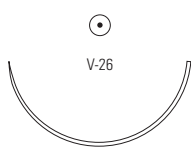

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	5-0	1	45	Incolore	24		CM-401
	4-0	1.5	45	Incolore	24		CM-400

Pointe triangulaire de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 13 mm 	5-0	1	45	Incolore	12	Dermax™		XM-834
3/8 CERCLE 16 mm 	4-0	1.5	45	Incolore	12	Dermax™		XM-845
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Incolore	12	Dermax™		XM-822
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Dermax™		XM-823

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 13 mm 	5-0	1	75	Violet	36	Surgalloy™		CM-126
1/2 CERCLE 12 mm 	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™		SM-432
	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™		SM-431

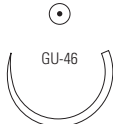
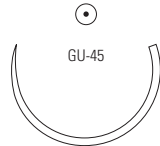
Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	75	Incolore	36	Surgalloy™	UM-886	
	6-0	0.7	75	Violet	36	Surgalloy™	UM-986	
	5-0	1	75	Violet	36	Surgalloy™	GM-875	
1/2 CERCLE 17 mm 	6-0	0.7	75	Violet	36	Surgalloy™	UM-201	
	5-0	1	75	Incolore	36	Surgalloy™	UM-213	
	5-0	1	75	Violet	36	Surgalloy™	UM-202	
	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	UM-214	
	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™	UM-203	
	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™	UM-215	
	3-0	2	75	Violet	36	Surgalloy™	UM-204	
1/2 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™	UM-403	
	3-0	2	75	Violet	36	Surgalloy™	CM-208	
1/2 CERCLE 22 mm 	4-0	1.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	GM-34-M	
	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™	GM-181	
	4-0	1.5	5x75	Violet	12	D-Tach™	GM-181-M	
	3-0	2	75	Violet	36	Surgalloy™	GM-324	
	2-0	3	75	Violet	36	Surgalloy™	GM-183	
1/2 CERCLE 22 mm 	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™	GM-281	
	4-0	1.5	90	Violet	36	Surgalloy™	GM-291	
	3-0	2	90	Violet	36	Surgalloy™	GM-282	

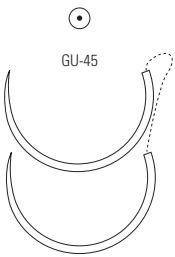
Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	5x45	Violet	12	D-Tach™		GM-64-M
	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™		GM-321
	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy Optimis™		GM-111
	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™		GM-121
	3-0	2	5x45	Incolore	12	D-Tach™		GM-69-M
	3-0	2	5x45	Violet	12	D-Tach™		GM-63-M
	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™		GM-322
	3-0	2	75	Violet	36	Surgalloy™		GM-122
	3-0	2	5x75	Violet	12	D-Tach™		GM-67-M
	2-0	3	75	Incolore	36			GM-323
	2-0	3	75	Violet	36			GM-123
	2-0	3	90	Violet	36			GM-125
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	75	Violet	36			CM-558
5/8 CERCLE 27 mm 								
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	75	Violet	36	Surgalloy™		GM-421
	4-0	1.5	90	Violet	36	Surgalloy™		GM-432
	3-0	2	90	Violet	36	Surgalloy™		GM-332



Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 27 mm 	3-0	2	75	Violet	36		CM-882	
	2-0	3	75	Incolore	36		CM-830	
	2-0	3	75	Violet	36		CM-883	
	0	3.5	75	Incolore	36		CM-831	
	0	3.5	75	Violet	36		CM-884	
	1	4	75	Violet	36		CM-832	
1/2 CERCLE 30 mm 	3-0	2	75	Violet	36		GM-222	
	2-0	3	75	Violet	36		GM-223	
	2-0	3	90	Violet	36		GM-326	
	0	3.5	90	Violet	36		GM-327	
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	75	Incolore	36		GM-226	
	2-0	3	75	Incolore	36		GM-227	
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	75	Incolore	36		CM-842	
	3-0	2	75	Violet	36		CM-810	
	3-0	2	90	Incolore	36		CM-952	
	3-0	2	90	Violet	36		CM-922	
	2-0	3	5x45	Violet	12	D-Tach™	CM-9-M	
	2-0	3	75	Incolore	36		CM-843	
	2-0	3	75	Violet	36		CM-811	
	2-0	3	90	Incolore	36		CM-953	
	2-0	3	90	Violet	36		CM-923	
	0	3.5	5x45	Incolore	12	D-Tach™	CM-14-M	
	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	CM-10-M	
	0	3.5	75	Incolore	36		CM-844	
	0	3.5	75	Violet	36		CM-812	
	0	3.5	90	Incolore	36		CM-954	
	0	3.5	90	Violet	36		CM-924	
	1	4	5x45	Violet	12	D-Tach™	CM-11-M	
1	4	75	Incolore	36		CM-845		
1	4	75	Violet	36		CM-813		

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm 	1	4	90	Violet	36		CM-925
1/2 CERCLE 40 mm 	2-0	3	75	Violet	36		CM-801
	0	3.5	90	Incolore	36		CM-964
	0	3.5	90	Violet	36		CM-914
	1	4	90	Violet	36		CM-966
1/2 CERCLE (BOUCLE) 40 mm 	0	3.5	150	Violet	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CM-765-L
	1	4	150	Violet	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CM-767-L
1/2 CERCLE 48 mm 	0	3.5	5x45	Violet	12	D-Tach™	CM-30-M
	0	3.5	90	Incolore	36		CM-974
	0	3.5	90	Violet	36		CM-904
	1	4	5x45	Violet	12	D-Tach™	CM-31-M
	1	4	90	Incolore	36		CM-975
	1	4	90	Violet	36		CM-905




Biosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Glycomer™ 631

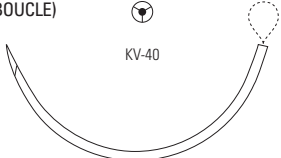
Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE (BOUCLE) 48 mm 	0	3.5	150	Violet	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		CM-790-L
	1	4	150	Violet	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		CM-776-L
1/2 CERCLE (BOUCLE) 65 mm 	0	3.5	150	Violet	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		CM-779-L
	1	4	240	Violet	12	Suture de 240 cm, bouclée à 120 cm		CM-780-L
5/8 CERCLE 27 mm 	3-0	2	75	Incolore	36			UM-979
	3-0	2	75	Violet	36			UM-879
	2-0	3	75	Incolore	36			UM-978
	2-0	3	75	Violet	36			UM-878
	0	3.5	75	Incolore	36			UM-977
	0	3.5	75	Violet	36			UM-877
5/8 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Incolore	36			UM-345
	2-0	3	75	Violet	36			UM-245

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
5/8 CERCLE 37 mm 	3-0	2	75	Violet	36		UM-243

Pointe ronde mousse							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm 	3-0	2	75	Incolore	36	Protect Point™	GMT-226
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	90	Incolore	36	Protect Point™	CMT-952
	2-0	3	75	Violet	36	Protect Point™	CMT-811
	0	3.5	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™	CMT-740-M
	0	3.5	75	Violet	36	Protect Point™	CMT-812
	0	3.5	90	Incolore	36	Protect Point™	CMT-967
	1	4	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™	CMT-741-M

Biosyn™ Monofilament synthétique résorbable de Glycomer™ 631

Pointe ronde mousse								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 40 mm 	1	4	90	Violet	36	Protect Point™	CM-951	
1/2 CERCLE 48 mm 	0	3.5	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™	CMT-950-M	
	0	3.5	90	Incolore	36	Protect Point™	CMT-974	
	1	4	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™	CMT-949-M	
1/2 CERCLE 48 mm 	1	4	5x45	Violet	12	Protect Point™ D-Tach™	CM-949-M	

Pointe tapercutting								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE (BOUCLE) 48 mm 	1	4	150	Violet	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CM-740-L	



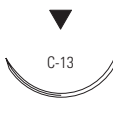
Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
CM-10-M	7	CM-9-M	7	GM-282	5
CM-11-M	7	CM-904	8	GM-291	5
CM-126	4	CM-905	8	GM-321	6
CM-14-M	7	CM-914	8	GM-322	6
CM-208	5	CM-922	7	GM-323	6
CM-222	2	CM-923	7	GM-324	5
CM-30-M	8	CM-924	7	GM-326	7
CM-31-M	8	CM-925	8	GM-327	7
CM-400	3	CM-949-M	11	GM-332	6
CM-401	3	CM-951	11	GM-34-M	5
CM-528	2	CM-952	7	GM-421	6
CM-543	2	CM-953	7	GM-432	6
CM-544	2	CM-954	7	GM-63-M	6
CM-558	6	CM-964	8	GM-64-M	6
CM-740-L	11	CM-966	8	GM-67-M	6
CM-765-L	8	CM-974	8	GM-69-M	6
CM-767-L	8	CM-975	8	GM-875	5
CM-776-L	9	CMT-740-M	10	GMT-226	10
CM-779-L	9	CMT-741-M	10	M-23	1
CM-780-L	9	CMT-811	10	M-31	1
CM-790-L	9	CMT-812	10	M-32	1
CM-801	8	CMT-949-M	11	M-33	1
CM-810	7	CMT-950-M	11	M-72	1
CM-811	7	CMT-952	10	M-74	1
CM-812	7	CMT-967	10	M-75	1
CM-813	7	CMT-974	11	SM-3625	3
CM-816	2	GM-111	6	SM-3626	3
CM-817	2	GM-121	6	SM-431	4
CM-830	7	GM-122	6	SM-432	4
CM-831	7	GM-123	6	SM-5624	3
CM-832	7	GM-125	6	SM-5627	3
CM-842	7	GM-181	5	SM-5628	3
CM-843	7	GM-181-M	5	SM-5637	3
CM-844	7	GM-183	5	SM-5638	3
CM-845	7	GM-222	7	SM-5678	3
CM-879	2	GM-223	7	SM-5679	3
CM-882	7	GM-226	7	SM-5679-G	3
CM-883	7	GM-227	7	SM-5687	3
CM-884	7	GM-281	5	SM-5688	3

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
SM-5690	3				
SM-632	1				
SM-633	1				
SM-643	2				
SM-644	2				
SM-690	1				
SM-691	1				
SM-691-G	1				
SM-693	1				
SM-693-G	1				
SM-791	1				
SM-822	1				
SM-822-G	1				
SM-823	1				
SM-823-G	1				
SM-83-M	1				
UM-201	5				
UM-202	5				
UM-203	5				
UM-204	5				
UM-213	5				
UM-214	5				
UM-215	5				
UM-243	10				
UM-245	9				
UM-345	9				
UM-403	5				
UM-877	9				
UM-878	9				
UM-879	9				
UM-886	5				
UM-977	9				
UM-978	9				
UM-979	9				
UM-986	5				
XM-822	4				
XM-823	4				
XM-834	4				
XM-845	4				

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Description:	Les sutures synthétiques résorbables Maxon™ et Maxon™ CV, sont des monofilaments de Polyglyconate (Copolymère d'Acide Glycolique et de Carbonate de Triméthylène).
Caractéristiques:	Le process avancé de fabrication de la molécule de Polyglyconate apporte à la suture: <ul style="list-style-type: none">- Une excellente résistance in-vivo- Une excellente sécurité du nœud- Une excellente maniabilité- Une mémoire minimisée
Indications:	Les sutures synthétiques résorbables Maxon™ et Maxon™ CV sont indiquées pour la suture et ligature des tissus mous. En chirurgie pédiatrique, elles sont recommandées pour les tissus cardio-vasculaires en croissance et pour les tissus vasculaires périphériques.
Actions:	Une suture synthétique résorbable Maxon™ et/ou Maxon™ CV provoque une réaction minimale inflammatoire aiguë des tissus, suivie d'un encapsulement progressif de la suture par les tissus connectifs fibreux. La perte progressive de résistance et la résorption d'une suture Maxon™ résultent d'un phénomène d'hydrolyse.
Résistance à la traction:	Des études d'implantation chez les animaux ont démontré que les sutures Maxon™ et Maxon™ CV ont une résistance initiale au nœud d'environ 140% en per opératoire, par rapport aux normes USP et EP, et conservent environ 75% de leur résistance deux semaines après l'implantation, environ 65% trois semaines après l'implantation et environ 50% quatre semaines après implantation.
Résorption:	La résorption des sutures synthétiques résorbables Maxon™ commence par une perte de résistance à la traction, suivie d'une perte de masse. La résorption totale intervient en 180 jours.
Stérilisation:	Oxyde d'éthylène.
Présentation:	Les sutures Maxon™ sont disponibles en format USP et EP: de la décimale 7-0 (métrique 0,5) à 1 (métrique 4) en aiguillées et boucles. Les sutures Maxon™ CV sont disponibles en format USP et EP: de la décimale 7-0 (métrique 0,5) à 4-0 (métrique 1,5). Les sutures Maxon™ et Maxon™ CV sont disponibles en Incolore ou Vert (D&C N°6)

Ligatures							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
Brins	3-0	2	3x45	Vert	36		6007-41
	2-0	3	3x45	Vert	36		6007-51

Pointe triangulaire inversée							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 12 mm 	5-0	1	45	Vert	36		6605-21
	4-0	1.5	45	Vert	36		6605-31
3/8 CERCLE 16 mm 	4-0	1.5	75	Incolore	36		6118-31
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Incolore	36		6608-21
	5-0	1	75	Incolore	36		6612-21
	4-0	1.5	45	Incolore	36		6608-31
	4-0	1.5	75	Incolore	36		6612-31
	4-0	1.5	75	Vert	36		6639-31
	3-0	2	45	Incolore	36		6608-41
	3-0	2	75	Vert	36		6639-41

Pointe triangulaire inversée

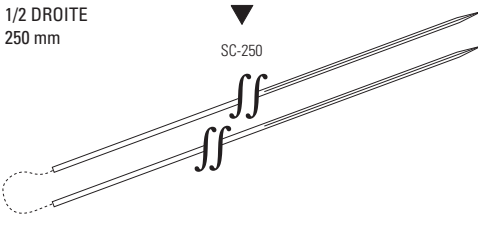
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	75	Incolore	36		6618-31
	3-0	2	75	Incolore	36		6618-41
	3-0	2	75	Vert	36		6641-41
	2-0	3	75	Incolore	36		6618-51
	2-0	3	75	Vert	36		6641-51
3/8 CERCLE 30 mm 	3-0	2	75	Incolore	36		6626-41
	2-0	3	75	Incolore	36		6626-51
1/2 CERCLE 20 mm 	3-0	2	45	Vert	36		6059-41
1/2 CERCLE 26 mm 	3-0	2	75	Incolore	36		6744-41
	2-0	3	75	Incolore	36		6744-51
1/2 CERCLE 26 mm H 	0	3.5	75	Vert	36		6751-61

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate




Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Vert	36		6755-51	
	0	3.5	75	Vert	36		6755-61	
	1	4	75	Vert	36		6755-71	
1/2 CERCLE 40 mm H 	0	3.5	75	Vert	36		6787-61	
	1	4	75	Vert	36		6787-71	
1/2 CERCLE 48 mm 	1	4	90	Vert	36		6769-71	
DROITE 60 mm 	4-0	1.5	75	Incolore	36		6908-31	
	3-0	2	75	Incolore	36		6908-41	

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Pointe triangulaire inversée




Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 DROITE 250 mm 	2-0	3	75	Vert	12		6390-53

Pointe triangulaire inversée de précision


Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	36	Surgalloy™	6532-11
	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	6532-21
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5516
	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5526
	5-0	1	45	Vert	36	Surgalloy™	SMM-5539
	5-0	1	75	Incolore	36	Surgalloy™	6534-21
	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5536
3/8 CERCLE 16 mm 	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5221
	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5431

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

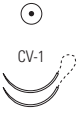



Pointe triangulaire inversée de précision

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5042
	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5043
	4-0	1.5	45	Vert	36	Surgalloy™	SMM-5033
	4-0	1.5	75	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5323
	3-0	2	45	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5044
	3-0	2	75	Incolore	36	Surgalloy™	6632-41
3/8 CERCLE 24 mm 	3-0	2	45	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5241
	2-0	3	45	Incolore	36		6624-51
1/2 CERCLE 16 mm 	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SMM-5831


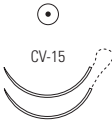
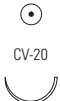

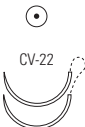
Pointe spatulée

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 8 mm  Courbure 130° Long. Corde 6.49 mm Rayon 3.56 mm	7-0	0.5	45	Vert	36		6628-01

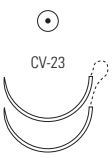

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 9 mm 	7-0	0.5	45	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6145-01
	7-0	0.5	60	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6139-01
	7-0	0.5	4x60	Vert	12	Maxon™ CV - Surgalloy™		6167-03
	7-0	0.5	75	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6127-01
	6-0	0.7	60	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6139-11
	6-0	0.7	75	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6127-11
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6115-11
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	75	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6148-11
	5-0	1	75	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6148-21
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6121-11
	6-0	0.7	60	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6147-11
	6-0	0.7	4x60	Vert	12	Maxon™ CV - Surgalloy™		6165-13
	6-0	0.7	75	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6124-11
	5-0	1	60	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6147-21
	5-0	1	4x60	Vert	12	Maxon™ CV - Surgalloy™		6165-23
	5-0	1	75	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6124-21

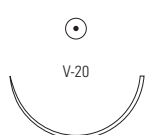
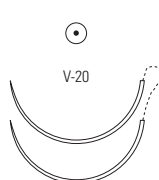


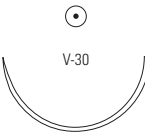
Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	75	Vert	36	Surgalloy™		6057-31
3/8 CERCLE 17 mm 	5-0	1	75	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6462-21
	4-0	1.5	75	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6462-31
1/2 CERCLE 10 mm 	6-0	0.7	75	Vert	36	Surgalloy™		6001-11
1/2 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	75	Vert	36	Surgalloy™		6213-11
	5-0	1	75	Vert	36	Surgalloy™		6213-21
	4-0	1.5	5x45	Vert	12	D-Tach™		6201-33
	4-0	1.5	75	Vert	36	Surgalloy™		6213-31
1/2 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	60	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6131-11
	5-0	1	75	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6122-21

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 17 mm 	5-0	1	75	Vert	36	Surgalloy™		6207-21
	4-0	1.5	75	Vert	36	Surgalloy™		6207-31
	3-0	2	75	Vert	36	Surgalloy™		6207-41
1/2 CERCLE 17 mm 	5-0	1	75	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6149-21
	4-0	1.5	90	Vert	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6134-31
1/2 CERCLE 20 mm 	5-0	1	75	Vert	36			6217-21
	4-0	1.5	5x45	Vert	12	D-Tach™		6219-33
	4-0	1.5	75	Vert	36			6217-31
	3-0	2	5x45	Vert	12	D-Tach™		6219-43
	3-0	2	75	Vert	36			6217-41
1/2 CERCLE 20 mm 	4-0	1.5	90	Vert	36			6221-31
	3-0	2	90	Vert	36			6036-41

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	5x45	Vert	12	D-Tach™		6229-33
	4-0	1.5	75	Vert	36	Surgalloy™		6233-31
	4-0	1.5	5x75	Vert	12	D-Tach™		6034-33
	3-0	2	5x45	Vert	12	D-Tach™		6229-43
	3-0	2	75	Incolore	36			6232-41
	3-0	2	75	Vert	36			6233-41
	3-0	2	5x75	Vert	12	D-Tach™		6034-43
	2-0	3	5x45	Vert	12	D-Tach™		6229-53
	2-0	3	75	Vert	36	Surgalloy™		6233-51
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	75	Vert	36	Surgalloy™		6231-31
	4-0	1.5	90	Vert	36	Surgalloy™		6235-31
	4-0	1.5	105	Vert	36	Surgalloy™		6143-31
	3-0	2	90	Vert	36	Surgalloy™		6235-41
1/2 CERCLE 27 mm 	3-0	2	75	Vert	36			6245-41
	2-0	3	75	Vert	36			6245-51
	0	3.5	75	Vert	36			6245-61
	1	4	75	Vert	36			6245-71
1/2 CERCLE 27 mm H 	0	3.5	75	Vert	36			6249-61
1/2 CERCLE 30 mm 	4-0	1.5	75	Vert	36			6261-31
	3-0	2	75	Vert	36			6261-41
	2-0	3	75	Vert	36			6261-51
	0	3.5	75	Vert	36			6261-61

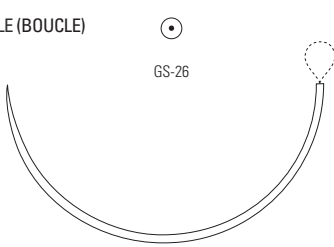
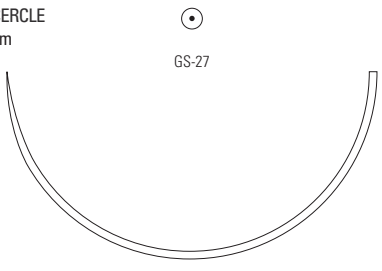
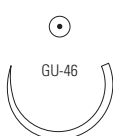
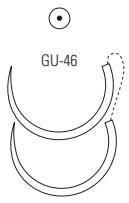
Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	75	Vert	36		6257-41	
	2-0	3	75	Vert	36		6257-51	
	0	3.5	75	Vert	36		6257-61	
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	75	Vert	36		6267-41	
	2-0	3	5x45	Vert	12	D-Tach™	6275-53	
	2-0	3	75	Vert	36		6267-51	
	2-0	3	90	Vert	36		6269-51	
	0	3.5	5x45	Vert	12	D-Tach™	6275-63	
	0	3.5	75	Vert	36		6267-61	
	0	3.5	90	Vert	36		6269-61	
	1	4	5x45	Vert	12	D-Tach™	6275-73	
	1	4	75	Vert	36		6267-71	
1/2 CERCLE 37 mm H 	0	3.5	90	Vert	36		6339-61	
	1	4	90	Vert	36		6339-71	
1/2 CERCLE 40 mm 	2-0	3	90	Vert	36		6287-51	
	0	3.5	75	Vert	36		6285-61	
	0	3.5	90	Vert	36		6287-61	
	1	4	75	Vert	36		6285-71	
	1	4	90	Vert	36		6287-71	


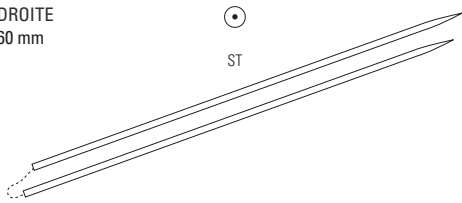
Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate



Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE (BOUCLE) 40 mm 	0	3.5	150	Vert	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		GMM-563-L
	1	4	150	Vert	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		GMM-573-L
1/2 CERCLE 48 mm 	0	3.5	5x45	Vert	12	D-Tach™		6311-63
	0	3.5	90	Vert	36			6307-61
	1	4	75	Vert	36			6301-71
	1	4	90	Vert	36			6307-71
1/2 CERCLE (BOUCLE) 48 mm 	0	3.5	150	Vert	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		GMM-634-L
	1	4	150	Vert	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		GMM-632-L
1/2 CERCLE 65 mm 	0	3.5	150	Vert	24			6319-62
	1	4	2x75	Vert	24			6315-72
	1	4	100	Vert	36			6322-71
	1	4	150	Vert	24			6319-72

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE (BOUCLE) 65 mm 	0	3.5	150	Vert	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		GMM-343-L
	0	3.5	240	Vert	12	Suture de 240 cm, bouclée à 120 cm		GMM-343-L
	1	4	240	Vert	12	Suture de 240 cm, bouclée à 120 cm		GMM-344-L
1/2 CERCLE 76 mm 	1	4	75	Vert	36			6313-71
5/8 CERCLE 27 mm 	2-0	3	75	Vert	36			6403-51
5/8 CERCLE 27 mm 	2-0	3	75	Vert	36			6404-51

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

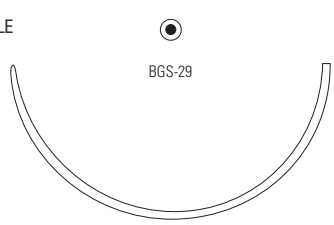
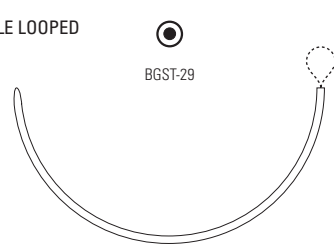
Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
5/8 CERCLE 27 mm H 	0	3.5	45	Vert	36		6455-61
	0	3.5	75	Vert	36		6456-61
	1	4	75	Vert	36		6419-71
DROITE 60 mm 	3-0	2	75	Vert	36		6237-41

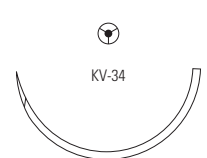
Pointe ronde mousse							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	90	Vert	36	Protect Point™	GMMT-951
	0	3.5	5x45	Vert	12	Protect Point™ D-Tach™	GMMT-563MG
	0	3.5	75	Vert	36	Protect Point™	GMMT-761
	0	3.5	90	Vert	36	Protect Point™	GMMT-961
1/2 CERCLE 37 mm H 	2-0	3	90	Vert	12	Protect Point™	6065-53
	0	3.5	90	Vert	12	Protect Point™	6065-63

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

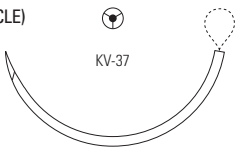
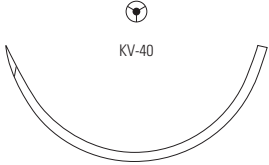
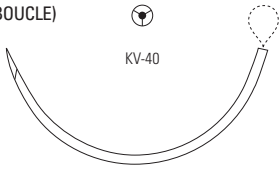
Pointe ronde mousse								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 40 mm 	0	3.5	90	Vert	12	Protect Point™		6063-63
	1	4	90	Vert	12	Protect Point™		6063-73
1/2 CERCLE 48 mm 	0	3.5	5x45	Vert	12	Protect Point™ D-Tach™		GMMT-541MG
	1	4	5x45	Vert	12	Protect Point™ D-Tach™		GMMT-540MG
1/2 CERCLE 48 mm 	1	4	150	Vert	12	Protect Point™ Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		GMMT-90-L
1/2 CERCLE 48 mm 	0	3.5	90	Vert	12	Protect Point™		6061-63
	1	4	90	Vert	12	Protect Point™		6061-73

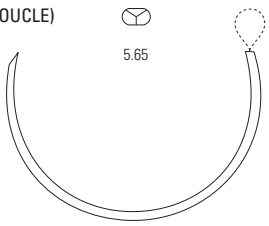
Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Pointe ronde mousse							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 65 mm 	0	3.5	150	Vert	12	Protect Point™	6067-63
	1	4	150	Vert	12	Protect Point™	6067-73
1/2 CERCLE LOOPED 65 mm 	0	3.5	240	Vert	12	Suture de 240 cm, bouclée à 120 cm	GGMT-689-L

Pointe tapercutting							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm 	0	3.5	90	Vert	36		6277-61

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Pointe tapercutting								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE (BOUCLE) 40 mm 	1	4	150	Vert	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		GMM-873-L
1/2 CERCLE 48 mm 	1	4	90	Vert	36			6295-71
1/2 CERCLE (BOUCLE) 48 mm 	0	3.5	150	Vert	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		GMM-806-L
	1	4	150	Vert	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		GMM-807-L

Pointe multi usages								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
5/8 CERCLE (BOUCLE) 65 mm 	0	3.5	150	Vert	12	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm		GMM-496-L
	1	4	180	Vert	12	Suture de 180 cm, bouclée à 90 cm		GMM-497-L

Maxon™ Monofilament synthétique résorbable de Polyglyconate

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
6001-11	7	6207-21	8	6269-51	10
6007-41	1	6207-31	8	6269-61	10
6007-51	1	6207-41	8	6269-71	10
6034-33	9	6213-11	7	6275-53	10
6034-43	9	6213-21	7	6275-63	10
6036-41	8	6213-31	7	6275-73	10
6057-31	7	6217-21	8	6277-61	15
6059-41	2	6217-31	8	6285-61	10
6061-63	14	6217-41	8	6285-71	10
6061-73	14	6219-33	8	6287-51	10
6063-63	14	6219-43	8	6287-61	10
6063-73	14	6221-31	8	6287-71	10
6065-53	13	6229-33	9	6295-71	16
6065-63	13	6229-43	9	6301-71	11
6067-63	15	6229-53	9	6307-61	11
6067-73	15	6231-31	9	6307-71	11
6115-11	6	6232-41	9	6311-63	11
6118-31	1	6233-31	9	6313-71	12
6121-11	6	6233-41	9	6315-72	11
6122-21	7	6233-51	9	6319-62	11
6124-11	6	6235-31	9	6319-72	11
6124-21	6	6235-41	9	6322-71	11
6127-01	6	6237-41	13	6339-61	10
6127-11	6	6245-41	9	6339-71	10
6131-11	7	6245-51	9	6390-53	4
6134-31	8	6245-61	9	6403-51	12
6139-01	6	6245-71	9	6404-51	12
6139-11	6	6249-61	9	6419-71	13
6143-31	9	6257-41	10	6455-61	13
6145-01	6	6257-51	10	6456-61	13
6147-11	6	6257-61	10	6462-21	7
6147-21	6	6261-31	9	6462-31	7
6148-11	6	6261-41	9	6532-11	4
6148-21	6	6261-51	9	6532-21	4
6149-21	8	6261-61	9	6534-21	4
6165-13	6	6267-41	10	6605-21	1
6165-23	6	6267-51	10	6605-31	1
6167-03	6	6267-61	10	6608-21	1
6201-33	7	6267-71	10	6608-31	1

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
6608-41	1	GMMT-563MG	13		
6612-21	1	GMMT-689-L	15		
6612-31	1	GMMT-761	13		
6618-31	2	GMMT-90-L	14		
6618-41	2	GMMT-951	13		
6618-51	2	GMMT-961	13		
6624-51	5	SMM-5033	5		
6626-41	2	SMM-5042	5		
6626-51	2	SMM-5043	5		
6628-01	5	SMM-5044	5		
6632-41	5	SMM-5221	4		
6639-31	1	SMM-5241	5		
6639-41	1	SMM-5323	5		
6641-41	2	SMM-5431	4		
6641-51	2	SMM-5516	4		
6744-41	2	SMM-5526	4		
6744-51	2	SMM-5536	4		
6751-61	2	SMM-5539	4		
6755-51	3	SMM-5831	5		
6755-61	3				
6755-71	3				
6769-71	3				
6787-61	3				
6787-71	3				
6908-31	3				
6908-41	3				
GMM-343-L	12				
GMM-344-L	12				
GMM-496-L	16				
GMM-497-L	16				
GMM-563-L	11				
GMM-573-L	11				
GMM-632-L	11				
GMM-634-L	11				
GMM-806-L	16				
GMM-807-L	16				
GMM-873-L	16				
GMMT-540MG	14				
GMMT-541MG	14				


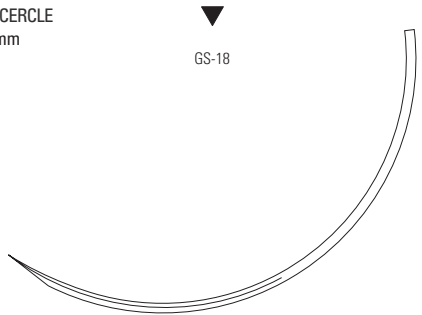
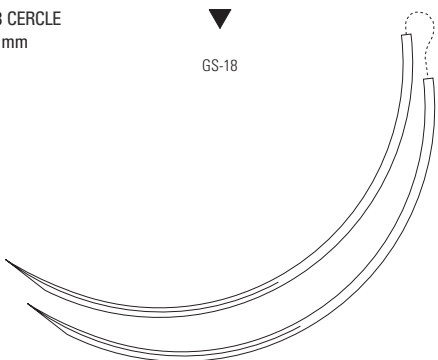

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Description:	Les sutures synthétiques non résorbables Surgipro™ II et Surgipro™ (incolore ou teintées) sont des monofilaments inertes et stériles composés d'un stéréoisomère isostatique cristallin de polypropylène (polyoléfine synthétique linéaire) et de polyéthylène. Les fils sont teints en bleu pour améliorer leur visibilité.
Caractéristiques:	Le process avancé de fabrication de la molécule de polypropylène apporte à la suture: <ul style="list-style-type: none">- Uniformité du diamètre de la suture- Une grande souplesse- Une mémoire minimisée- Un effilochage réduit- Une très grande résistance et sécurité des nœuds
Indications:	Les sutures Surgipro™ II et Surgipro™ peuvent être utilisées d'une manière générale pour les rapprochements et/ou la ligature de tissus mous, y compris en neurochirurgie, chirurgies cardio-vasculaire et ophtalmique.
Actions:	Les sutures Surgipro™ II et Surgipro™ produisent une réaction inflammatoire aiguë minimale dans les tissus, suivie d'une encapsulation graduelle de la suture par les tissus fibreux connectifs.
Résistance à la traction:	Les sutures Surgipro™ II et Surgipro™ ne se résorbent pas et aucune modification significative de la résistance n'a été observée in vivo.
Stérilisation:	Oxyde d'éthylène.
Présentation:	Les sutures Surgipro™ II sont incolores (transparentes) ou bleues (Pthalocyanine de cuivre) pour les décimales allant de 8-0 (métrique 0.4) à 3-0 (métrique 2). Les sutures Surgipro™ sont incolores (transparentes) ou bleues (Pthalocyanine de cuivre) pour les décimales allant de 10-0 (métrique 0.2) à 8-0 (métrique 0.4) et de 2-0 (métrique 3) à 2 (métrique 5). Les sutures sont livrées stériles. Elles sont disponibles en aiguillées, en emballage d'une, deux ou trois douzaines. Les sutures Surgipro™ II sont disponibles avec pledgets en PTFE (poly-tétrafluoro-éthylène). Les pledgets permettent de renforcer le point entre la suture et les tissus. Les sutures Surgipro™ sont disponibles dans les configurations suivantes: <ol style="list-style-type: none">1. Les pledgets en PTFE (poly-tétrafluoro-éthylène) permettent de renforcer le point entre la suture et les tissus.2. Une perle en acetal et un collier d'aluminium pour ancrer les extrémités de la suture lors des procédures de fermetures sous-cuticulaires ou de sutures de tendon.

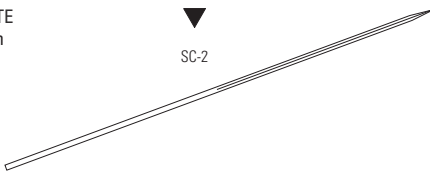
Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol




Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	36		SP-660	
	6-0	0.7	45	Bleu	12		SP-660-G	
	5-0	1	45	Bleu	12		SP-559-G	
	4-0	1.5	75	Bleu	36		SP-631	
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Bleu	36		SP-661	
	5-0	1	45	Bleu	12		SP-661-G	
	4-0	1.5	45	Bleu	36		SP-683	
	4-0	1.5	45	Bleu	12		SP-683-G	
	3-0	2	45	Bleu	36		SP-665	
	3-0	2	45	Bleu	12		SP-665-G	
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	45	Bleu	36		SP-629	
	3-0	2	45	Bleu	36		SP-684	
	3-0	2	45	Bleu	12		SP-684-G	
3/8 CERCLE 26 mm 	2-0	3	45	Bleu	36		SP-868	
	2-0	3	45	Bleu	12		SP-868-G	
	2-0	3	75	Bleu	36		SP-685	
3/8 CERCLE 30 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36		SP-670	
	3-0	2	75	Bleu	36		SP-675	

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe triangulaire inversée							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 39 mm 	3-0	2	75	Bleu	36		SP-649
	2-0	3	75	Bleu	36		SP-689
	0	3.5	75	Bleu	36		SP-690
3/8 CERCLE 77 mm 	2	5	3x60	Bleu	12		3-CP-360
3/8 CERCLE 77 mm 	2	5	75	Bleu	24		CP-460
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	75	Bleu	36		CP-443



Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
DROITE 60 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36		SP-621	
	3-0	2	75	Bleu	36		SP-622	
	3-0	2	75	Bleu	24	Perle en acetal et collier	SP-622-BC	
	2-0	3	75	Bleu	36		SP-623	
	2-0	3	75	Bleu	24	Perle en acetal et collier	SP-623-BC	



Pointe triangulaire inversée de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 11 mm 	7-0	0.5	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-1696	
	7-0	0.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-1696-G	
	6-0	0.7	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-1697	
	6-0	0.7	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5697-G	
	6-0	0.7	45	Incolore	36	Surgalloy™	SP-1606	
	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-2698-G	
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-5695	
	6-0	0.7	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5695-G	
	5-0	1	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-5698	
	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5698-G	
	4-0	1.5	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-5699	
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5699-G	
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5680-G	
	5-0	1	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-5681	
	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5681-G	
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5692-G	
	3-0	2	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-1693-G	

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol


Pointe triangulaire inversée de précision


Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-5686
	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5686-G
	4-0	1.5	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-5682
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5682-G
	3-0	2	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-5687
	3-0	2	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5687-G
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-1664-G
	3-0	2	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-5663
	3-0	2	45	Bleu	12	Surgalloy™	SP-5663-G

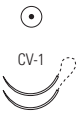
Pointe triangulaire de précision

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	36		SP-1617
	5-0	1	45	Bleu	36		SP-1618
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	36		SP-1636
	5-0	1	45	Bleu	36	Surgalloy™	SP-1635
	4-0	1.5	45	Bleu	36		SP-1634





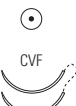
Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe triangulaire de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 19 mm 	4-0	1.5	45	Bleu	36		SP-1644	
	3-0	2	45	Bleu	36		SP-1643	


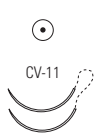

Pointe spatulée de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 6 mm Courbure 158° Long. Corde 3.90 mm Rayon 2.00 mm Microns 150 	10-0	0.2	30	Bleu	12 Surgalloy™		P-2756-K	

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 9 mm 	7-0	0.5	45	Bleu	36 Surgalloy™		VP-701-X	
	7-0	0.5	5x45	Bleu	12 Surgalloy™		VP-701-MX	
	7-0	0.5	60	Bleu	36 Surgalloy Optimis™		VP-72-X	
	7-0	0.5	60	Bleu	36 Surgalloy™		VP-702-X	
	7-0	0.5	5x60	Bleu	12 Surgalloy Optimis™		VP-72-MX	
	7-0	0.5	5x60	Bleu	12 Surgalloy™		VP-702-MX	
	7-0	0.5	75	Bleu	36 Surgalloy™		VP-713-X	
	7-0	0.5	5x75	Bleu	12 Surgalloy Optimis™		VP-37-MX	
	7-0	0.5	5x75	Bleu	12 Surgalloy™		VP-713-MX	
	7-0	0.5	90	Bleu	36 Surgalloy™		VP-366-X	
	6-0	0.7	45	Bleu	36 Surgalloy™		VP-746-X	
	6-0	0.7	2x45	Bleu	12 Surgalloy™		VP-746-MX	
	6-0	0.7	60	Bleu	36 Surgalloy Optimis™		VP-73-X	
	6-0	0.7	60	Bleu	36 Surgalloy™		VP-703-X	

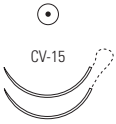
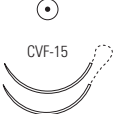
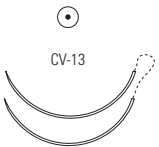

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 9 mm 	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-709-X
	6-0	0.7	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-365-X
3/8 Ponta Cónica 9,5 mm 	7-0	0.5	60	Bleu	36	Cardiopoint™		VP-910-X
3/8 CERCLE 9 mm 	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-702-X
	7-0	0.5	5x60	Bleu	12	Surgalloy™		VP-102-MX
	7-0	0.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-713-X
	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-703-X
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-709-X
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy Optimis™		VP-74-X
	6-0	0.7	5x60	Bleu	12	Surgalloy™		VP-764-MX
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-776-X
	6-0	0.7	5x75	Bleu	12	Surgalloy™		VP-776-MX
	6-0	0.7	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-361
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-776-X


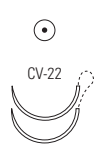


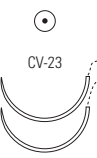
Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-889-X
	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-890-X
3/8 CERCLE 13 mm 	7-0	0.5	45	Bleu	36	Surgalloy™		VP-800-X
	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-727-X
	7-0	0.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-812-X
	6-0	0.7	45	Bleu	36	Surgalloy Optimis™		VP-78-X
	6-0	0.7	45	Bleu	36	Surgalloy™		VP-718-X
	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-726-X
	6-0	0.7	5x60	Bleu	12	Surgalloy™		VP-726-MX
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy Optimis™		VP-76-X
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-706-X
	6-0	0.7	5x75	Bleu	12	Surgalloy Optimis™		VP-76-MX
	6-0	0.7	5x75	Bleu	12	Surgalloy™		VP-706-MX
	6-0	0.7	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-363-X
	5-0	1	45	Bleu	36	Surgalloy™		VP-719-X
	5-0	1	60	Bleu	36	Surgalloy Optimis™		VP-75-X
	5-0	1	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-725-X
	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-705-X
	5-0	1	5x75	Bleu	12	Surgalloy™		VP-705-MX
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy Optimis™		VP-70-X
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-720-X
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-813-X
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-726-X
	6-0	0.7	5x60	Bleu	12	Surgalloy™		VP-126-MX
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-706-X
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-720-X
	5-0	1	5x90	Bleu	12	Surgalloy™		VP-120-MX

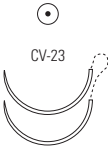
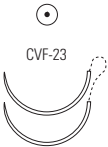
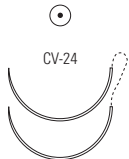

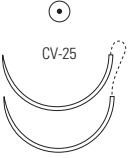
Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-881-X
3/8 CERCLE 17 mm 	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		1
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-580-X
	4-0	1.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-584-X
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-581-X
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		VP-582-X
	4-0	1.5	120	Bleu	36	Surgalloy™		VP-583-X
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-585-X
3/8 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-612-X
3/8 CERCLE 22 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-841-X
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-851-X
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-532-X
	2-0	3	90	Bleu	36			VP-533
1/2 CERCLE 10 mm 	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-772-X
	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-754-X
	5-0	1	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-755-X


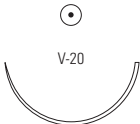
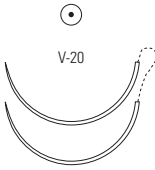
Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 12 mm 	4-0	1.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-610-X
1/2 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	36	Surgalloy™		VP-714-X
	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-711-X
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-733-X
	6-0	0.7	5x75	Bleu	12	Surgalloy™		VP-733-MX
	5-0	1	45	Bleu	36	Surgalloy™		VP-715-X
	5-0	1	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-205-X
	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-710-X
	5-0	1	5x75	Bleu	12	Surgalloy™		VP-710-MX
	4-0	1.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-204-X
1/2 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-733-X
	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-710-X
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-711-X
1/2 CERCLE 17 mm 	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-870-X
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-871-X
	3-0	2	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-872-X
1/2 CERCLE 17 mm 	6-0	0.7	90	Bleu	36	Surgalloy Optimis™		VP-552-X
	6-0	0.7	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-555-X
	5-0	1	45	Bleu	36	Surgalloy™		VP-756-X
	5-0	1	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-566-X
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy Optimis™		VP-660-X
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-556-X
	5-0	1	5x90	Bleu	12	Surgalloy™		VP-556-MX
	4-0	1.5	45	Bleu	36	Surgalloy™		VP-757-X
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-557-X

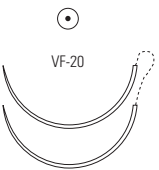
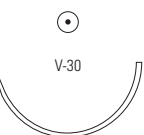
Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		VPP-557-X
	4-0	1.5	5x90	Bleu	12	Surgalloy™		VP-557-MX
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-558-X
1/2 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-557-X
1/2 CERCLE 20 mm 	4-0	1.5	90	Bleu	36			VP-331-X
1/2 CERCLE 22 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-771-X
1/2 CERCLE 22 mm 	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-761-X
	4-0	1.5	5x90	Bleu	12	Surgalloy™		VP-761-MX
	3-0	2	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-760-X
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-762-X


Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 22 mm H 	0	3.5	5x45	Bleu	12	D-Tach™		CP-92-M
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-831-X
	3-0	2	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-832-X
	2-0	3	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-833
	0	3.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-834
1/2 CERCLE 26 mm 	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-510-X
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-520-X
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-511-X
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-521-X
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		VP-421-X
	4-0	1.5	120	Bleu	36	Surgalloy™		VP-541-X
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-522-X
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		VP-422-X
	3-0	2	120	Bleu	36	Surgalloy™		VP-542-X
	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-523
	2-0	3	120	Bleu	36	Surgalloy™		VP-543

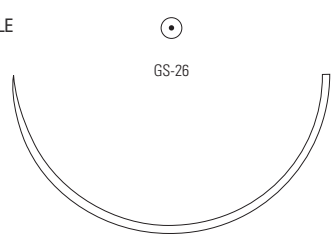

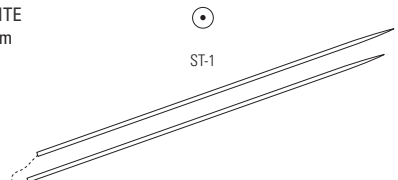
Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol


Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	120	Bleu	36	Surgalloy™		VP-151
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-521-X
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-522-X
	3-0	2	135	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-354-X
	2-0	3	120	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-543
1/2 CERCLE 27 mm 	2-0	3	5x45	Bleu	12	D-Tach™		CP-16-M
	2-0	3	75	Bleu	36			CP-411
	0	3.5	75	Bleu	36			CP-412
1/2 CERCLE 27 mm H 	0	3.5	5x45	Bleu	12	D-Tach™		CP-90-M
	0	3.5	75	Bleu	36			CP-414
	1	4	90	Bleu	36			CP-415
1/2 CERCLE 30 mm 	2-0	3	75	Bleu	36			VP-945

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol




Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	90	Bleu	36		VP-842-X	
	2-0	3	90	Bleu	36		VP-843	
	2-0	3	120	Bleu	36		VP-853	
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	75	Bleu	36		CP-422	
	2-0	3	75	Bleu	36		CP-423	
	0	3.5	5x45	Bleu	12	D-Tach™	CP-10-M	
	0	3.5	75	Bleu	36		CP-424	
	1	4	75	Bleu	36		CP-425	
1/2 CERCLE 40 mm 	2-0	3	75	Bleu	36		CP-433	
	0	3.5	75	Bleu	36		CP-434	
	1	4	75	Bleu	36		CP-435	
	1	4	100	Bleu	36		CP-535	
1/2 CERCLE 48 mm 	0	3.5	75	Bleu	36		CP-454	
	1	4	75	Bleu	36		CP-455	

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol



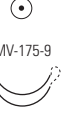
Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 65 mm  GS-26	0	3.5	150	Bleu	24		CP-823	
	1	4	150	Bleu	24		CP-824	
	2	5	150	Bleu	24		CP-825	
1/2 CERCLE (BOUCLE) 65 mm  GS-26	1	4	120	Bleu	24	Suture de 120 cm, bouclée à 60 cm	CP-824-L	
	1	4	240	Bleu	24	Suture de 240 cm, bouclée à 120 cm	CP-834-L	
DROITE 51 mm  ST-1	2-0	3	90	Bleu	36		GP-282	


Pointe ronde pour microchirurgie								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 6 mm  MV-135-5 Courbure 140° Long. Corde 4.92 mm Rayon 2.62 mm	8-0	0.4	45	Bleu	36	Surgalloy™	VP-900-X	
	8-0	0.4	2x45	Bleu	12	Surgalloy™	VP-900-MX	
	8-0	0.4	5x45	Bleu	12	Surgalloy™	VP-901-MX	
	8-0	0.4	60	Bleu	36	Surgalloy™	VP-902-X	
	8-0	0.4	2x60	Bleu	12	Surgalloy™	VP-902-MX	
	8-0	0.4	5x60	Bleu	12	Surgalloy™	VP-903-MX	

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

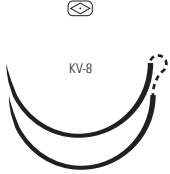




Pointe ronde pour microchirurgie								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 6 mm Courbure 140° Long. Corde 4.92 mm Rayon 2.62 mm 	8-0	0.4	75	Bleu	12	Surgalloy™		VP-973-X
	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-904-X
	7-0	0.5	2x60	Bleu	12	Surgalloy™		VP-904-MX
3/8 CERCLE 6 mm Courbure 140° Long. Corde 4.92 mm Rayon 2.62 mm 	8-0	0.4	2x60	Bleu	12	Surgalloy™		VP-209-MX
3/8 CERCLE 8 mm Courbure 140° Long. Corde 6.13 mm Rayon 3.19 mm 	8-0	0.4	45	Bleu	36	Surgalloy™		VP-744-X
	8-0	0.4	2x45	Bleu	12	Surgalloy™		VP-744-MX
	8-0	0.4	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-745-X
	8-0	0.4	2x75	Bleu	12	Surgalloy™		VP-753-MX
	7-0	0.5	45	Bleu	36	Surgalloy™		VP-628
	7-0	0.5	5x45	Bleu	12	Surgalloy™		VP-734-MX
	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-735-X
	7-0	0.5	2x60	Bleu	12	Surgalloy™		VP-737-MX
	7-0	0.5	5x60	Bleu	12	Surgalloy™		VP-735-MX
	7-0	0.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-747-X
	7-0	0.5	2x75	Bleu	12	Surgalloy™		VP-747-MX

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol



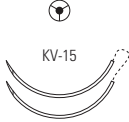
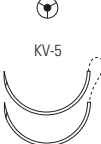
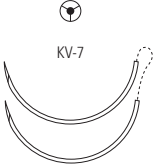
Pointe ronde pour microchirurgie								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
<p>3/8 CERCLE 8 mm</p>  <p>MVF-175-8</p> <p>Courbure 140° Long. Corde 6.01 mm Rayon 3.20 mm</p>	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		VPP-735-X
<p>3/8 CERCLE 8 mm</p>  <p>CV-351</p> <p>Courbure 135° Long. Corde 6.28 mm Rayon 3.48 mm</p>	8-0	0.4	60	Bleu	36	Cardiopoint™		VP-738-X
	8-0	0.4	2x60	Bleu	12	Cardiopoint™		VP-738-MX
	7-0	0.5	60	Bleu	36	Cardiopoint™		VP-630-X
	6-0	0.7	60	Bleu	36	Cardiopoint™		VP-631-X
<p>3/8 CERCLE 10 mm</p>  <p>MV-175-9</p> <p>Courbure 140° Long. Corde 7.69 mm Rayon 4.09 mm</p>	8-0	0.4	60	Bleu	36	Surgalloy™		VP-763-X
	7-0	0.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		VPP-875-X
	7-0	0.5	5x75	Bleu	12	Surgalloy™		VP-875-MX

Pointe ronde mousse								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
<p>1/2 CERCLE 48 mm</p>  <p>BGS-25</p>	1	4	100	Bleu	36	Protect Point™		CP-836

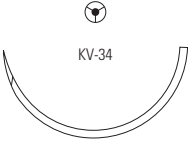
Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe tapercutting							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 30 mm 	3-0	2	90	Bleu	36		VP-417-X
3/8 CERCLE 9 mm 	7-0	0.5	45	Bleu	36	Surgalloy™	VP-721-X
	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™	VP-704-X
	7-0	0.5	5x60	Bleu	12	Surgalloy™	VP-704-MX
	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy™	VP-712-X
	6-0	0.7	5x60	Bleu	12	Surgalloy™	VP-712-MX
3/8 CERCLE 9 mm 	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™	VPF-704-X
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™	VPF-807-X
3/8 Pointe Tapercutting 9,5 mm 	7-0	0.5	60	Bleu	36	Cardiopoint™	VP-911-X
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy™	VP-707-X
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™	VP-728-X
	6-0	0.7	5x75	Bleu	12	Surgalloy™	VP-728-MX
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™	VP-751-X
	5-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™	VP-708-X

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe tapercutting								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		VPF-728-X
3/8 CERCLE 17 mm 	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-941-X
3/8 CERCLE 17 mm 	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		VP-914-X
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-924-X
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-925-X
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-926-X
1/2 CERCLE 17 mm 	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-934-X
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-935-X
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		VP-435-X
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-936-X
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-975-X
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		VP-985-X
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-976-X
	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-977
	0	3.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		VP-978

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

Pointe tapercutting							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm 	0	3.5	75	Bleu	36		CP-844
	1	4	75	Bleu	36		CP-845

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
3-CP-360	2	SP-1664-G	4	SP-665-G	1
CP-10-M	13	SP-1693-G	3	SP-670	1
CP-16-M	12	SP-1696	3	SP-675	1
CP-411	12	SP-1696-G	3	SP-683	1
CP-412	12	SP-1697	3	SP-683-G	1
CP-414	12	SP-2698-G	3	SP-684	1
CP-415	12	SP-559-G	1	SP-684-G	1
CP-422	13	SP-5663	4	SP-685	1
CP-423	13	SP-5663-G	4	SP-689	2
CP-424	13	SP-5680-G	3	SP-690	2
CP-425	13	SP-5681	3	SP-868	1
CP-433	13	SP-5681-G	3	SP-868-G	1
CP-434	13	SP-5682	4	VP-102-MX	6
CP-435	13	SP-5682-G	4	VP-120-MX	7
CP-443	2	SP-5686	4	VP-126-MX	7
CP-454	13	SP-5686-G	4	VP-151	12
CP-455	13	SP-5687	4	VP-204-X	9
CP-460	2	SP-5687-G	4	VP-205-X	9
CP-535	13	SP-5692-G	3	VP-209-MX	15
CP-823	14	SP-5695	3	VP-331-X	10
CP-824	14	SP-5695-G	3	VP-361	6
CP-824-L	14	SP-5697-G	3	VP-363-X	7
CP-825	14	SP-5698	3	VP-365-X	6
CP-834-L	14	SP-5698-G	3	VP-366-X	5
CP-836	16	SP-5699	3	VP-37-MX	5
CP-844	19	SP-5699-G	3	VP-417-X	17
CP-845	19	SP-621	3	VP-421-X	11
CP-90-M	12	SP-622	3	VP-422-X	11
CP-92-M	11	SP-622-BC	3	VP-435-X	18
GP-282	14	SP-623	3	VP-510-X	11
P-2756-K	5	SP-623-BC	3	VP-511-X	11
SP-1606	3	SP-629	1	VP-520-X	11
SP-1617	4	SP-631	1	VP-521-X	11
SP-1618	4	SP-649	2	VP-522-X	11
SP-1634	4	SP-660	1	VP-523	11
SP-1635	4	SP-660-G	1	VP-532-X	8
SP-1636	4	SP-661	1	VP-533	8
SP-1643	5	SP-661-G	1	VP-541-X	11
SP-1644	5	SP-665	1	VP-542-X	11

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
VP-543	11	VP-713-MX	5	VP-757-X	9
VP-552-X	9	VP-713-X	5	VP-76-MX	7
VP-555-X	9	VP-714-X	9	VP-76-X	7
VP-556-MX	9	VP-715-X	9	VP-760-X	10
VP-556-X	9	VP-718-X	7	VP-761-MX	10
VP-557-MX	10	VP-719-X	7	VP-761-X	10
VP-557-X	9	VP-72-MX	5	VP-762-X	10
VP-558-X	10	VP-72-X	5	VP-763-X	16
VP-566-X	9	VP-720-X	7	VP-764-MX	6
VP-580-X	8	VP-721-X	17	VP-771-X	10
VP-581-X	8	VP-725-X	7	VP-772-X	8
VP-582-X	8	VP-726-MX	7	VP-776-MX	6
VP-583-X	8	VP-726-X	7	VP-776-X	6
VP-584-X	8	VP-727-X	7	VP-78-X	7
VP-585-X	8	VP-728-MX	17	VP-800-X	7
VP-628	15	VP-728-X	17	VP-812-X	7
VP-630-X	16	VP-73-X	5	VP-813-X	7
VP-631-X	16	VP-733-MX	9	VP-831-X	11
VP-660-X	9	VP-733-X	9	VP-832-X	11
VP-70-X	7	VP-734-MX	15	VP-833	11
VP-701-MX	5	VP-735-MX	15	VP-834	11
VP-701-X	5	VP-735-X	15	VP-841-X	8
VP-702-MX	5	VP-737-MX	15	VP-842-X	13
VP-702-X	5	VP-738-MX	16	VP-843	13
VP-703-X	5	VP-738-X	16	VP-851-X	8
VP-704-MX	17	VP-74-X	6	VP-853	13
VP-704-X	17	VP-744-MX	15	VP-870-X	9
VP-705-MX	7	VP-744-X	15	VP-871-X	9
VP-705-X	7	VP-745-X	15	VP-872-X	9
VP-706-MX	7	VP-746-MX	5	VP-875-MX	16
VP-706-X	7	VP-746-X	5	VP-875-X	16
VP-707-X	17	VP-747-MX	15	VP-881-X	8
VP-708-X	17	VP-747-X	15	VP-889-X	7
VP-709-X	6	VP-75-X	7	VP-890-X	7
VP-710-MX	9	VP-751-X	17	VP-900-MX	14
VP-710-X	9	VP-753-MX	15	VP-900-X	14
VP-711-X	9	VP-754-X	8	VP-901-MX	14
VP-712-MX	17	VP-755-X	8	VP-902-MX	14
VP-712-X	17	VP-756-X	9	VP-902-X	14

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
VP-903-MX	14	VPF-735-X	16		
VP-904-MX	15	VPF-776-X	6		
VP-904-X	15	VPF-807-X	17		
VP-910-X	6	VPP-557-X	10		
VP-911-X	17	1	8		
VP-914-X	18				
VP-924-X	18				
VP-925-X	18				
VP-926-X	18				
VP-934-X	18				
VP-935-X	18				
VP-936-X	18				
VP-941-X	18				
VP-945	12				
VP-973-X	15				
VP-975-X	18				
VP-976-X	18				
VP-977	18				
VP-978	18				
VP-985-X	18				
VPF-354-X	12				
VPF-521-X	12				
VPF-522-X	12				
VPF-543	12				
VPF-557-X	10				
VPF-610-X	9				
VPF-612-X	8				
VPF-702-X	6				
VPF-703-X	6				
VPF-704-X	17				
VPF-706-X	7				
VPF-709-X	6				
VPF-710-X	9				
VPF-711-X	9				
VPF-713-X	6				
VPF-720-X	7				
VPF-726-X	7				
VPF-728-X	18				
VPF-733-X	9				

Surgipro™ II/Surgipro™ Monofilament synthétique non résorbable de Polypropylène et Polyéthylène glycol

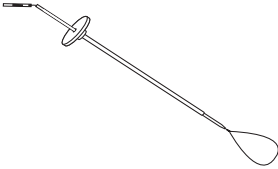
Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Description:	Les sutures synthétiques non résorbables Ti-cron™ et Surgidac™ sont composées de téréphtalate de polyéthylène. Elles sont préparées à partir de fibres linéaires de Polyester. Les sutures tressées Ti-cron™ sont disponibles non-enduites ou enduites à coeur de silicone (procédé silastic), afin d'augmenter le pouvoir lubrifiant de la surface et améliorer ainsi les caractéristiques de manipulation, de passage intratissulaire et les propriétés de nouage. Les sutures monofilament Surgidac™ ne sont pas enduites; les sutures tressées Surgidac™ sont livrées non enduites ou uniformément enduites d'adipate de polybutylène.
Caractéristiques:	<ul style="list-style-type: none">- Très grande résistance- Rapprochement des berges optimal- Sécurité optimale lors de l'implantation de prothèses- Manipulation excellente et facilité de nouer la suture- Excellent glisse intra tissulaire- Facilité de repositionnement du nœud- Excellente sécurité du nœud
Indications:	Les sutures Ti-cron™ et Surgidac™ sont généralement indiquées pour le rapprochement et ligature des tissus mous, y compris pour une utilisation en neurochirurgie et chirurgies cardio-vasculaire et ophtalmique.
Actions:	Les sutures Ti-cron™ et Surgidac™ produisent une réaction inflammatoire aiguë minimale dans les tissus, suivie d'une encapsulation graduelle de la suture par les tissus fibreux connectifs.
Résistance:	Les sutures Ti-cron™ et Surgidac™ sont non résorbables. Il n'a pas été constaté de changement significatif de conservation de la résistance à la traction, in vivo.
Stérilisation:	Les sutures Ti-cron™ et Surgidac™ de décimales inférieures ou égales à 6-0 (USP), ou avec pledget, sont stérilisées avec de l'oxyde d'éthylène. Les sutures de décimales supérieures ou égales à 5-0 (USP) sont stérilisées avec des Rayons Gamma.
Présentation:	<p>Les sutures Ti-cron™ sont disponibles en couleur blanche ou bleue (D&C Bleu N° 6). Ce sont des tresses enduites ou non-enduites, disponibles en format USP et EP: de la décimale 7-0 (métrique 0,5) à 5 (métrique 7).</p> <p>Les sutures Surgidac™ sont de couleur blanche ou verte (D&C vert n° 6). Elles existent sous forme de tresses enduites ou non-enduites, de la décimale 7-0 (métrique 0,5) à 5 (métrique 7).</p> <p>Les sutures sont livrées stériles. Elles sont disponibles en aiguillées, brins pré-découpés non aiguillés, en emballage d'une, deux ou trois douzaines.</p> <p>Les sutures Ti-cron™ sont également disponibles avec des pledgets de PTFE (poly-tétrafluoro-éthylène), pour une utilisation comme coussinet entre la zone de suture et la surface du tissu, afin d'augmenter la surface d'appui du nœud.</p>

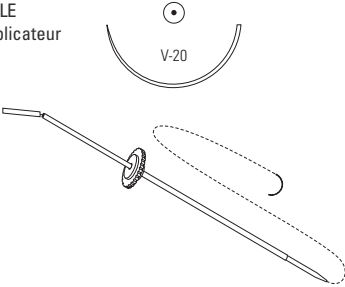
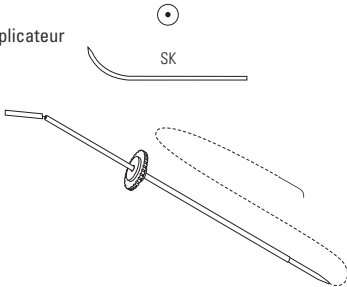
Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone


Ligatures							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
Brins	5-0	1	12x45	Bleu	36		3008-21
	4-0	1.5	12x45	Bleu	36		3008-31
	4-0	1.5	12x75	Bleu	24		3003-32
	3-0	2	12x45	Bleu	36		3008-41
	3-0	2	6x45	Bleu	36		3001-41
	3-0	2	12x75	Bleu	24		3003-42
	2-0	3	12x45	Bleu	36		3008-51
	2-0	3	5x45	Blanc	12		3011-51
	2-0	3	12x75	Bleu	24		3003-52
	0	3.5	6x45	Bleu	24		3001-62
	0	3.5	6x75	Bleu	24		3002-62
	1	4	6x45	Bleu	24		3001-72
Bobine	3-0	2	250	Bleu	24		3380-42
	2-0	3	250	Bleu	24		3380-52
	0	3.5	250	Bleu	24		3380-62
	1	4	250	Bleu	24		3380-72
	2	5	250	Bleu	24		3380-82
	4	6	150	Bleu	24		3381-09
	5	7	150	Bleu	24		3381-89

Surgitie™							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
BOUCLE avec applicateur	2-0	3	52	Vert	12	Endoscopie	ED-20-L
	0	3.5	52	Vert	12	Endoscopie	ED-21-L



Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

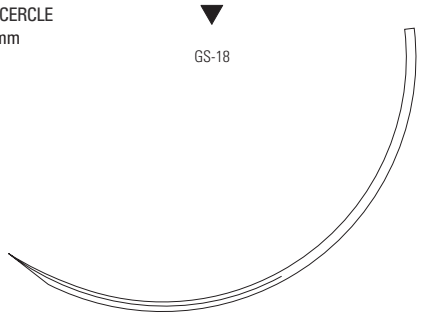
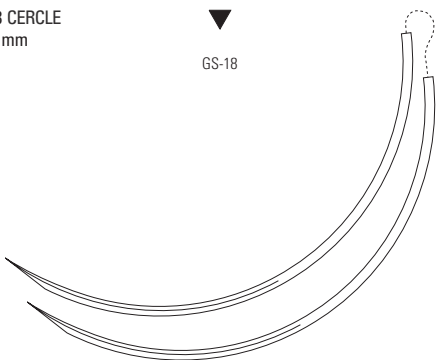

Surgiwip™							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE avec applicateur 26 mm 	2-0	3	120	Vert	12	Endoscopie	EDW-51
	0	3.5	120	Vert	12	Endoscopie	EDW-50
SKI avec applicateur 23 mm 	2-0	3	120	Vert	12	Endoscopie	EDW-53
	0	3.5	120	Vert	12	Endoscopie	EDW-52

Pointe triangulaire inversée							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 16 mm 	4-0	1.5	45	Bleu	36		3045-31
	4-0	1.5	75	Bleu	36		3046-31





Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 19 mm 	4-0	1.5	45	Bleu	36		3047-31	
	3-0	2	45	Bleu	36		3047-41	
	3-0	2	75	Bleu	36		3055-41	
	2-0	3	75	Bleu	36		3048-51	
3/8 CERCLE 24 mm 	3-0	2	45	Bleu	36		3069-41	
	3-0	2	75	Bleu	36		3050-41	
	2-0	3	75	Bleu	36		3050-51	
	2-0	3	90	Bleu	36		3065-51	
	0	3.5	75	Bleu	36		3050-61	
	0	3.5	90	Bleu	36		3065-61	
3/8 CERCLE 26 mm 	2-0	3	75	Bleu	36		3070-51	
3/8 CERCLE 30 mm 	3-0	2	75	Bleu	36		3023-41	
	2-0	3	75	Bleu	36		3023-51	
	0	3.5	75	Bleu	36		3023-61	
	0	3.5	90	Bleu	36		3012-61	
	1	4	75	Bleu	36		3023-71	
3/8 CERCLE 39 mm 	2-0	3	75	Bleu	36		3054-51	
	0	3.5	75	Bleu	36		3054-61	
	1	4	75	Bleu	36		3054-71	
	2	5	75	Bleu	36		3054-81	

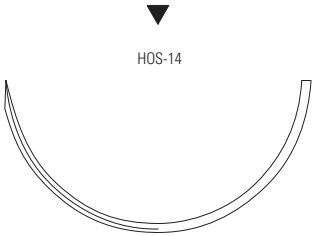
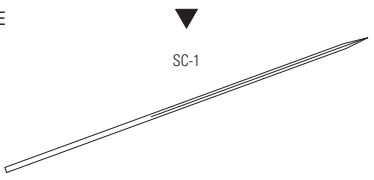
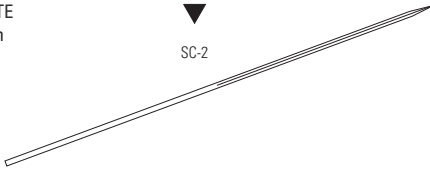
Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 77 mm  GS-18	5	7	45	Bleu	12		3056-89	
3/8 CERCLE 77 mm  GS-18	2	5	75	Bleu	24		3128-82	
	5	7	75	Bleu	24		3128-79	
1/2 CERCLE 26 mm H  HOS-10	2-0	3	75	Bleu	36		3395-51	
	0	3.5	75	Bleu	36		3395-61	
	1	4	75	Bleu	36		3395-71	
	2	5	75	Bleu	36		3395-81	

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

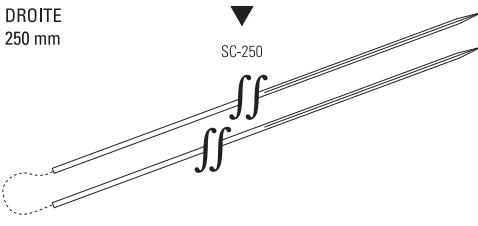
Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Bleu	36		3309-51	
	0	3.5	75	Bleu	36		3309-61	
	1	4	75	Bleu	36		3309-71	
	4	6	75	Bleu	36		3154-09	
1/2 CERCLE 37 mm H 	1	4	75	Bleu	36		3028-71	
1/2 CERCLE 40 mm 	2	5	75	Bleu	36		3155-81	
1/2 CERCLE 40 mm H 	1	4	75	Bleu	36		3026-71	
	2	5	75	Bleu	36		3026-81	

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone


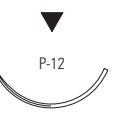
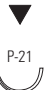
Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 57 mm H  HOS-14	5	7	75	Bleu	36		3027-79	
DROITE 51 mm  SC-1	2-0	3	75	Bleu	36		3163-51	
	0	3.5	75	Bleu	36		3163-61	
	1	4	75	Bleu	36		3163-71	
DROITE 60 mm  SC-2	3-0	2	75	Bleu	36		3062-41	
	2-0	3	75	Bleu	36		3062-51	
	2-0	3	90	Bleu	36		3165-51	
	0	3.5	75	Bleu	36		3062-61	

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe triangulaire inversée



Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
DROITE 250 mm 	2-0	3	75	Bleu	12		2947-53

Pointe triangulaire inversée de précision

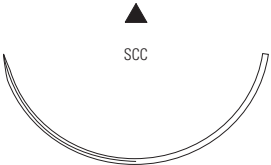
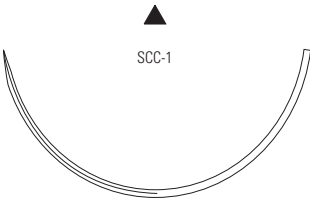
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 13 mm 	5-0	1	45	Blanc	12	Surgalloy™	SCD-2864-G
	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	SCD-3058-G
	4-0	1.5	45	Blanc	12	Surgalloy™	2862-34
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SCD-3059-G
3/8 CERCLE 19 mm 	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SCD-3049-G
1/2 CERCLE 9 mm 	4-0	1.5	45	Blanc	12		2854-33

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone




Pointe triangulaire inversée de précision

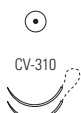
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 13 mm 	3-0	2	45	Bleu	12	Surgalloy™	3109-43
1/2 CERCLE 16 mm 	2-0	3	45	Bleu	12	Surgalloy™	3059-53

Pointe triangulaire

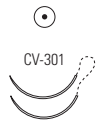




Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 48 mm 	5	7	5x75	Bleu	6		3127-79
1/2 CERCLE 60 mm 	5	7	5x75	Bleu	12		3121-79

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

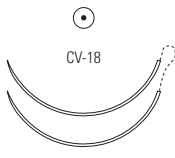
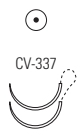
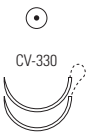

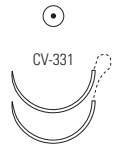
Pointe spatulée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/4 CERCLE 8 mm Courbure 90° Long. Corde 7.18 mm Rayon 5.08 mm		5-0	1	45	Blanc	12	Surgalloy™	CD-3123-K
		6-0	0.7	45	Blanc	12	Surgalloy™	CD-3113-K
		5-0	1	45	Blanc	12	Surgalloy™	D-1764-K
1/4 CERCLE 10 mm Courbure 90° Long. Corde 8.44 mm Rayon 5.97 mm		6-0	0.7	45	Blanc	12	Surgalloy™	D-1722-K
		5-0	1	45	Blanc	12	Surgalloy™	D-1760-K
1/2 CERCLE 8 mm Courbure 180° Long. Corde 4.80 mm Rayon 2.41 mm		5-0	1	45	Blanc	12	Surgalloy™	CD-0423-K
		5-0	1	45	Blanc	12	Surgalloy™	D-1780-K
		4-0	1.5	45	Blanc	12	Surgalloy™	D-1779-K

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 10 mm 	7-0	0.5	45	Bleu	36	Cardiopoint™	3288-01	

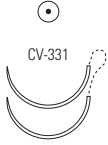

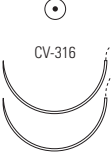
Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 13 mm 	7-0	0.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3280-01
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3280-11
	5-0	1	75	Blanc	36	Cardiopoint™		2801-21
	5-0	1	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3280-21
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3280-31
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3314-31
	3-0	2	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3280-41
3/8 CERCLE 16 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3229-31
	3-0	2	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3229-41
3/8 CERCLE 17 mm 	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™		2640-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		2645-51
	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6	Surgalloy™		2636-56
3/8 CERCLE 18 mm 	5-0	1	75	Bleu	36	Cardiopoint™		2775-21
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™		2775-31
	3-0	2	75	Bleu	36	Cardiopoint™		2775-41
3/8 CERCLE 22 mm 	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		2627-41
	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™		2627-51

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 26 mm 	2-0	3	90	Bleu	36			2644-51
	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6			3230-56
1/2 CERCLE 10 mm 	5-0	1	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3298-21
	5-0	1	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3139-21
	5-0	1	90	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3297-21
1/2 CERCLE 13 mm 	5-0	1	60	Bleu	36	Cardiopoint™		3226-21
	4-0	1.5	60	Bleu	36	Cardiopoint™		3226-31
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3249-31
	3-0	2	45	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3295-41
	3-0	2	60	Bleu	36	Cardiopoint™		3226-41
1/2 CERCLE 16 mm 	5-0	1	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3186-21
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3186-31
	3-0	2	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3186-41
	2-0	3	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3186-51
1/2 CERCLE 16 mm 	5-0	1	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3271-21
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3087-31
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3271-31
	3-0	2	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3087-41
	3-0	2	10x75	Bleu	6	Cardiopoint™		3084-46
	3-0	2	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3271-41
	2-0	3	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3087-51
	2-0	3	10x75	Bleu	6	Cardiopoint™		3084-56
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		3083-56
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3086-56
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3091-56

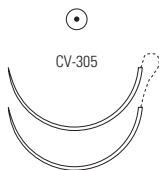
Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 16 mm 	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3269-56
1/2 CERCLE 20 mm 	3-0	2	5x45	Bleu	24	D-Tach™		3267-42
1/2 CERCLE 20 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3348-31
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3369-31
	3-0	2	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3227-41
	3-0	2	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3369-41
	2-0	3	75	Blanc	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		2978-51
	2-0	3	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3227-51
	2-0	3	75	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3348-51
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		3385-56
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3277-56
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3323-56
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm S		VCD-236
	2-0	3	90	Blanc	36	Cardiopoint™		2839-51
2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3369-51	



Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 22 mm 	2-0	3.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		3370-51
1/2 CERCLE 22 mm 	0	3.5	5x45	Bleu	24	D-Tach™		3257-62
1/2 CERCLE 22 mm H 	0	3.5	5x45	Bleu	24	D-Tach™		3374-62
	1	4	75	Bleu	36			3375-71
1/2 CERCLE 25 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3185-31
	3-0	2	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3185-41
	2-0	3	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3185-51
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		3353-56
	0	3.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3185-61
	1	4	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3185-71

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 25 mm 	4-0	1.5	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3256-31
	3-0	2	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3256-41
	3-0	2	90	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3336-41
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		3356-56
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3324-56
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 4x8 mm F		3037-56
	2-0	3	5x75	Bleu	6	Cardiopoint™		3040-56
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm S		VCD-346
	2-0	3	90	Blanc	36	Cardiopoint™		2914-51
	2-0	3	90	Blanc	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		2953-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3256-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3293-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3336-51
	2-0	3	10x90	Bleu	6	Cardiopoint™		3220-56
	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		2981-56
	2-0	3	6x90	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3306-56
	2-0	3	8x90	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3307-56
	2-0	3	105	Bleu	36	Cardiopoint™		3035-51
0	3.5	90	Blanc	36	Cardiopoint™		2914-61	
0	3.5	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3256-61	




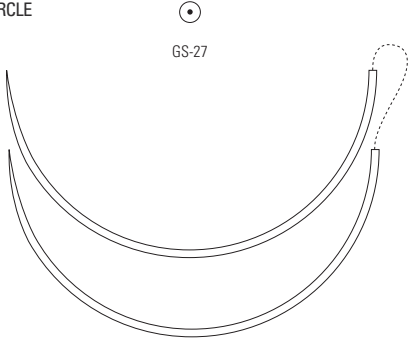
Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	5x45	Bleu	24	D-Tach™	3258-32	
	3-0	2	5x45	Bleu	24	D-Tach™	3258-42	
	2-0	3	5x45	Bleu	24	D-Tach™	3258-52	
	2-0	3	120	Bleu	36		3129-51	
	0	3.5	120	Bleu	36		3015-61	
1/2 CERCLE 27 mm 	2-0	3	75	Bleu	36		3093-51	
	0	3.5	5x45	Bleu	24	D-Tach™	3259-62	
	0	3.5	75	Bleu	36		3093-61	
1/2 CERCLE 27 mm H 	2	5	5x45	Bleu	24		3372-82	
1/2 CERCLE 30 mm 	3-0	2	75	Bleu	36		3205-41	
	2-0	3	75	Bleu	36		3205-51	
	0	3.5	75	Bleu	36		3205-61	

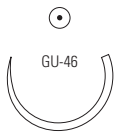

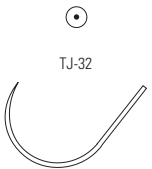
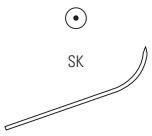
Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone


Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 35 mm 	2-0	3	75	Bleu	36	Cardioint™		3082-51
	0	3.5	75	Bleu	36	Cardioint™		3082-61
1/2 CERCLE 35 mm 	2-0	3	75	Bleu	36	Cardioint™		3274-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Cardioint™		3393-51
	0	3.5	75	Bleu	36	Cardioint™		3274-61
	0	3.5	90	Bleu	36	Cardioint™		3393-61
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	5x45	Bleu	24	D-Tach™		3260-52
	2-0	3	75	Bleu	36			3090-51
	0	3.5	5x45	Bleu	24	D-Tach™		3260-62
	0	3.5	75	Bleu	36			3090-61
	1	4	5x45	Bleu	24	D-Tach™		3260-72
	1	4	75	Bleu	36			3090-71
1/2 CERCLE 37 mm 	2	5	90	Bleu	36			3146-81

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone


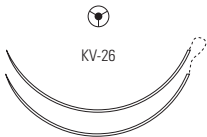
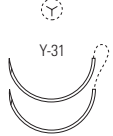
Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 37 mm H 	0	3.5	75	Bleu	36		3113-61	
	1	4	75	Bleu	36		3113-71	
	2	5	75	Bleu	36		3113-81	
	5	7	75	Bleu	36		3111-79	
1/2 CERCLE 40 mm H 	2	5	75	Bleu	36		3376-81	
1/2 CERCLE 48 mm 	0	3.5	5x45	Bleu	24	D-Tach™	3261-62	
	0	3.5	75	Bleu	36		3097-61	
	1	4	5x45	Bleu	24	D-Tach™	3261-72	
	1	4	75	Bleu	36		3097-71	
	2	5	5x45	Bleu	24	D-Tach™	3261-82	
1/2 CERCLE 76 mm 	0	3.5	75	Bleu	36		3190-61	

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

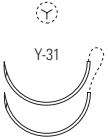
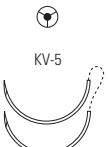

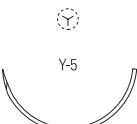
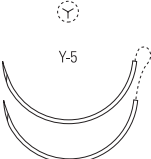
Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
5/8 CERCLE 27 mm 	2-0	3	75	Bleu	36		2768-51
5/8 CERCLE 27 mm H 	0	3.5	5x45	Bleu	24	D-Tach™	3386-62
AIGUILLE "J" 32 mm 	1	4	75	Bleu	36		3103-71
SKI 23 mm 	2-0	3	120	Bleu	36		3017-51
	0	3.5	120	Bleu	36		3017-61

Pointe tapercutting							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 18 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™	3107-31

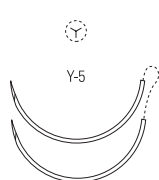
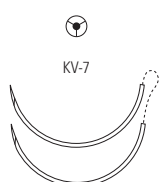
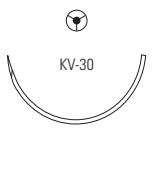
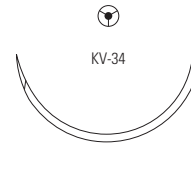
Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe tapercutting								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 18 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3182-31
	3-0	2	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3182-41
	2-0	3	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3182-51
	2-0	3	75	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3233-51
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		3211-56
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3365-56
	2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™		2631-51
	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		3052-56
	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		2658-56
3/8 CERCLE 26 mm 	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		3275-56
1/2 CERCLE 16 mm 	5-0	1	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3160-21
	4-0	1.5	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3218-36
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3160-31
	3-0	2	75	Blanc	36	Cardiopoint™		2880-41
	3-0	2	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3160-41
	2-0	3	75	Blanc	36	Cardiopoint™		2880-51
	2-0	3	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3125-51
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		2877-56
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3221-56
	2-0	3	4x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x5mm F		VCD-110
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3218-56
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3219-56
	2-0	3	90	Blanc	36	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		2811-51
2-0	3	90	Blanc	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		2808-51	


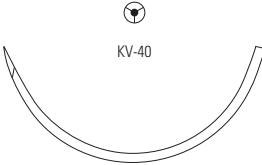
Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe tapercutting								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 16 mm 	2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3160-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3191-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3204-51
	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		2851-56
	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3255-56
1/2 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		3159-31
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		3159-41
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Surgalloy™		2879-56
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Surgalloy™ Pledget 3x3mm F		3236-56
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		3235-56
	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™		3159-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™ Pledget 3x3mm F		3193-51
1/2 CERCLE 20 mm 	2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3157-51
1/2 CERCLE 26 mm 	3-0	2	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3088-41
	2-0	3	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3088-51
1/2 CERCLE 26 mm 	3-0	2	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3167-41
	2-0	3	75	Blanc	36	Cardiopoint™		2855-51
	2-0	3	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3202-51
	2-0	3	10x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		3222-56
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3203-56
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3213-56
	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm S		VCD-256

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe tapercutting								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	90	Blanc	36	Cardiopoint™		2815-51
	2-0	3	90	Blanc	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		2840-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3167-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3212-51
	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™		2852-56
	2-0	3	10x90	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3290-56
	0	3.5	75	Bleu	36	Cardiopoint™		3202-61
	0	3.5	8x75	Bleu/Blanc	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		3213-66
	0	3.5	90	Bleu	36	Cardiopoint™		3167-61
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	8x75	Bleu/Blanc	6	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		3240-56
	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™		3168-51
	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		3239-51
1/2 CERCLE 27 mm 	0	3.5	75	Bleu	36			3117-61
	1	4	75	Bleu	36			3117-71
	2	5	4x75	Bleu/Blanc	12			2962-83
1/2 CERCLE 37 mm 	0	3.5	75	Bleu	36			3119-61

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Pointe tapercutting							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 40 mm 	0	3.5	75	Bleu	36		3092-61
	1	4	75	Bleu	36		3092-71
	2	5	5x75	Bleu	12		3147-83
	5	7	5x75	Bleu	12		3147-89
1/2 CERCLE 48 mm 	5	7	4x75	Bleu	12		2818-89

Pledget							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
Pledget en PTFE			0		36		Pledget 9.5x4.8 mm F x 6 8678-01
			0		36		Pledget 3x3mm F x10 8675-01
			0		36		Pledget 3x7mm F x10 8677-01
			0		36		Pledget 3x7mm S x10 8682-01
			0		36		Pledget 9.5 x 4.8mm S x6 8679-01

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
2627-41	10	3003-32	1	3062-41	6
2627-51	10	3003-42	1	3062-51	6
2631-51	19	3003-52	1	3062-61	6
2636-56	10	3008-21	1	3065-51	3
2640-51	10	3008-31	1	3065-61	3
2644-51	11	3008-41	1	3069-41	3
2645-51	10	3008-51	1	3070-51	3
2658-56	19	3011-51	1	3082-51	16
2768-51	18	3012-61	3	3082-61	16
2775-21	10	3015-61	15	3083-56	11
2775-31	10	3017-51	18	3084-46	11
2775-41	10	3017-61	18	3084-56	11
2801-21	10	3023-41	3	3086-56	11
2808-51	19	3023-51	3	3087-31	11
2811-51	19	3023-61	3	3087-41	11
2815-51	21	3023-71	3	3087-51	11
2818-89	22	3026-71	5	3088-41	20
2839-51	12	3026-81	5	3088-51	20
2840-51	21	3027-79	6	3090-51	16
2851-56	20	3028-71	5	3090-61	16
2852-56	21	3035-51	14	3090-71	16
2854-33	7	3037-56	14	3091-56	11
2855-51	20	3040-56	14	3092-61	22
2862-34	7	3045-31	2	3092-71	22
2877-56	19	3046-31	2	3093-51	15
2879-56	20	3047-31	3	3093-61	15
2880-41	19	3047-41	3	3097-61	17
2880-51	19	3048-51	3	3097-71	17
2914-51	14	3050-41	3	3103-71	18
2914-61	14	3050-51	3	3107-31	18
2947-53	7	3050-61	3	3109-43	8
2953-51	14	3052-56	19	3111-79	17
2962-83	21	3054-51	3	3113-61	17
2978-51	12	3054-61	3	3113-71	17
2981-56	14	3054-71	3	3113-81	17
3001-41	1	3054-81	3	3117-61	21
3001-62	1	3055-41	3	3117-71	21
3001-72	1	3056-89	4	3119-61	21
3002-62	1	3059-53	8	3121-79	8

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
3125-51	19	3190-61	17	3257-62	13
3127-79	8	3191-51	20	3258-32	15
3128-79	4	3193-51	20	3258-42	15
3128-82	4	3202-51	20	3258-52	15
3129-51	15	3202-61	21	3259-62	15
3139-21	11	3203-56	20	3260-52	16
3146-81	16	3204-51	20	3260-62	16
3147-83	22	3205-41	15	3260-72	16
3147-89	22	3205-51	15	3261-62	17
3154-09	5	3205-61	15	3261-72	17
3155-81	5	3211-56	19	3261-82	17
3157-51	20	3212-51	21	3267-42	12
3159-31	20	3213-56	20	3269-56	12
3159-41	20	3213-66	21	3271-21	11
3159-51	20	3218-36	19	3271-31	11
3160-21	19	3218-56	19	3271-41	11
3160-31	19	3219-56	19	3274-51	16
3160-41	19	3220-56	14	3274-61	16
3160-51	20	3221-56	19	3275-56	19
3163-51	6	3222-56	20	3277-56	12
3163-61	6	3226-21	11	3280-01	10
3163-71	6	3226-31	11	3280-11	10
3165-51	6	3226-41	11	3280-21	10
3167-41	20	3227-41	12	3280-31	10
3167-51	21	3227-51	12	3280-41	10
3167-61	21	3229-31	10	3288-01	9
3168-51	21	3229-41	10	3290-56	21
3182-31	19	3230-56	11	3293-51	14
3182-41	19	3233-51	19	3295-41	11
3182-51	19	3235-56	20	3297-21	11
3185-31	13	3236-56	20	3298-21	11
3185-41	13	3239-51	21	3306-56	14
3185-51	13	3240-56	21	3307-56	14
3185-61	13	3249-31	11	3309-51	5
3185-71	13	3255-56	20	3309-61	5
3186-21	11	3256-31	14	3309-71	5
3186-31	11	3256-41	14	3314-31	10
3186-41	11	3256-51	14	3323-56	12
3186-51	11	3256-61	14	3324-56	14

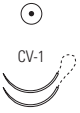




Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
3336-41	14	D-1760-K	9		
3336-51	14	D-1764-K	9		
3348-31	12	D-1779-K	9		
3348-51	12	D-1780-K	9		
3353-56	13	ED-20-L	1		
3356-56	14	ED-21-L	1		
3365-56	19	EDW-50	2		
3369-31	12	EDW-51	2		
3369-41	12	EDW-52	2		
3369-51	12	EDW-53	2		
3370-51	13	SCD-2864-G	7		
3372-82	15	SCD-3049-G	7		
3374-62	13	SCD-3058-G	7		
3375-71	13	SCD-3059-G	7		
3376-81	17	VCD-110	19		
3380-42	1	VCD-236	12		
3380-52	1	VCD-256	20		
3380-62	1	VCD-346	14		
3380-72	1				
3380-82	1				
3381-09	1				
3381-89	1				
3385-56	12				
3386-62	18				
3393-51	16				
3393-61	16				
3395-51	4				
3395-61	4				
3395-71	4				
3395-81	4				
8675-01	22				
8677-01	22				
8678-01	22				
8679-01	22				
8682-01	22				
CD-0423-K	9				
CD-3113-K	9				
CD-3123-K	9				
D-1722-K	9				

Ti-cron™/Surgidac™ Tresse et monofilament synthétique non résorbable de Polyester, non enduit ou enduit de silicone

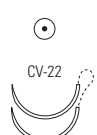
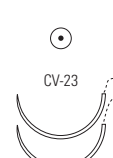
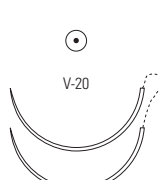
Vascufil™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester, enduit de Polytribolate™ résorbable


- Description:** Les sutures synthétiques non-résorbables Vascufil™ sont des monofilaments composés de Polybutester (copolymère de téréphtalate de butylène et de polytétraméthylène éther glycol). Les sutures sont enduites de Polytribolate™, un polymère résorbable d' e-caprolactone, de glycolide et de poloxamer 188.
- Caractéristiques:** Les propriétés uniques du monofilament Vascufil™ sont attribuées à la composition et à la structure de la fibre de polybutester qui compose la suture:
- Mémoire minimisée
 - Très grande souplesse
 - Très bonne glisse intra tissulaire et très bonne descente des nœuds
 - Résistance à l'effilochage
 - Facilité d'utilisation
- Indications:** Les sutures Vascufil™ sont généralement indiquées pour le rapprochement et ligature de tissus mous, y compris en chirurgies cardio-vasculaire et ophtalmique. Elles sont contre indiquées en neurochirurgie et microchirurgie.
- Actions:** Les sutures monofilament Vascufil™ produisent une réaction inflammatoire aiguë minimale dans les tissus, suivie d'une encapsulation graduelle de la suture par les tissus fibreux connectifs.
- Résistance:** Les sutures Vascufil™ sont non résorbables. Il n'a été noté aucun changement significatif de conservation de la résistance, in vivo. L'enduction de Polytribolate™ se résorbe en 30 jours.
- Stérilisation:** Rayons Gamma.
- Présentation:** Les sutures Vascufil™ sont livrées stériles et en différents diamètres, longueurs et quantités. Les sutures Vascufil™ sont bleues (Bleu de Phtalocyanine de cuivre).

Vascufil™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester, enduit de Polytribolate™ résorbable

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 9 mm 	7-0	0.5	45	Bleu	36	Surgalloy™		4703-01V
	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		4705-01V
	7-0	0.5	4x60	Bleu	12	Surgalloy™		4702-05V
	7-0	0.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		4704-01V
	7-0	0.5	4x75	Bleu	12	Surgalloy™		4701-05V
	6-0	0.7	45	Bleu	36	Surgalloy™		4703-11V
	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy™		4705-11V
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		4704-11V
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		4756-11V
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	36	Surgalloy™		4707-11V
	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy™		4709-11V
	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		4710-11V
	5-0	1	60	Bleu	36	Surgalloy™		4709-21V
	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		4710-21V
	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		4711-21V
3/8 CERCLE 17 mm 	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		4739-21V
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		4739-31V
3/8 CERCLE 17 mm 	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		4716-21V
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		4716-31V

Vascufil™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester, enduit de Polytribolate™ résorbable

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		4741-11V
	6-0	0.7	4x75	Bleu	12	Surgalloy™		4742-15V
	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		4741-21V
1/2 CERCLE 17 mm 	5-0	1	90	Bleu	36	Surgalloy™		4719-21V
	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		4719-31V
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		4750-31V
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		4750-41V
	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™		4750-51V

Pointe ronde pour microchirurgie								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 8 mm  Courbure 140° Long. Corde 6.13 mm Rayon 3.19 mm	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		4794-01V
	7-0	0.5	2x60	Bleu	12	Surgalloy™		4795-05V
	7-0	0.5	4x60	Bleu	12	Surgalloy™		4788-05V

Vascufil™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester, enduit de Polytribolate™ résorbable

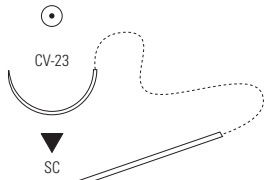
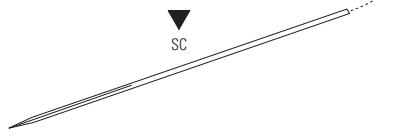
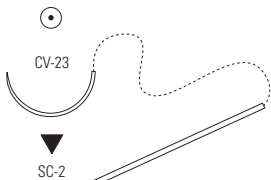
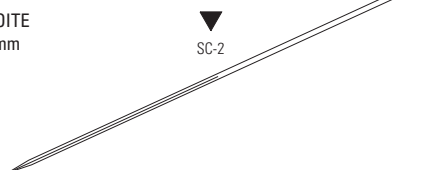
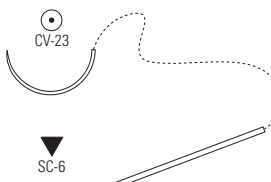
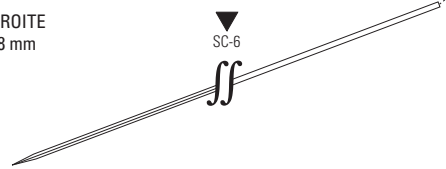
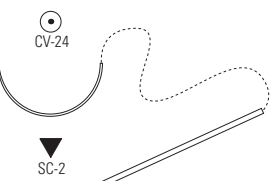
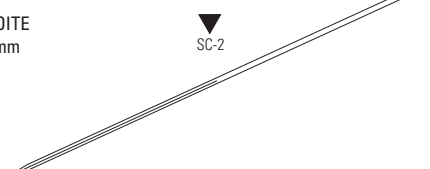
Pointe tapercutting								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 9 mm	7-0	0.5	60	Bleu	36	Surgalloy™		4714-01V
	6-0	0.7	60	Bleu	36	Surgalloy™		4714-11V
3/8 CERCLE 13 mm	6-0	0.7	75	Bleu	36	Surgalloy™		4734-11V
	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™		4734-21V
1/2 CERCLE 26 mm	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™		4730-51V
1/2 CERCLE 26 mm	4-0	1.5	90	Bleu	36	Surgalloy™		4731-31V
	3-0	2	90	Bleu	36	Surgalloy™		4731-41V
	2-0	3	90	Bleu	36	Surgalloy™		4731-51V

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
4701-05V	1				
4702-05V	1				
4703-01V	1				
4703-11V	1				
4704-01V	1				
4704-11V	1				
4705-01V	1				
4705-11V	1				
4707-11V	1				
4709-11V	1				
4709-21V	1				
4710-11V	1				
4710-21V	1				
4711-21V	1				
4714-01V	3				
4714-11V	3				
4716-21V	1				
4716-31V	1				
4719-21V	2				
4719-31V	2				
4730-51V	3				
4731-31V	3				
4731-41V	3				
4731-51V	3				
4734-11V	3				
4734-21V	3				
4739-21V	1				
4739-31V	1				
4741-11V	2				
4741-21V	2				
4742-15V	2				
4750-31V	2				
4750-41V	2				
4750-51V	2				
4756-11V	1				
4788-05V	2				
4794-01V	2				
4795-05V	2				

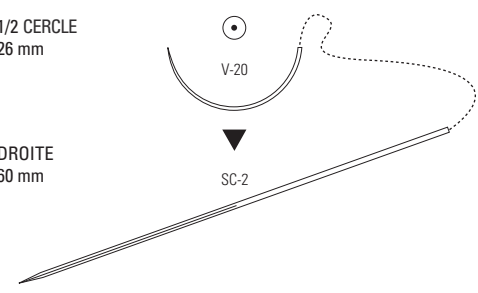
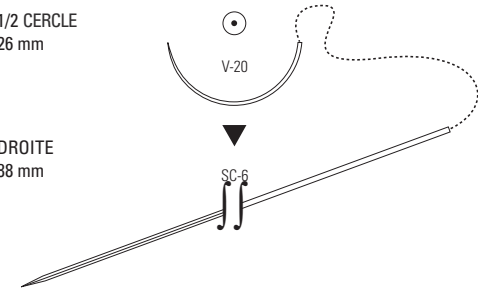
Vascufile™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester, enduit de Polytribolate™ résorbable

Flexon™ Stimulateur cardiaque externe temporaire

Description:	Flexon™ est un pace maker temporaire dont la structure est une torsade d'acier inoxydable qui peut être recouverte de PTFE (tétrafluoroproéthylène) de couleur orange ou blanche, ou de FEP (tetrafluoroéthylène-co-hexafluoropropylène) de couleur naturel.
Caractéristiques:	Excellentes résistance, souplesse et maniabilité. Non magnétique et électro-passif dans les fluides corporels.
Indications:	Flexon™ est un pace maker temporaire indiqué pour contrôler une éventuelle arythmie cardiaque auriculaire ou ventriculaire pendant et après une intervention en chirurgie cardio vasculaire.
Actions:	Flexon™ entraîne une réaction inflammatoire minimale des tissus mais nest pas resorbé.
Résistance à la traction:	Permanente.
Stérilisation:	Oxyde d'éthylène.
Présentation:	Flexon™ est disponible en format USP et EP: de la décimale 4-0 (métrique 1.5) à 0 (métrique 3.5). Le pace maker temporaire Flexon™ est livré stérile. Il est disponible en double aiguillé : une aiguille de courbure 1/2 cercle et une aiguille droite à extrémité cassable, appelée Breakaway™. Il est disponible en emballage d'une, deux ou trois douzaines."

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
<p>1/2 CERCLE 17 mm</p>  <p>DROITE 44 mm</p> 	3-0	2	60		12	Enduction FEP	2591-43	
<p>1/2 CERCLE 17 mm</p>  <p>DROITE 60 mm</p> 	3-0	2	60		12	Enduction FEP	2592-43	
<p>1/2 CERCLE 17 mm</p>  <p>DROITE 88 mm</p> 	3-0	2	60		12	Breakaway™ Enduction FEP	2586-43	
<p>1/2 CERCLE 20 mm</p>  <p>DROITE 60 mm</p> 	0	3.5	60		12	Enduction FEP	2593-63	

Flexon™ Stimulateur cardiaque externe temporaire

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm  DROITE 60 mm	0	3.5	60		12	Enduction FEP		2597-63
1/2 CERCLE 26 mm  DROITE 88 mm	2-0	3	60	Blanc	12	Breakaway™ Enduction PTFE		2615-53
	2-0	3	60	Orange	12	Breakaway™ Enduction PTFE		2617-53
	2-0	3	2x60	Orange/Blanc	12	Breakaway™ Enduction PTFE		2623-53
	0	3.5	60		12	Breakaway™ Enduction FEP		2589-63

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
2586-43	1				
2589-63	2				
2591-43	1				
2592-43	1				
2593-63	1				
2597-63	2				
2615-53	2				
2617-53	2				
2623-53	2				




Flexon™ Stimulateur cardiaque externe temporaire

Steel Monofilament non résorbable d'acier 316L inoxydable

Description:	Les sutures non résorbables en acier sont composées d'acier inoxydable 316L. Elles sont conformes à la norme ASTM F138 classe 2 "Lames et fils en acier inoxydable pour implantation chirurgicale". Les sutures en acier satisfont les exigences de la Pharmacopée des États-Unis (USP) et de l'Europe sur les sutures chirurgicales non-résorbables.
Caractéristiques:	Les sutures en acier sont complètement inertes. Elles ne se résorbent pas et sont extrêmement résistantes.
Indications:	Les sutures en acier sont utilisées pour les fermetures de sternotomies, les cures de hernies, les réparations tendineuses et certaines interventions en chirurgie orthopédique.
Actions:	Les sutures en acier suscitent une réaction inflammatoire minimale des tissus, et ne sont pas résorbées.
Résistance:	Permanente.
Stérilisation:	Oxyde d'éthylène et Rayons Gamma.
Présentation:	Les sutures en acier sont disponibles en format USP et EP : de la décimale 6-0 (métrique 0,7) à 7 (métrique 9). Les sutures sont livrées stériles, en aiguillées avec ou sans la technique daiguille Roto-grip™, en brins pré-découpés non aiguillés, en emballage d'une et trois douzaines.

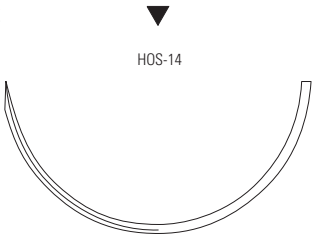
Steel Monofilament non résorbable d'acier 316L inoxydable

Ligatures								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
Brins	2-0	3	12x45		12		2407-53	
	0	3.5	12x45		12		2407-63	
	1	4	6x45		12		2408-73	
	2	5	6x45		12		2408-83	

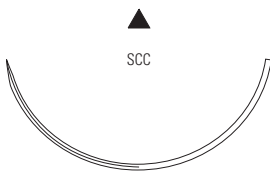
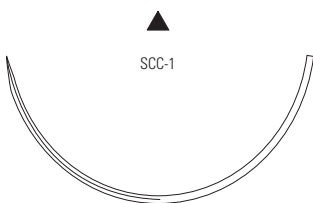
Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 26 mm 	3-0	2	50		36	Roto-grip™	2431-41	
1/2 CERCLE 40 mm 	2	5	5x45		12		2413-83	
1/2 CERCLE 48 mm 	2	5	2x45		12	Roto-grip™	2420-83	
	4	6	2x45		12	Roto-grip™	2420-09	

Steel Monofilament non résorbable d'acier 316L inoxydable

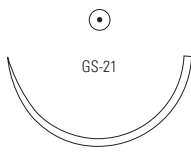
Pointe triangulaire inversée


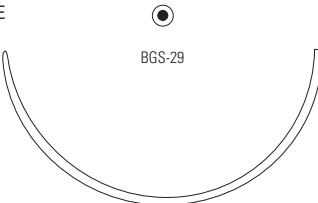

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 55 mm H 	5	7	4x45		12	Roto-grip™	2410-89
	5	7	75		12	Roto-grip™	2412-89
	5	7	2x75		12	Roto-grip™	2424-89

Pointe triangulaire

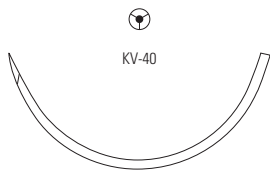
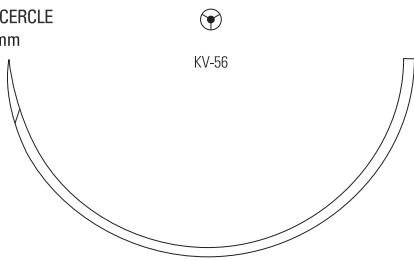
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 48 mm 	5	7	2x45		12		2222-89
	5	7	4x45		12		2224-89
	5	7	6x45		12		2226-89
	6	8	2x45		12		2222-69
	6	8	4x45		12		2224-69
	6	8	6x45		12		2226-69
	7	9	4x45		12		2224-49
1/2 CERCLE 60 mm 	5	7	2x75		12		2228-89

Steel Monofilament non résorbable d'acier 316L inoxydable

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	5x45		12		2345-53

Pointe ronde mousse							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 45 mm 	5	7	2x75		12	Protect Point™	2497-89
1/2 CERCLE 65 mm 	5	7	5x45		12	Protect Point™	2495-89
1/2 CERCLE 64 mm 	5	7	2x75		12	Protect Point™	2494-89

Steel Monofilament non résorbable d'acier 316L inoxydable

Pointe tapercutting								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 48 mm 	3	6	5x45		12		2466-25	
	5	7	4x45		12	Roto-grip™	2414-89	
	5	7	4x45		12		2393-89	
	6	8	2x45		12		2392-69	
	6	8	4x45		12		2393-69	
	7	9	2x45		12		2392-49	
1/2 CERCLE 60 mm 	5	7	5x75		12		2396-89	

Steel Monofilament non résorbable d'acier 316L inoxydable

Steel Monofilament non résorbable d'acier 316L inoxydable

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
2222-69	2				
2222-89	2				
2224-49	2				
2224-69	2				
2224-89	2				
2226-69	2				
2226-89	2				
2228-89	2				
2345-53	3				
2392-49	4				
2392-69	4				
2393-69	4				
2393-89	4				
2396-89	4				
2407-53	1				
2407-63	1				
2408-73	1				
2408-83	1				
2410-89	2				
2412-89	2				
2413-83	1				
2414-89	4				
2420-09	1				
2420-83	1				
2424-89	2				
2431-41	1				
2466-25	4				
2494-89	3				
2495-89	3				
2497-89	3				



Steel Monofilament non résorbable d'acier 316L inoxydable

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide



Description:	Les sutures synthétiques non résorbables Monosof™ - Dermalon™ sont des monofilaments stériles et inertes composés de nylon 6 et nylon 6.6.
Caractéristiques:	Le process avancé de fabrication de la molécule de nylon apporte à la suture: <ul style="list-style-type: none">- Une uniformité du diamètre du brin- Une mémoire minimisée- Une excellente sécurité des nœuds (plats)
Indications:	Les monofilaments de nylon Monosof™ - Dermalon™ peuvent être utilisés d'une manière générale pour le rapprochement, la suture et /ou ligature des tissus mous, y compris en chirurgies cardio-vasculaire, ophtalmique et neurologique.
Actions:	Les monofilaments de nylon Monosof™ - Dermalon™ suscitent tous au sein des tissus une réaction inflammatoire aiguë minime, suivie d'une encapsulation progressive de la suture par les tissus fibreux connectifs.
Résistance à la traction:	Bien que l'on ne puisse faire état d'une résorption, les sutures de nylon connaissent une hydrolyse progressive in vivo qui pourrait entraîner, avec le temps, une perte progressive de résistance.
Stérilisation:	Oxyde d'éthylène ou Rayons Gamma.
Présentation:	Les sutures Monosof™ - Dermalon™ existent en Incolore, Noir et Bleu (Bleu FD&C N°2). Elles sont disponibles en format USP et EP: de la décimale 11-0 (métrique 0.1) à 2 (métrique 5). Les sutures Dermalon™ existent en Bleu (Bleu FD&C N°2). Elles sont disponibles en format USP et EP: de la décimale 6-0 (métrique 0.7) à 1 (métrique 4). Les sutures Monosof™ - Dermalon™ sont livrées stériles. Elles sont disponibles en aiguillées et brins pré-découpés non aiguillés, en emballage d'une, deux ou trois douzaines."

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide



Ligatures							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
Brins	3-0	2	12x45	Noir	36		N-63
	2-0	3	6x45	Noir	36		N-59
	0	3.5	6x45	Noir	36		N-60
	1	4	6x45	Noir	36		N-61
	2	5	6x45	Noir	36		N-64

Pointe triangulaire inversée							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 12 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	36		1741-11
	6-0	0.7	45	Noir	36		SN-667
	6-0	0.7	45	Noir	12		SN-667-G
	6-0	0.7	75	Noir	36		SN-367
	5-0	1	45	Bleu	36		1741-21
	5-0	1	45	Noir	36		SN-871
	5-0	1	75	Noir	36		SN-368
	4-0	1.5	45	Bleu	36		1741-31
	4-0	1.5	45	Noir	36		SN-872
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	36		1747-11
	6-0	0.7	45	Noir	36		SN-660
	6-0	0.7	45	Noir	12		SN-660-G
	6-0	0.7	75	Noir	36		SN-760
	5-0	1	45	Noir	36		SN-659
	5-0	1	45	Noir	12		SN-659-G
	5-0	1	75	Noir	36		SN-761
	4-0	1.5	75	Noir	36		SN-762
	3-0	2	75	Noir	36		SN-763

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

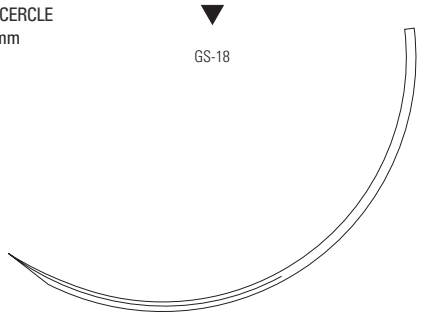
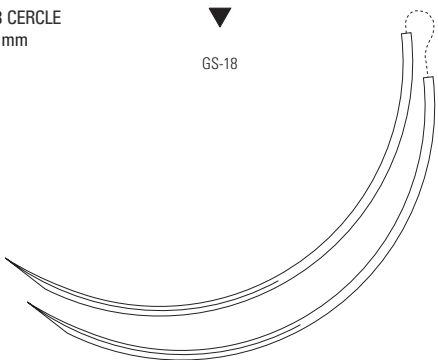

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 19 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	36		1756-11	
	5-0	1	45	Bleu	36		1756-21	
	5-0	1	45	Noir	36		SN-661	
	5-0	1	45	Noir	12		SN-661-G	
	5-0	1	75	Noir	36		SN-643	
	4-0	1.5	45	Bleu	36		1756-31	
	4-0	1.5	45	Noir	36		SN-662	
	4-0	1.5	45	Noir	12		SN-662-G	
	4-0	1.5	75	Bleu	36		1757-31	
	4-0	1.5	90	Noir	36		SN-644	
	3-0	2	45	Bleu	36		1756-41	
	3-0	2	45	Noir	36		SN-653	
	3-0	2	75	Bleu	36		1757-41	
	3-0	2	75	Noir	36		SN-641	
	3-0	2	75	Noir	12		SN-641-G	
	3-0	2	90	Noir	36		SN-665	
	2-0	3	45	Bleu	36		1756-51	
	2-0	3	75	Noir	36		SN-750	
2-0	3	90	Noir	36		SN-666		
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	45	Bleu	36		1744-31	
	4-0	1.5	45	Noir	36		SN-658	
	4-0	1.5	75	Bleu	36		1799-31	
	4-0	1.5	90	Noir	36		SN-649	
	3-0	2	45	Bleu	36		1744-41	
	3-0	2	45	Noir	36		SN-663	
	3-0	2	45	Noir	12		SN-663-G	
	3-0	2	75	Bleu	36		1799-41	
	3-0	2	75	Noir	36		SN-669	
	3-0	2	75	Noir	12		SN-669-G	
	3-0	2	90	Noir	36		SN-648	
	2-0	3	45	Noir	36		SN-758	
	2-0	3	75	Bleu	36		1799-51	
	2-0	3	90	Noir	36		SN-747	

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 26 mm 	2-0	3	45	Bleu	36		1744-51	
	2-0	3	45	Noir	36		SN-764	
	2-0	3	45	Noir	12		SN-764-G	
	2-0	3	75	Noir	36		SN-664	
	2-0	3	75	Noir	12		SN-664-G	
	2-0	3	90	Bleu	36		1720-51	
	0	3.5	75	Noir	36		SN-765	
	1	4	75	Noir	36		SN-766	
3/8 CERCLE 30 mm 	4-0	1.5	75	Noir	36		SN-670	
	3-0	2	75	Bleu	36		1750-41	
	3-0	2	75	Noir	36		SN-671	
	3-0	2	75	Noir	12		SN-671-G	
	3-0	2	90	Noir	36		SN-771	
	2-0	3	75	Noir	36		SN-688	
	2-0	3	90	Noir	36		SN-788	
	0	3.5	75	Noir	36		SN-689	
	1	4	90	Noir	36		SN-790	
3/8 CERCLE 35 mm 	3-0	2	90	Noir	36		SN-693	
	2-0	3	90	Noir	36		SN-694	
3/8 CERCLE 39 mm 	4-0	1.5	75	Noir	36		SN-672	
	3-0	2	75	Bleu	36		1727-41	
	3-0	2	75	Noir	36		SN-673	
	2-0	3	75	Bleu	36		1727-51	
	2-0	3	75	Noir	36		SN-674	
	0	3.5	90	Noir	36		SN-775	
	1	4	90	Noir	36		SN-776	
	2	5	90	Noir	36		SN-777	

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

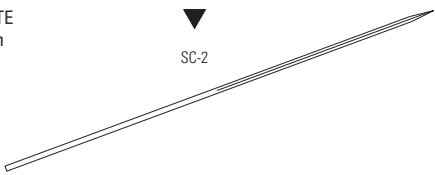
Pointe triangulaire inversée



Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 77 mm  ▼ GS-18	2	5	45	Noir	24	Protection et poids	CN-290
3/8 CERCLE 77 mm  ▼ GS-18	2	5	75	Noir	24		CN-490
1/2 CERCLE 18 mm  ▼ C-22	4-0	1.5	75	Noir	36		SN-630
	3-0	2	75	Noir	36		SN-631

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 24 mm 	3-0	2	90	Noir	36		SN-247	
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	75	Noir	36		SN-867	
1/2 CERCLE 30 mm 	3-0	2	75	Noir	36		SN-681	
	3-0	2	90	Noir	36		SN-781	
	2-0	3	75	Noir	36		SN-682	
	2-0	3	90	Noir	36		SN-782	
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	90	Noir	36		SN-881	
	2-0	3	75	Noir	36		CN-819	
	1	4	90	Noir	36		CN-822	
DROITE 51 mm 	4-0	1.5	90	Noir	36		SN-615	
	3-0	2	90	Noir	36		SN-616	
	2-0	3	90	Noir	36		SN-617	
	0	3.5	90	Noir	36		SN-618	
	1	4	90	Noir	36		SN-619	





Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
DROITE 60 mm 	3-0	2	75	Bleu	36		1764-41	
	3-0	2	75	Noir	36		SN-627	
	3-0	2	100	Bleu	36		1770-41	
	2-0	3	75	Bleu	36		1764-51	
	2-0	3	75	Noir	36		SN-628	
	2-0	3	100	Bleu	36		1770-51	
	2-0	3	100	Noir	36		SN-728	

Pointe triangulaire inversée de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 7 mm 	7-0	0.5	45	Noir	36			SN-1647
	7-0	0.5	45	Noir	12			SN-1647-G
3/8 CERCLE 11 mm 	7-0	0.5	45	Noir	12	Surgalloy™		SN-3686
	6-0	0.7	45	Bleu	12	Surgalloy™		1754-13
	6-0	0.7	45	Incolore	36	Surgalloy™		SN-1689
	6-0	0.7	45	Incolore	12	Surgalloy™		SN-1689-G
	6-0	0.7	45	Noir	36	Surgalloy™		SN-5697
	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™		SN-3697
	5-0	1	45	Noir	12	Surgalloy™		SN-3695


Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe triangulaire inversée de précision


Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12		SN-3400
	6-0	0.7	45	Noir	36	Surgalloy™	SN-5696
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5696-G
	6-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	SDN-5696-G
	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	1749-24
	5-0	1	45	Incolore	36	Surgalloy™	SN-5690
	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SN-5690-G
	5-0	1	45	Noir	36	Surgalloy™	SN-5698
	5-0	1	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5698-G
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SDN-5691-G
	4-0	1.5	45	Incolore	36	Surgalloy™	SN-5691
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SN-5691-G
	4-0	1.5	45	Noir	36	Surgalloy™	SN-5699
	4-0	1.5	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5699-G
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12		SN-3500
	5-0	1	45	Noir	12		SN-3501
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5767-G
	5-0	1	45	Noir	36	Surgalloy™	SN-5668
	5-0	1	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5668-G
	5-0	1	75	Noir	0	Surgalloy™	SN-5658-G
	4-0	1.5	45	Noir	36	Surgalloy™	SN-5694
	4-0	1.5	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5694-G

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

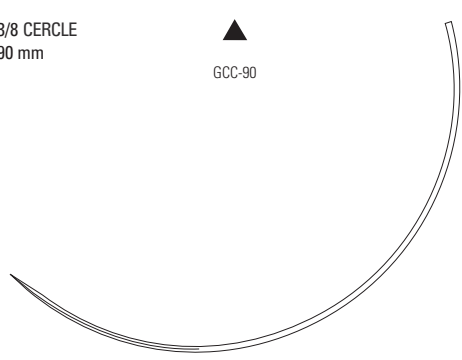
Pointe triangulaire inversée de précision



Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 16 mm 	5-0	1	45	Noir	12		SN-3963
	4-0	1.5	45	Noir	12		SN-3962
3/8 CERCLE 19 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5665-G
	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	SDN-5667-G
	5-0	1	45	Noir	36	Surgalloy™	SN-5666-G
	5-0	1	45	Noir	36	Surgalloy™	SN-5666
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SDN-5666-G
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SN-5677
	4-0	1.5	45	Noir	36	Surgalloy™	SN-5667
	4-0	1.5	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5667-G
	3-0	2	45	Bleu	12	Surgalloy™	1771-43
	3-0	2	45	Noir	36	Surgalloy™	SN-5669
3/8 CERCLE 24 mm 	5-0	1	45	Bleu	12		1779-23
	4-0	1.5	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5862-G
	3-0	2	45	Bleu	12	Surgalloy™	SDN-5943-G
	3-0	2	45	Noir	36	Surgalloy™	SN-5663
	3-0	2	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5663-G
1/2 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5660-G
	4-0	1.5	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-5662-G

Pointe triangulaire

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Bleu	36		1742-21
	4-0	1.5	45	Bleu	36		1742-31
	4-0	1.5	45	Noir	36		SN-568
	3-0	2	45	Bleu	36		1742-41
	3-0	2	45	Noir	36		SN-569


Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe triangulaire								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 90 mm 	2-0	3	100	Noir	36		CN-791	
	0	3.5	100	Noir	36		CN-792	
	1	4	100	Noir	36		CN-793	




Pointe triangulaire de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Noir	36		SN-1956	
	5-0	1	45	Noir	36		SN-1955	
	4-0	1.5	45	Noir	36		SN-1954	
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Noir	36		SN-1966	
	5-0	1	45	Noir	12	Surgalloy™	SN-3965	
	4-0	1.5	45	Noir	36		SN-1964	

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide









Pointe triangulaire de précision

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 19 mm 	4-0	1.5	45	Noir	36		SN-1994
	3-0	2	45	Noir	36		SN-1693

Pointe spatulée de précision






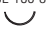


Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 6 mm  Courbure 158° Long. Corde 3.90 mm Rayon 2.00 mm Microns 150	10-0	0.2	30	Noir	12	Surgalloy™	N-2756-K
1/4 CERCLE 6 mm  Courbure 100° Long. Corde 5.90 mm Rayon 3.94 mm Microns 200	8-0	0.4	30	Noir	12	Surgalloy™	N-2714-K
3/8 CERCLE 6 mm  Courbure 135° Long. Corde 4.80 mm Rayon 2.60 mm Microns 150	10-0	0.2	20	Noir	12	Surgalloy™	N-2730-K

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide





Pointe spatulée de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 6 mm  SE-140-6  Courbure 135° Long. Corde 4.80 mm Rayon 2.60 mm Microns 150	10-0	0.2	15	Noir	12	Surgalloy™		N-2740-K
	10-0	0.2	30	Noir	12	Surgalloy™		N-2770-K
	9-0	0.3	30	Noir	12	Surgalloy™		N-2771-K
3/8 CERCLE 6 mm  SE-140-8  Courbure 135° Long. Corde 4.80 mm Rayon 2.60 mm Microns 200	10-0	0.2	20	Noir	12	Surgalloy™		N-2736-K
3/8 CERCLE 6 mm  SE-140-8  Courbure 135° Long. Corde 4.80 mm Rayon 2.60 mm Microns 200	10-0	0.2	30	Noir	12	Surgalloy™		N-2718-K
	9-0	0.3	30	Noir	12	Surgalloy™		N-2717-K
1/2 CERCLE 6 mm  SE-160-4  Courbure 160° Long. Corde 3.96 mm Rayon 2.01 mm Microns 100	11-0	0.1	30	Noir	12	Surgalloy™		N-2705-K
	10-0	0.2	30	Noir	12	Surgalloy™		N-2704-K

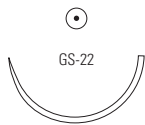

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe spatulée de précision

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
<p>7/16 CERCLE 6 mm</p>  <p>SE-160-6</p>  <p>Courbure 158° Long. Corde 3.90 mm Rayon 2.00 mm Microns 150</p>	10-0	0.2	20	Noir	12	Surgalloy™	N-2734-K
<p>1/2 CERCLE 6 mm</p>  <p>SE-160-6</p>  <p>Courbure 158° Long. Corde 3.90 mm Rayon 2.00 mm Microns 150</p>	10-0	0.2	15	Noir	12	Surgalloy™	N-2757-K
<p>7/16 CERCLE 6 mm</p>  <p>SE-160-8</p>  <p>Courbure 160° Long. Corde 3.90 mm Rayon 1.98 mm Microns 200</p>	10-0	0.2	15	Noir	12	Surgalloy™	N-2766-K
<p>1/2 CERCLE 7 mm</p>  <p>SE-175-6</p>  <p>Courbure 180° Long. Corde 4.60 mm Rayon 2.30 mm Microns 150</p>	10-0	0.2	30	Noir	12	Surgalloy™	N-2966-K

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe spatulée de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 7 mm  SE-175-8  Courbure 175° Long. Corde 4.60 mm Rayon 2.30 mm Microns 200	10-0	0.2	30	Noir	12	Surgalloy™	N-2719-K	
	8-0	0.4	30	Noir	12	Surgalloy™	N-2716-K	
COURBURE COMPOSITE 5 mm  SE-CC-6  Courbure 90°/50° Long. Corde 3.71 mm Rayon 1.5/2.8 mm Microns 150	10-0	0.2	20	Noir	12	Surgalloy™	N-2721-K	
	10-0	0.2	30	Noir	12	Surgalloy™	N-2799-K	

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 27 mm  GS-22	0	3.5	100	Noir	36		CN-225	
1/2 CERCLE 27 mm H  HGS-22	0	3.5	100	Noir	36		CN-925	
	1	4	100	Noir	36		CN-926	

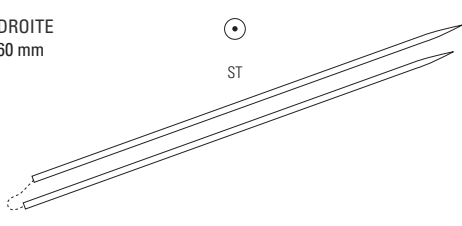
Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide



Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 30 mm 	1	4	100	Noir	36		CN-500
1/2 CERCLE 37 mm 	0	3.5	100	Noir	36		CN-623
	1	4	100	Noir	36		CN-624
1/2 CERCLE 40 mm 	0	3.5	100	Noir	36		CN-723
	1	4	100	Noir	36		CN-722
1/2 CERCLE (BOUCLE) 40 mm 	0	3.5	150	Noir	24	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CN-825-L

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide





Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 48 mm 	1	4	100	Noir	36		CN-724	
	2	5	90	Noir	36		CN-845	
1/2 CERCLE (BOUCLE) 48 mm 	0	3.5	150	Noir	24	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CN-824-L	
	1	4	150	Noir	24	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	CN-830-L	
1/2 CERCLE 65 mm 	1	4	150	Noir	24		CN-824	
	2	5	150	Noir	24		CN-825	
1/2 CERCLE (BOUCLE) 65 mm 	0	3.5	240	Noir	24	Suture de 240 cm, bouclée à 120 cm	CN-823-L	

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
DROITE 60 mm 	2-0	3	90	Noir	36		GN-283
	0	3.5	90	Noir	36		GN-284

Pointe ronde pour microchirurgie							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 4 mm 	11-0	0.1	13	Noir	12	Surgalloy™	N-2500
	Courbure 140° Long. Corde 3.08 mm Rayon 1.64 mm						
3/8 CERCLE 4 mm 	11-0	0.1	13	Noir	12	Surgalloy™	N-2510
	Courbure 140° Long. Corde 3.08 mm Rayon 1.64 mm	10-0	0.2	13	Noir	12	Surgalloy™

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe ronde pour microchirurgie								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 4 mm  MV-135-3 Courbure 140° Long. Corde 3.08 mm Rayon 1.64 mm	10-0	0.2	13	Noir	12	Surgalloy™		N-2540
	9-0	0.3	8	Noir	12	Surgalloy™		N-1603-G
	8-0	0.4	13	Noir	12	Surgalloy™		N-2541
3/8 CERCLE 5 mm  MV-70-4 Courbure 140° Long. Corde 3.85 mm Rayon 2.05 mm	10-0	0.2	13	Noir	12	Surgalloy™		N-2514
3/8 CERCLE 5 mm  MV-100-4 Courbure 140° Long. Corde 3.85 mm Rayon 2.05 mm	10-0	0.2	13	Noir	12	Surgalloy™		N-2530
	9-0	0.3	13	Noir	12	Surgalloy™		N-2532
3/8 CERCLE 5 mm  MV-135-4 Courbure 140° Long. Corde 3.85 mm Rayon 2.05 mm	10-0	0.2	13	Noir	12	Surgalloy™		N-2544
	9-0	0.3	13	Noir	12	Surgalloy™		N-2546
	8-0	0.4	13	Noir	12	Surgalloy™		N-2543

Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe ronde pour microchirurgie

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 6 mm Courbure 140° Long. Corde 4.92 mm Rayon 2.62 mm	9-0	0.3	13	Noir	12	Surgalloy™	N-2548
	8-0	0.4	13	Noir	12	Surgalloy™	N-2547



Pointe ronde mousse

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 48 mm	1	4	100	Noir	36		CN-771




Pointe Tapercutting pour microchirurgie

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 4 mm Courbure 140° Long. Corde 3.08 mm Rayon 1.64 mm	10-0	0.2	13	Noir	12	Surgalloy™	N-2513



Monosof™/Dermalon™ Monofilament synthétique non résorbable de Polyamide

Pointe Tapercutting pour microchirurgie



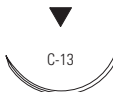


Description		Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 4 mm	 MVK-100-4	10-0	0.2	13	Noir	12	Surgalloy™	N-2531
		9-0	0.3	13	Noir	12	Surgalloy™	N-2533
Courbure	140°							
Long. Corde	3.85 mm							
Rayon	2.05 mm							

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
1720-51	3	CN-723	14	N-2716-K	13
1727-41	3	CN-724	15	N-2717-K	11
1727-51	3	CN-771	18	N-2718-K	11
1741-11	1	CN-791	9	N-2719-K	13
1741-21	1	CN-792	9	N-2721-K	13
1741-31	1	CN-793	9	N-2730-K	10
1742-21	8	CN-819	5	N-2734-K	12
1742-31	8	CN-822	5	N-2736-K	11
1742-41	8	CN-823-L	15	N-2740-K	11
1744-31	2	CN-824	15	N-2756-K	10
1744-41	2	CN-824-L	15	N-2757-K	12
1744-51	3	CN-825	15	N-2766-K	12
1747-11	1	CN-825-L	14	N-2770-K	11
1749-24	7	CN-830-L	15	N-2771-K	11
1750-41	3	CN-845	15	N-2799-K	13
1754-13	6	CN-925	13	N-2966-K	12
1756-11	2	CN-926	13	N-59	1
1756-21	2	GN-283	16	N-60	1
1756-31	2	GN-284	16	N-61	1
1756-41	2	N-1603-G	17	N-63	1
1756-51	2	N-2500	16	N-64	1
1757-31	2	N-2510	16	SDN-5666-G	8
1757-41	2	N-2512	16	SDN-5667-G	8
1764-41	6	N-2513	18	SDN-5691-G	7
1764-51	6	N-2514	17	SDN-5696-G	7
1770-41	6	N-2530	17	SDN-5943-G	8
1770-51	6	N-2531	19	SN-1647	6
1771-43	8	N-2532	17	SN-1647-G	6
1779-23	8	N-2533	19	SN-1689	6
1799-31	2	N-2540	17	SN-1689-G	6
1799-41	2	N-2541	17	SN-1693	10
1799-51	2	N-2543	17	SN-1954	9
CN-225	13	N-2544	17	SN-1955	9
CN-290	4	N-2546	17	SN-1956	9
CN-490	4	N-2547	18	SN-1964	9
CN-500	14	N-2548	18	SN-1966	9
CN-623	14	N-2704-K	11	SN-1994	10
CN-624	14	N-2705-K	11	SN-247	5
CN-722	14	N-2714-K	10	SN-3400	7

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
SN-3500	7	SN-5767-G	7	SN-671-G	3
SN-3501	7	SN-5862-G	8	SN-672	3
SN-367	1	SN-615	5	SN-673	3
SN-368	1	SN-616	5	SN-674	3
SN-3686	6	SN-617	5	SN-681	5
SN-3695	6	SN-618	5	SN-682	5
SN-3697	6	SN-619	5	SN-688	3
SN-3962	8	SN-627	6	SN-689	3
SN-3963	8	SN-628	6	SN-693	3
SN-3965	9	SN-630	4	SN-694	3
SN-5658-G	7	SN-631	4	SN-728	6
SN-5660-G	8	SN-641	2	SN-747	2
SN-5662-G	8	SN-641-G	2	SN-750	2
SN-5663	8	SN-643	2	SN-758	2
SN-5663-G	8	SN-644	2	SN-760	1
SN-5665-G	8	SN-648	2	SN-761	1
SN-5666	8	SN-649	2	SN-762	1
SN-5666-G	8	SN-653	2	SN-763	1
SN-5667	8	SN-658	2	SN-764	3
SN-5667-G	8	SN-659	1	SN-764-G	3
SN-5668	7	SN-659-G	1	SN-765	3
SN-5668-G	7	SN-660	1	SN-766	3
SN-5669	8	SN-660-G	1	SN-771	3
SN-5677	8	SN-661	2	SN-775	3
SN-568	8	SN-661-G	2	SN-776	3
SN-569	8	SN-662	2	SN-777	3
SN-5690	7	SN-662-G	2	SN-781	5
SN-5690-G	7	SN-663	2	SN-782	5
SN-5691	7	SN-663-G	2	SN-788	3
SN-5691-G	7	SN-664	3	SN-790	3
SN-5694	7	SN-664-G	3	SN-867	5
SN-5694-G	7	SN-665	2	SN-871	1
SN-5696	7	SN-666	2	SN-872	1
SN-5696-G	7	SN-667	1	SN-881	5
SN-5697	6	SN-667-G	1		
SN-5698	7	SN-669	2		
SN-5698-G	7	SN-669-G	2		
SN-5699	7	SN-670	3		
SN-5699-G	7	SN-671	3		

Novafil™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester






Description:	Les sutures synthétiques non résorbables Novafil™ sont des monofilaments composés de Polybutester (copolymère à base de butylène téréphtalate) et de PTMEG (éther glycolique de polytétraméthylène).
Caractéristiques:	Les propriétés uniques du monofilament Novafil™ sont attribuées à la composition et à la structure de la fibre de polybutester qui compose la suture: <ul style="list-style-type: none">- Douceur de la surface- Très grande souplesse- Excellente maniabilité et capacité à réaliser les nœuds- Très bonne glisse intra tissulaire et très bonne descente du nœud- Résistance à leffilochage- Facilité d'utilisation"
Indications:	Les sutures Novafil™ sont indiquées pour le rapprochement, la suture et ligature des tissus mous, y compris en chirurgie ophtalmique et cardio vasculaire. Elles sont contre indiquées en microchirurgie et en neurochirurgie.
Actions:	Les sutures Novafil™ suscitent au sein des tissus une réaction inflammatoire aiguë minime, suivie d'une encapsulation progressive de la suture par des tissus fibreux connectifs. Les sutures Novafil™ sont inertes et inaltérables.
Résistance:	Les sutures Novafil™ sont non résorbables. Aucune perte de résistance des sutures Novafil™, in vivo, n'a été identifiée à ce jour.
Stérilisation:	Rayons Gamma.
Présentation:	Les sutures Novafil™ sont disponibles en incolore ou bleu (Bleu de phthalocyanine de cuivre) en format USP et EP : de la décimale 10-0 (métrique 0.2) à 2 (métrique 5) Les sutures sont livrées stériles. Elles sont disponibles en aiguillées, en emballage d'une, deux ou trois douzaines.

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 12 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	12		4419-13	
	5-0	1	45	Bleu	12		4419-23	
	4-0	1.5	45	Bleu	12		4419-33	
3/8 CERCLE 16 mm 	5-0	1	45	Bleu	12		4555-23	
3/8 CERCLE 19 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	12		4420-13	
	5-0	1	45	Bleu	12		4420-23	
	4-0	1.5	45	Bleu	12		4420-33	
	4-0	1.5	75	Bleu	36		4032-31	
	3-0	2	45	Bleu	12		4420-43	
	3-0	2	75	Bleu	36		4554-41	
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	45	Bleu	12		4422-33	
	3-0	2	45	Bleu	12		4422-43	
	3-0	2	90	Bleu	36		4002-41	
	2-0	3	45	Bleu	12		4422-53	
	2-0	3	75	Bleu	12		4421-53	
	0	3.5	45	Bleu	12		4422-63	
3/8 CERCLE 30 mm 	4-0	1.5	75	Bleu	36		4424-31	
	3-0	2	75	Bleu	36		4424-41	
	2-0	3	75	Bleu	36		4424-51	
	0	3.5	75	Bleu	36		4424-61	

Pointe triangulaire inversée

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 39 mm 	3-0	2	75	Bleu	36		4426-41
	2-0	3	75	Bleu	36		4426-51
	0	3.5	75	Bleu	36		4426-61
1/2 CERCLE 37 mm 	0	3.5	100	Bleu	12		4009-63
	1	4	75	Bleu	36		4433-71
1/2 CERCLE 48 mm 	1	4	75	Bleu	36		4436-71
DROITE 60 mm 	3-0	2	75	Bleu	36		4490-41
	2-0	3	75	Bleu	36		4490-51





Pointe triangulaire inversée de précision

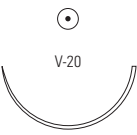
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	7-0	0.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	4410-03
	6-0	0.7	45	Bleu	12	Surgalloy™	4410-13
	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	4410-23
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-1213-G
	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-5223-G
	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™	4027-21
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-1233-G
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	12		4400-13
	5-0	1	45	Bleu	12		4400-23
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-5413-G
	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-5142-G
	5-0	1	75	Bleu	36	Surgalloy™	4028-21
	4-0	1.5	45	Bleu	36	Surgalloy™	4414-31
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-5143-G
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™	4028-31
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	12		4401-13
	5-0	1	45	Bleu	12		4401-23
	4-0	1.5	45	Bleu	12		4401-33

Pointe triangulaire inversée de précision


Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-1623-G
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-5633-G
	4-0	1.5	75	Bleu	36	Surgalloy™	4425-31
	3-0	2	45	Bleu	36	Surgalloy™	4415-43
	3-0	2	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-1643-G
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Bleu	12		4402-23
	4-0	1.5	45	Bleu	12		4402-33
	3-0	2	45	Bleu	12		4402-43
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-5833-G
	3-0	2	45	Bleu	12	Surgalloy™	SPB-5843-G
	3-0	2	75	Bleu	36	Surgalloy™	4582-43
	2-0	3	45	Bleu	12	Surgalloy™	4418-53
	2-0	3	75	Bleu	36	Surgalloy™	4582-53
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	45	Bleu	12		4403-33
	3-0	2	45	Bleu	12		4403-43
1/2 CERCLE 16 mm 	5-0	1	45	Incolore	12	Surgalloy™	SPB-5423-G
	4-0	1.5	45	Incolore	12	Surgalloy™	SPB-5433-G





Novafil™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester

Pointe triangulaire de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	12	Dermax™		XNF-697
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	12	Dermax™		XNF-1956
	5-0	1	45	Incolore	12	Dermax™		XNF-1955
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Bleu	12	Dermax™		XNF-1966
	5-0	1	45	Bleu	12	Dermax™		XNF-1965
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Dermax™		XNF-1964
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Bleu	12	Dermax™		XNF-1995
	4-0	1.5	45	Bleu	12	Dermax™		XNF-1994
	3-0	2	45	Bleu	12	Dermax™		XNF-1993

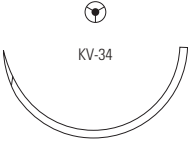
Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 26 mm 	3-0	2	75	Bleu	36	Surgalloy™		4452-41
	2-0	3	75	Bleu	36	Surgalloy™		4452-51
	0	3.5	75	Bleu	36	Surgalloy™		4452-61

Novafil™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 27 mm 	2-0	3	75	Bleu	36		4459-51
	0	3.5	75	Bleu	36		4459-61
	1	4	75	Bleu	36		4459-71
1/2 CERCLE (BOUCLE) 27 mm 	2-0	3	150	Bleu	36	Suture de 150 cm, bouclée à 75 cm	4619-51
1/2 CERCLE 37 mm 	3-0	2	75	Bleu	36		4450-41
1/2 CERCLE 37 mm 	0	3.5	75	Bleu	36		4455-61
	1	4	75	Bleu	36		4455-71

Pointe ronde							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 40 mm 	0	3.5	75	Bleu	36		4463-61
	1	4	75	Bleu	36		4463-71
1/2 CERCLE 48 mm 	1	4	75	Bleu	36		4465-71
	2	5	75	Bleu	36		4465-81
1/2 CERCLE (BOUCLE) 48 mm 	0	3.5	200	Bleu	12	Suture de 200 cm, bouclée à 100 cm	4538-63
1/2 CERCLE 65 mm 	2	5	150	Bleu	36		4470-81

Novafil™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester

Pointe tapercutting							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm 	0	3.5	75	Bleu	36		4456-61

Novafil™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
4002-41	1	4426-41	2	SPB-5833-G	4
4009-63	2	4426-51	2	SPB-5843-G	4
4027-21	3	4426-61	2	XNF-1955	5
4028-21	3	4433-71	2	XNF-1956	5
4028-31	3	4436-71	2	XNF-1964	5
4032-31	1	4450-41	6	XNF-1965	5
4400-13	3	4452-41	5	XNF-1966	5
4400-23	3	4452-51	5	XNF-1993	5
4401-13	3	4452-61	5	XNF-1994	5
4401-23	3	4455-61	6	XNF-1995	5
4401-33	3	4455-71	6	XNF-697	5
4402-23	4	4456-61	8		
4402-33	4	4459-51	6		
4402-43	4	4459-61	6		
4403-33	4	4459-71	6		
4403-43	4	4463-61	7		
4410-03	3	4463-71	7		
4410-13	3	4465-71	7		
4410-23	3	4465-81	7		
4414-31	3	4470-81	7		
4415-43	4	4490-41	2		
4418-53	4	4490-51	2		
4419-13	1	4538-63	7		
4419-23	1	4554-41	1		
4419-33	1	4555-23	1		
4420-13	1	4582-43	4		
4420-23	1	4582-53	4		
4420-33	1	4619-51	6		
4420-43	1	SPB-1213-G	3		
4421-53	1	SPB-1233-G	3		
4422-33	1	SPB-1623-G	4		
4422-43	1	SPB-1643-G	4		
4422-53	1	SPB-5142-G	3		
4422-63	1	SPB-5143-G	3		
4424-31	1	SPB-5223-G	3		
4424-41	1	SPB-5413-G	3		
4424-51	1	SPB-5423-G	4		
4424-61	1	SPB-5433-G	4		
4425-31	4	SPB-5633-G	4		

Novafil™ Monofilament synthétique non résorbable de Polybutester



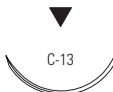


Surgilon™ Tresse synthétique non résorbable de Polyamide enduite de silicone

Description:	<p>Les sutures synthétiques non résorbables Surgilon™ sont des tresses composées de Nylon 6 et Nylon 6.6.</p> <p>Elles sont enduites uniformément de silicone pour favoriser une plus grande maniabilité, un meilleur passage intratissulaire et réduire la capillarité.</p>
Caractéristiques:	<p>Le process avancé de fabrication de la molécule de Nylon et de l'enduction apporte à la suture:</p> <ul style="list-style-type: none">- Une uniformité et solidité de la tresse- Une grande souplesse- Une excellente sécurité des nœuds (plats)- Une très grande maniabilité
Indications:	<p>Les sutures Surgilon™ peuvent être utilisées d'une manière générale pour le rapprochement et/ou la ligature de tissus mous, y compris en neurochirurgie, chirurgies cardio-vasculaire et ophtalmique.</p>
Actions:	<p>Les sutures Surgilon™ produisent une réaction inflammatoire aiguë minimale dans les tissus, suivie d'une encapsulation graduelle de la suture par les tissus fibreux connectifs.</p>
Résistance à la traction:	<p>Bien que l'on ne puisse faire état d'une résorption, les sutures de Nylon connaissent une hydrolyse progressive in vivo qui pourrait entraîner, avec le temps, une perte progressive de résistance.</p>
Stérilisation:	<p>Les sutures Surgilon™ sont stérilisées avec de l'oxyde d'éthylène pour les décimales supérieures ou égales à 6-0 (métrique 0.7) et sont stérilisées avec des rayons gamma pour les décimales allant de 5-0 (métrique 1) à 2 (métrique 5).</p>
Présentation:	<p>Les sutures Surgilon™ sont de couleur noire ou blanche, de la décimale 7-0 (métrique 0,5) à 2 (métrique 5). Les sutures sont livrées stériles. Elles sont disponibles en aiguillées, en brins pré-découpés non aiguillés, en bobine, en emballage d'une, deux ou trois douzaines.</p>

Surgilon™ Tresse synthétique non résorbable de Polyamide enduite de silicone

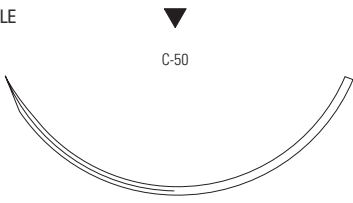

Ligatures								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
Brins	4-0	1.5	12x45	Noir	36		1918-31	
	4-0	1.5	7x75	Noir	36		1919-31	
	3-0	2	12x45	Blanc	36		1899-41	
	3-0	2	12x45	Noir	36		1918-41	
	3-0	2	7x75	Noir	36		1919-41	
	2-0	3	12x45	Blanc	36		1899-51	
	2-0	3	12x45	Noir	36		1918-51	
	2-0	3	7x75	Noir	36		1919-51	
	0	3.5	6x45	Blanc	36		1902-61	
	0	3.5	6x45	Noir	36		1917-61	
	0	3.5	7x75	Noir	36		1919-61	
	1	4	6x45	Blanc	36		1902-71	
	1	4	6x45	Noir	36		1917-71	
	1	4	7x75	Noir	36		1919-71	
	2	5	6x45	Noir	24		1917-82	
	Brin	2-0	3	100	Noir	36		1912-51
0		3.5	100	Noir	36		1912-61	
1		4	100	Noir	36		1912-71	
Bobine	3-0	2	360	Noir	24		1906-42	
	2-0	3	250	Noir	24		1920-52	
	2-0	3	300	Noir	12		1914-53	
	2-0	3	360	Noir	24		1906-52	
	0	3.5	250	Noir	24		1920-62	
	1	4	250	Noir	24		1920-72	
	1	4	300	Noir	12		1914-73	
	2	5	300	Noir	12		1914-83	
	3	6	238	Noir	12		1920-93	

Surgilon™ Tresse synthétique non résorbable de Polyamide enduite de silicone


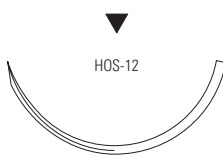
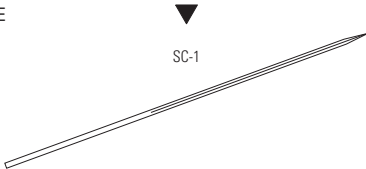
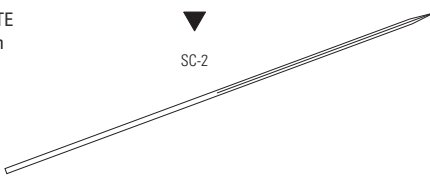
Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 12 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12		1929-13	
	5-0	1	45	Noir	12		1929-23	
	4-0	1.5	45	Noir	12		1929-33	
3/8 CERCLE 16 mm 	3-0	2	75	Noir	36		1916-41	
3/8 CERCLE 19 mm 	4-0	1.5	45	Noir	12		1931-33	
	4-0	1.5	75	Noir	36		1933-31	
	3-0	2	45	Noir	12		1931-43	
	3-0	2	75	Noir	36		1982-41	
	2-0	3	75	Noir	36		1982-51	
3/8 CERCLE 24 mm 	3-0	2	45	Noir	12		1934-43	
	3-0	2	75	Noir	36		1935-41	
	2-0	3	45	Noir	12		1934-53	
	2-0	3	75	Noir	36		1935-51	
	0	3.5	75	Noir	36		1935-61	
3/8 CERCLE 30 mm 	2-0	3	3x45	Noir	24		1936-52	
	2-0	3	75	Noir	36		1883-51	
	0	3.5	3x45	Noir	24		1936-62	
	0	3.5	75	Noir	36		1883-61	
	1	4	75	Noir	36		1883-71	

Surgilon™ Tresse synthétique non résorbable de Polyamide enduite de silicone

Pointe triangulaire inversée





Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 35 mm 	1	4	75	Noir	36		1922-71
3/8 CERCLE 50 mm 	1	4	75	Noir	36		1944-71
1/2 CERCLE 24 mm 	3-0	2	5x45	Noir	24	D-Tach™	1988-42
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	5x45	Noir	24	D-Tach™	1983-52
	2-0	3	75	Noir	36		1932-51
1/2 CERCLE 30 mm 	0	3.5	75	Noir	36		1941-61
	1	4	75	Noir	36		1941-71

Surgilon™ Tresse synthétique non résorbable de Polyamide enduite de silicone


Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Noir	36			1915-51
	0	3.5	75	Noir	36			1915-61
	1	4	75	Noir	36			1987-71
	1	4	75	Noir	36			1915-71
1/2 CERCLE 40 mm H 	1	4	5x45	Noir	24	D-Tach™		1913-72
	1	4	75	Noir	36			1895-71
DROITE 51 mm 	2-0	3	75	Noir	36			1985-51
	0	3.5	75	Noir	36			1985-61
	1	4	75	Noir	36			1985-71
DROITE 60 mm 	2-0	3	75	Noir	36			1948-51
	0	3.5	75	Noir	36			1948-61
	2	5	75	Noir	36			1948-81

Surgilon™ Tresse synthétique non résorbable de Polyamide enduite de silicone

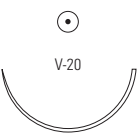
Pointe triangulaire inversée de précision

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™	1937-13
3/8 CERCLE 13 mm 	5-0	1	45	Noir	12	Surgalloy™	SBS-1928-G
	4-0	1.5	45	Noir	12	Surgalloy™	SBS-1938-G
3/8 CERCLE 16 mm 	4-0	1.5	45	Blanc	12	Surgalloy™	SBS-5881-G
	4-0	1.5	45	Noir	12	Surgalloy™	1981-33
3/8 CERCLE 19 mm 	4-0	1.5	45	Blanc	12	Surgalloy™	SBS-1884-G
	3-0	2	45	Blanc	12	Surgalloy™	SBS-1883-G


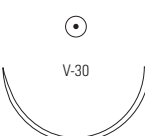

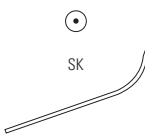
Pointe ronde

Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 10 mm 	5-0	1	5x45	Noir	24	D-Tach™	1910-22
	4-0	1.5	5x45	Noir	24	D-Tach™	1910-32

Surgilon™ Tresse synthétique non résorbable de Polyamide enduite de silicone

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 13 mm 	4-0	1.5	5x45	Noir	24	D-Tach™		1957-32
1/2 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	5x45	Noir	24	D-Tach™		1927-32
	4-0	1.5	75	Noir	36			1995-31
	3-0	2	5x45	Noir	24	D-Tach™		1927-42
	3-0	2	75	Noir	36			1995-41
1/2 CERCLE 20 mm 	4-0	1.5	5x45	Noir	24	D-Tach™		1989-32
	3-0	2	5x45	Noir	24	D-Tach™		1989-42
1/2 CERCLE 22 mm 	2-0	3	5x45	Noir	24	D-Tach™		1993-52
	0	3.5	5x45	Noir	24	D-Tach™		1993-62
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	5x45	Noir	24	D-Tach™		1958-32
	3-0	2	5x45	Noir	24	D-Tach™		1958-42
	3-0	2	75	Noir	36			1951-41
	2-0	3	5x45	Noir	24	D-Tach™		1958-52
	2-0	3	75	Noir	36			1951-51
	0	3.5	75	Noir	36			1951-61
	1	4	75	Noir	36			1951-71

Surgilon™ Tresse synthétique non résorbable de Polyamide enduite de silicone

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/2 CERCLE 27 mm 	2-0	3	75	Noir	36		1968-51	
	0	3.5	5x45	Noir	24	D-Tach™	1969-62	
	0	3.5	75	Noir	36		1968-61	
	1	4	5x45	Noir	24	D-Tach™	1969-72	
1/2 CERCLE 30 mm 	3-0	2	75	Noir	36		1964-41	
	2-0	3	75	Noir	36		1964-51	
	0	3.5	75	Noir	36		1964-61	
	1	4	75	Noir	36		1964-71	
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	5x45	Noir	24	D-Tach™	1962-52	
	0	3.5	75	Noir	36		1971-61	
	1	4	5x45	Noir	24	D-Tach™	1962-72	
	1	4	75	Noir	36		1971-71	
SKI 23 mm 	2-0	3	250	Noir	36	Endoscopie	2011-51	

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
1883-51	2	1927-32	6	1969-62	7
1883-61	2	1927-42	6	1969-72	7
1883-71	2	1929-13	2	1971-61	7
1895-71	4	1929-23	2	1971-71	7
1899-41	1	1929-33	2	1981-33	5
1899-51	1	1931-33	2	1982-41	2
1902-61	1	1931-43	2	1982-51	2
1902-71	1	1932-51	3	1983-52	3
1906-42	1	1933-31	2	1985-51	4
1906-52	1	1934-43	2	1985-61	4
1910-22	5	1934-53	2	1985-71	4
1910-32	5	1935-41	2	1987-71	4
1912-51	1	1935-51	2	1988-42	3
1912-61	1	1935-61	2	1989-32	6
1912-71	1	1936-52	2	1989-42	6
1913-72	4	1936-62	2	1993-52	6
1914-53	1	1937-13	5	1993-62	6
1914-73	1	1941-61	3	1995-31	6
1914-83	1	1941-71	3	1995-41	6
1915-51	4	1944-71	3	2011-51	7
1915-61	4	1948-51	4	SBS-1883-G	5
1915-71	4	1948-61	4	SBS-1884-G	5
1916-41	2	1948-81	4	SBS-1928-G	5
1917-61	1	1951-41	6	SBS-1938-G	5
1917-71	1	1951-51	6	SBS-5881-G	5
1917-82	1	1951-61	6		
1918-31	1	1951-71	6		
1918-41	1	1957-32	6		
1918-51	1	1958-32	6		
1919-31	1	1958-42	6		
1919-41	1	1958-52	6		
1919-51	1	1962-52	7		
1919-61	1	1962-72	7		
1919-71	1	1964-41	7		
1920-52	1	1964-51	7		
1920-62	1	1964-61	7		
1920-72	1	1964-71	7		
1920-93	1	1968-51	7		
1922-71	3	1968-61	7		

Surgilon™ Tresse synthétique non résorbable de Polyamide enduite de silicone

Sofsilk™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire**Description:**

Les sutures synthétiques non résorbables Sofsilk™ sont des tresses stériles, non mutagènes, composées de fibres de soie protéique naturelle, appelée fibroïne. Cette protéine est obtenue à partir de l'espèce domestique du ver à soie Bombyx Mori, de la famille des bombycidaés. Les fibres de soie sont traitées afin d'éliminer la gomme de sérécine naturelle déposée sur les fils de soie, puis elles sont blanchies et tressées. Une fois tressées, les sutures sont enduites uniformément d'un mélange de silicone et de cire afin de lubrifier la surface, tout en réduisant la capillarité. Ceci a pour conséquence de présenter des qualités de passage intra tissulaire et de manipulation très appréciables, tout en apportant une très grande sécurité du nœud.

Caractéristiques:

Le processus de fabrication de Sofsilk™, du tressage à l'enduction, apporte à la suture une très grande douceur et une excellente maniabilité. Le processus particulier d'enduction apporte une excellente glisse intra tissulaire en plus d'une très grande sécurité du nœud.

- Très grande douceur
- Excellente maniabilité
- Résistance optimale
- Excellente glisse intra tissulaire
- Très grande sécurité du nœud

Indications:

Les sutures Sofsilk™ sont utilisées en général pour le rapprochement et la ligature des tissus mous, y compris en microchirurgie et en chirurgies cardio vasculaire, ophtalmique et neurochirurgie.

Actions:

Les sutures Sofsilk™ suscitent au sein des tissus une réaction inflammatoire aiguë minimale, suivie d'une encapsulation progressive de la suture par les tissus fibreux connectifs.

Résistance:

Même si les sutures Sofsilk™ ne sont pas résorbées, la dégradation progressive de la fibre protéique de la soie peut engendrer une perte progressive de la résistance de la suture au cours du temps.

Stérilisation:

Rayons Gamma.

Présentation:



Les sutures Sofsilk™ sont colorées en noir (Extrait de Logwood) et enduites de silicone ou d'un composé spécial de cire. Elles sont disponibles en format USP et EP: de la décimale 9-0 (métrique 0,3) à 2 (métrique 5) et 5 (métrique 7).





Les sutures sont livrées stériles. Elles sont disponibles en aiguillées, en brins pré-découpés non aiguillés et en bobine, en emballage d'une, deux ou trois douzaines."


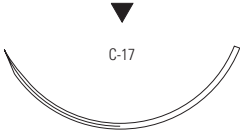
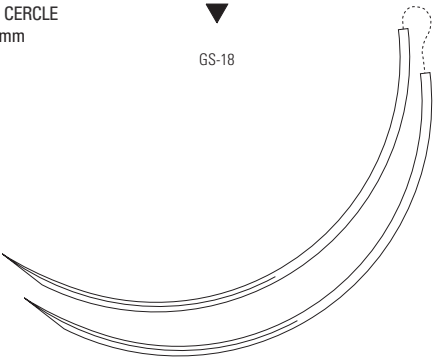

Ligatures							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
Brins	5-0	1	12x45	Noir	36	enduite de Cire	S-182
	4-0	1.5	12x45	Noir	24	enduite de Cire	S-193
	4-0	1.5	12x60	Noir	36	enduite de Cire	S-243
	4-0	1.5	12x75	Noir	36	enduite de Cire	S-303
	3-0	2	12x45	Noir	24	enduite de Cire	S-194
	3-0	2	12x60	Noir	24	enduite de Cire	S-254
	3-0	2	12x75	Noir	36	enduite de Cire	S-304
	2-0	3	12x45	Noir	24	enduite de Cire	S-195
	2-0	3	12x60	Noir	24	enduite de Cire	S-255
	2-0	3	12x75	Noir	36	enduite de Cire	S-305
	2-0	3	2x150	Noir	36	enduite de Cire	S-605
	0	3.5	12x45	Noir	24	enduite de Cire	S-176
	0	3.5	6x45	Noir	24	enduite de Cire	S-196
	0	3.5	12x60	Noir	24	enduite de Cire	S-346
	0	3.5	6x60	Noir	36	enduite de Cire	S-246
	0	3.5	12x75	Noir	24	enduite de Cire	S-316
	0	3.5	2x150	Noir	36	enduite de Cire	S-606
	1	4	6x45	Noir	24	enduite de Cire	S-197
	1	4	12x75	Noir	24	enduite de Cire	S-317
	1	4	2x150	Noir	36	enduite de Cire	S-607
	2	5	12x75	Noir	24	enduite de Cire	S-318
	2	5	2x150	Noir	36	enduite de Cire	S-608
	4	6	180	Noir	12	enduite de Cire	S-199
	5	7	3x60	Noir	36	enduite de Cire	S-282




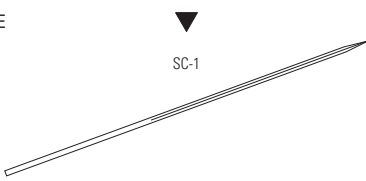
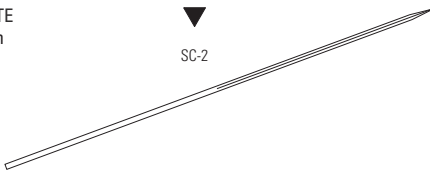
Sofsilk™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire

Ligatures							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
Brin	0	3.5	100	Noir	36	enduite de Cire	S-204
	1	4	100	Noir	36	enduite de Cire	S-205
	2	5	100	Noir	36	enduite de Cire	S-206
Bobine	4-0	1.5	250	Noir	24	enduite de Cire	LS-640
	3-0	2	250	Noir	24	enduite de Cire	LS-639
	2-0	3	250	Noir	24	enduite de Cire	LS-638
	0	3.5	250	Noir	24	enduite de Cire	LS-637
	1	4	250	Noir	24	enduite de Cire	LS-636

Pointe triangulaire inversée							
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 12 mm 	6-0	0.7	45	Noir	36	enduite de Silicone	S-1172
	5-0	1	45	Noir	36	enduite de Cire	S-1173
	4-0	1.5	45	Noir	36	enduite de Cire	S-1174
3/8 CERCLE 12 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12	enduite de Silicone	S-1272
	5-0	1	45	Noir	12	enduite de Cire	S-1273
	4-0	1.5	30	Noir	12	enduite de Cire	S-1735
	4-0	1.5	45	Noir	12	enduite de Cire	S-1274






Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 16 mm 	6-0	0.7	45	Noir	36	enduite de Silicone		SS-681
	5-0	1	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-673
	4-0	1.5	45	Noir	12	enduite de Cire		SS-686
	4-0	1.5	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-645
	3-0	2	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-745
	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-746
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-682
	5-0	1	45	Noir	12	enduite de Cire		SS-682-G
	5-0	1	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-652
	4-0	1.5	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-683
	4-0	1.5	45	Noir	12	enduite de Cire		SS-683-G
	4-0	1.5	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-653
	3-0	2	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-694
	3-0	2	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-654
	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-655
	0	3.5	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-656
3/8 CERCLE 24 mm 	4-0	1.5	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-629
	3-0	2	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-684
	3-0	2	45	Noir	12	enduite de Cire		SS-684-G
	3-0	2	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-784
	2-0	3	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-695
	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-785
	0	3.5	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-786
	1	4	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-787
3/8 CERCLE 26 mm 	2-0	3	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-685
	2-0	3	45	Noir	12	enduite de Cire		SS-685-G

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 30 mm 	3-0	2	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-675
	2-0	3	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-677
	2-0	3	45	Noir	12	enduite de Cire		SS-677-G
	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-679
	0	3.5	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-678
	0	3.5	45	Noir	12	enduite de Cire		SS-678-G
	0	3.5	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-680
	0	3.5	5x75	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		SS-70-M
	1	4	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-689
3/8 CERCLE 39 mm 	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-648
	0	3.5	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-647
	1	4	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-646
	2	5	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-651
3/8 CERCLE 77 mm 	2	5	75	Noir	24	enduite de Cire		CS-482
1/2 CERCLE 18 mm 	4-0	1.5	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-733
	3-0	2	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-631



Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 24 mm 	3-0	2	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-732
	3-0	2	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-632
	2-0	3	45	Noir	36	enduite de Cire		SS-734
	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-633
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	45	Noir	36	enduite de Cire		CS-390
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		CS-490
DROITE 51 mm 	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-523
	1	4	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-525
DROITE 60 mm 	4-0	1.5	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-621
	3-0	2	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-622
	3-0	2	100	Noir	36	enduite de Cire		SS-722
	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-623
	2-0	3	75	Noir	12	enduite de Cire		SS-623-G
	2-0	3	100	Noir	36	enduite de Cire		SS-723
	0	3.5	75	Noir	36	enduite de Cire		SS-624

Sofsilik™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire



Pointe triangulaire inversée de précision


Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 11 mm 	6-0	0.7	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Silicone	SS-5639
	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	SS-1639-G
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	SS-5649-G
	5-0	1	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5640
	5-0	1	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5640-G
	4-0	1.5	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5641
	4-0	1.5	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5641-G
3/8 CERCLE 16 mm 	5-0	1	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5678
3/8 CERCLE 19 mm 	5-0	1	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5676
	4-0	1.5	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5677
	4-0	1.5	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5677-G
	3-0	2	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5679
	3-0	2	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5679-G
3/8 CERCLE 24 mm 	3-0	2	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5684
	3-0	2	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5684-G
	2-0	3	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Cire	SS-5685-G

Sofsilk™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire



Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
3/8 CERCLE 7.4 mm 	7-0	0.5	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-1768-K	
3/8 CERCLE 7 mm Courbure 158° Long. Corde 5.76 mm Rayon 3.18 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-1769-K	
3/8 CERCLE 9 mm Courbure 130° Long. Corde 6.96 mm Rayon 3.94 mm 	6-0	0.7	30	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-1746-K	
3/8 CERCLE 11 mm Courbure 130° Long. Corde 9.66 mm Rayon 5.33 mm 	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-1750-K	


Sofsilik™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire

Pointe triangulaire inversée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 13 mm  Courbure 130° Long. Corde 10.37 mm Rayon 5.72 mm	4-0	1.5	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone		S-1789-K
1/2 CERCLE 7 mm  Courbure 170° Long. Corde 4.80 mm Rayon 2.41 mm	6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone		S-1765-K


Pointe triangulaire								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 90 mm  GCC-90	2-0	3	100	Noir	36	enduite de Cire		CS-791
	0	3.5	100	Noir	36	enduite de Cire		CS-792
	1	4	100	Noir	36	enduite de Cire		CS-793
	2	5	100	Noir	36	enduite de Cire		CS-794



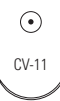
Sofsilik™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire

Pointe spatulée								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/4 CERCLE 8 mm Courbure 90° Long. Corde 7.18 mm Rayon 5.08 mm		6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-2780-K
		4-0	1.5	45	Blanc	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-2792-K
		4-0	1.5	45	Blanc	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-2782-K
1/4 CERCLE 10 mm Courbure 90° Long. Corde 8.44 mm Rayon 5.97 mm		6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-1780-K

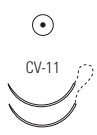

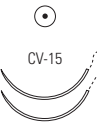


Pointe spatulée de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte	Ancienne référence	Référence de Commande	
1/4 CERCLE 6 mm Courbure 100° Long. Corde 5.90 mm Rayon 3.94 mm Microns 200		8-0	0.4	30	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-2767-K
		8-0	0.4	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-2176-K

Sofsilik™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire


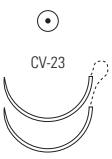

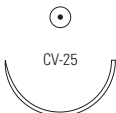
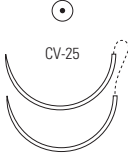
Pointe spatulée de précision								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 6 mm Courbure 135° Long. Corde 4.80 mm Rayon 2.60 mm Microns 200	 SE-140-8	8-0	0.4	30	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-2752-K
		8-0	0.4	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-1734-K
		7-0	0.5	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-1733-K
		6-0	0.7	45	Noir	12	Surgalloy™ enduite de Silicone	S-1732-K

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 9 mm  CV-1	6-0	0.7	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Silicone		VS-802
3/8 CERCLE 9 mm  CV-1	7-0	0.5	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Silicone		VS-809
3/8 CERCLE 13 mm  CV-11	6-0	0.7	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Silicone		VS-889
	5-0	1	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-890
	4-0	1.5	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-891


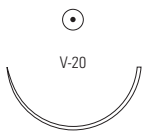
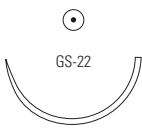
Sofsilk™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
3/8 CERCLE 13 mm 	6-0	0.7	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Silicone		VS-806
	4-0	1.5	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-709
3/8 CERCLE 17 mm 	5-0	1	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-880
	4-0	1.5	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-881
	3-0	2	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-882
3/8 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	60	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-581
1/2 CERCLE 12 mm 	5-0	1	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		CS-210
	4-0	1.5	45	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		CS-211
1/2 CERCLE 13 mm 	4-0	1.5	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-44-M

Sofsilik™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 17 mm 	5-0	1	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-45-M
	5-0	1	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-870
	4-0	1.5	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-871
	3-0	2	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-47-M
	3-0	2	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-872
	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		VS-873
1/2 CERCLE 17 mm 	4-0	1.5	60	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-671
1/2 CERCLE 20 mm 	4-0	1.5	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-451
	3-0	2	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-452
	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-453
1/2 CERCLE 22 mm 	4-0	1.5	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-34-M
	3-0	2	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-33-M
	3-0	2	5x75	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-30-M
1/2 CERCLE 22 mm 	3-0	2	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-552


Sofsilik™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire



Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 22 mm 	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		CS-562
1/2 CERCLE 26 mm 	4-0	1.5	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-64-M
	4-0	1.5	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-831
	3-0	2	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-63-M
	3-0	2	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-832
	3-0	2	5x75	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-67-M
	2-0	3	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-62-M
	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-833
	2-0	3	5x75	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-66-M
	2-0	3	120	Noir	24	enduite de Cire		ES-439
	0	3.5	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		GS-61-M
	0	3.5	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-834
	1	4	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-835
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	90	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-533
1/2 CERCLE 27 mm 	2-0	3	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		CS-16-M
	0	3.5	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		CS-17-M
	1	4	75	Noir	36	enduite de Cire		CS-100

Sofsilk™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 27 mm H 	0	3.5	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		CS-85-M
1/2 CERCLE 30 mm 	3-0	2	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-822
	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-823
	0	3.5	75	Noir	36	enduite de Cire		GS-824
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		VS-843
	0	3.5	75	Noir	36	enduite de Cire		VS-844
	1	4	75	Blanc	36	enduite de Silicone		CS-744
	1	4	75	Noir	36	enduite de Cire		VS-845
	2	5	75	Noir	36	enduite de Cire		VS-846
1/2 CERCLE 37 mm 	2-0	3	75	Noir	36	enduite de Cire		CS-423
	0	3.5	5x45	Noir	24	enduite de Cire D-Tach™		CS-10-M
	0	3.5	75	Noir	36	enduite de Cire		CS-424
	1	4	75	Noir	36	enduite de Cire		CS-425
	2	5	75	Blanc	36	enduite de Silicone		CS-426
	2	5	100	Blanc	36	enduite de Silicone		CS-434

Sofsilik™ Tresse naturelle non résorbable de soie, enduite de silicone ou de cire

Pointe ronde								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 40 mm 	2	5	75	Noir	36	enduite de Cire		CS-575

Pointe tapercutting								
Description	Diamètre (USP)	Diamètre (Métrique)	Longueur (cm)	Couleur	Unités par boîte		Ancienne référence	Référence de Commande
1/2 CERCLE 17 mm 	3-0	2	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-863
1/2 CERCLE 26 mm 	2-0	3	75	Noir	36	Surgalloy™ enduite de Cire		VS-964

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
CS-10-M	14	GS-823	14	S-206	2
CS-100	13	GS-824	14	S-2176-K	9
CS-16-M	13	GS-831	13	S-243	1
CS-17-M	13	GS-832	13	S-246	1
CS-210	11	GS-833	13	S-254	1
CS-211	11	GS-834	13	S-255	1
CS-390	5	GS-835	13	S-2752-K	10
CS-423	14	LS-636	2	S-2767-K	9
CS-424	14	LS-637	2	S-2780-K	9
CS-425	14	LS-638	2	S-2782-K	9
CS-426	14	LS-639	2	S-2792-K	9
CS-434	14	LS-640	2	S-282	1
CS-482	4	S-1172	2	S-303	1
CS-490	5	S-1173	2	S-304	1
CS-562	13	S-1174	2	S-305	1
CS-575	15	S-1272	2	S-316	1
CS-744	14	S-1273	2	S-317	1
CS-791	8	S-1274	2	S-318	1
CS-792	8	S-1732-K	10	S-346	1
CS-793	8	S-1733-K	10	S-605	1
CS-794	8	S-1734-K	10	S-606	1
CS-85-M	14	S-1735	2	S-607	1
ES-439	13	S-1746-K	7	S-608	1
GS-30-M	12	S-1750-K	7	SS-1639-G	6
GS-33-M	12	S-176	1	SS-523	5
GS-34-M	12	S-1765-K	8	SS-525	5
GS-44-M	11	S-1768-K	7	SS-5639	6
GS-45-M	12	S-1769-K	7	SS-5640	6
GS-451	12	S-1780-K	9	SS-5640-G	6
GS-452	12	S-1789-K	8	SS-5641	6
GS-453	12	S-182	1	SS-5641-G	6
GS-47-M	12	S-193	1	SS-5649-G	6
GS-61-M	13	S-194	1	SS-5676	6
GS-62-M	13	S-195	1	SS-5677	6
GS-63-M	13	S-196	1	SS-5677-G	6
GS-64-M	13	S-197	1	SS-5678	6
GS-66-M	13	S-199	1	SS-5679	6
GS-67-M	13	S-204	2	SS-5679-G	6
GS-822	14	S-205	2	SS-5684	6

Index					
Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page	Référence de Commande	Page
SS-5684-G	6	SS-689	4		
SS-5685-G	6	SS-694	3		
SS-621	5	SS-695	3		
SS-622	5	SS-70-M	4		
SS-623	5	SS-722	5		
SS-623-G	5	SS-723	5		
SS-624	5	SS-732	5		
SS-629	3	SS-733	4		
SS-631	4	SS-734	5		
SS-632	5	SS-745	3		
SS-633	5	SS-746	3		
SS-645	3	SS-784	3		
SS-646	4	SS-785	3		
SS-647	4	SS-786	3		
SS-648	4	SS-787	3		
SS-651	4	VS-533	13		
SS-652	3	VS-552	12		
SS-653	3	VS-581	11		
SS-654	3	VS-671	12		
SS-655	3	VS-709	11		
SS-656	3	VS-802	10		
SS-673	3	VS-806	11		
SS-675	4	VS-809	10		
SS-677	4	VS-843	14		
SS-677-G	4	VS-844	14		
SS-678	4	VS-845	14		
SS-678-G	4	VS-846	14		
SS-679	4	VS-863	15		
SS-680	4	VS-870	12		
SS-681	3	VS-871	12		
SS-682	3	VS-872	12		
SS-682-G	3	VS-873	12		
SS-683	3	VS-880	11		
SS-683-G	3	VS-881	11		
SS-684	3	VS-882	11		
SS-684-G	3	VS-889	10		
SS-685	3	VS-890	10		
SS-685-G	3	VS-891	10		
SS-686	3	VS-964	15		

* Il est possible que certains produits montrés dans le présent catalogue ne soient pas des marques utilisées sous licence au Canada.
Votre représentant de ventes peut vous informer sur les disponibilités.

COVIDIEN, COVIDIEN et son logo et le logo de Covidien sont des marques déposées américaines et internationales de Covidien AG.
Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une compagnie de Covidien. © 2013 Covidien.

Fabriqué par : Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA, É.-U., 02048

CDN-S00192-F Rev. 2013/09



8455, AUT. TRANSCANADIENNE
SAINT-LAURENT (QUÉBEC)
H4S 1Z1

1-877-664-8926 [TÉL]
1-800-567-1939 [TÉLÉC]

WWW.COVIDIEN.COM